

Medtronic

Engineering the extraordinary


Каталог канюль


Решения Medtronic в кардиохирургии

Первые
среди лучших



Крупнейшее
портфолио
канюль, созданное
с еще большей
ответственностью
– **перед вами.**

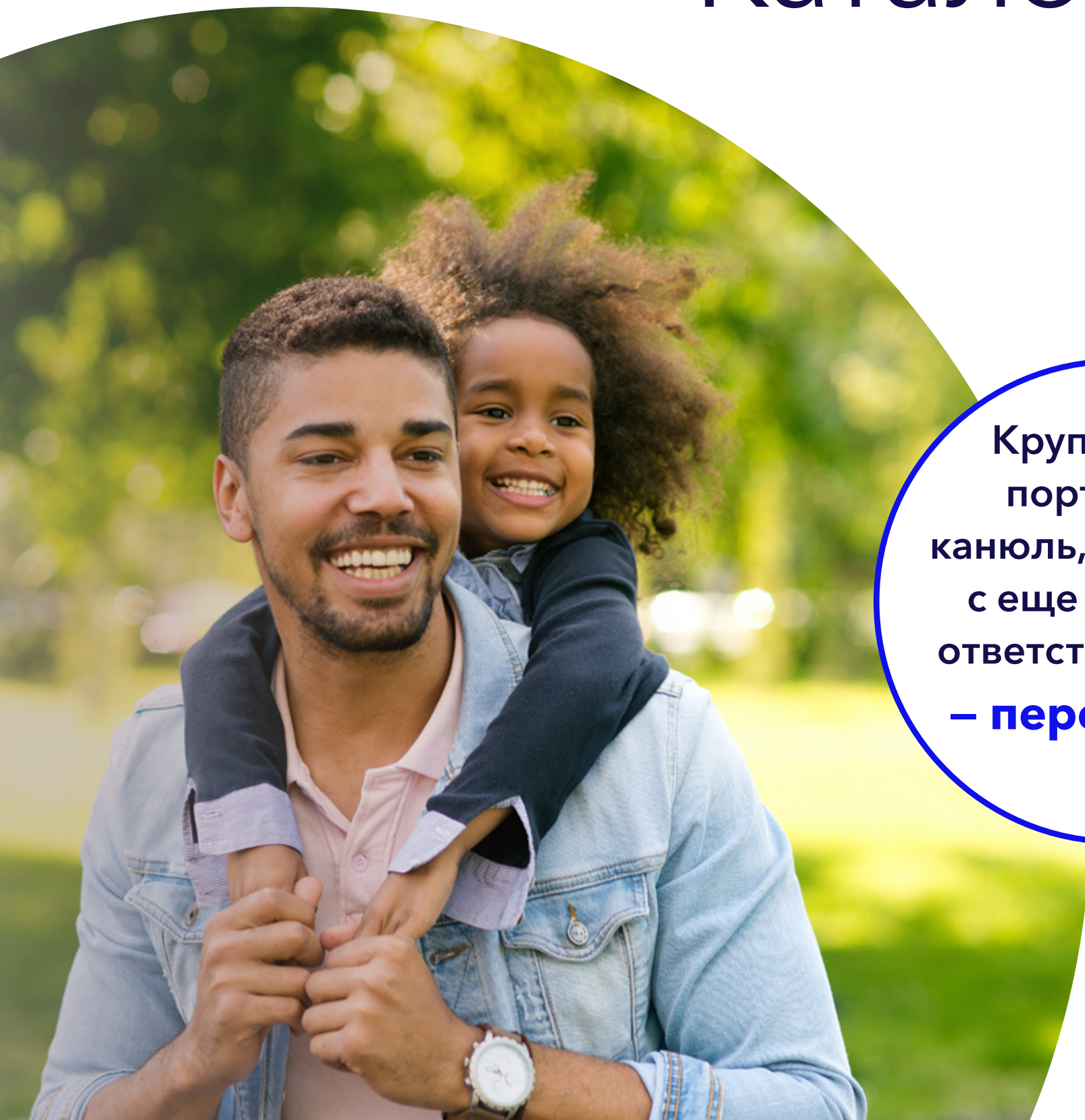

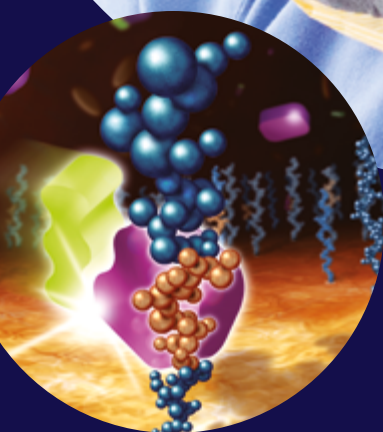

Биоактивное покрытие Cortiva

- Стойкий, невымываемый гепарин
- Обеспечивает тромбрезистентность и повышенную биосовместимость с кровью

Изделия с кодом, отмеченным звездочкой *, также доступны с биоактивным покрытием Cortiva. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании Medtronic в вашей стране.

Содержание

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании Medtronic в вашей стране.

▶ Экстракорпоральный контур

- ▶ Артериальные канюли4
- ▶ Бедренные канюли 19
- ▶ Венозные канюли28

▶ Кардиоплегия

- ▶ Антеградные канюли.....37
- ▶ Ретроградные канюли.....47
- ▶ Адаптеры для кардиоплегии..... 55

▶ Аспирационный контур и хирургические вспомогательные инструменты

- ▶ Трубки, сборники жидкости и дренажные катетеры67
- ▶ Вспомогательные хирургические инструменты.....75

▶ Приложение

- ▶ Внутренние номера компании 83
- ▶ Указатель..... 84
- ▶ Список изделий, доступных с биоактивным покрытием Cortiva 90



Облегчение боли. Восстановление здоровья. Продление жизни.

Наша миссия

Вся наша повседневная деятельность строится вокруг миссии, которая помогает нам приложить все усилия, чтобы каждый год делать жизнь миллионов людей лучше.

На протяжении более 40 лет мы применяем передовые, хорошо себя зарекомендовавшие канюли для обычных хирургических вмешательств, в детской хирургии и мини-инвазивной кардиохирургии, а с недавнего времени – изделия для экстракорпорального жизнеобеспечения. Вместе с этим мы предлагаем разные варианты хирургических отсосов, вспомогательные хирургические инструменты и кардиохирургические комплекты.

Мы можем предложить решения для кардиохирургических канюль, которые наиболее важны для вас и ваших пациентов.

Экстракорпоральный контур

Артериальные канюли



Артериальные канюли помогают крови добраться до всех уголков человеческого тела во время искусственного кровообращения. Мы знаем, насколько важно обеспечить равномерное поступление крови в аорту, которую столь легко травмировать. Мы предлагаем несколько типов канюль для разных видов вмешательств и различных анатомических особенностей. Канюли для взрослых и детей доступны в размерах от 6 до 24 F с разной конфигурацией наконечника, длиной и размером коннектора. Благодаря такому широкому размерному ряду вы без труда сможете найти канюлю, которая соответствует вашим требованиям.

Артериальные канюли



- ▶ Артериальные канюли EOPA 3D 6
- ▶ Артериальные канюли Select 3D II 7
- ▶ Удлиненные цельнолитые артериальные канюли EOPA..... 8
- ▶ Педиатрические цельнолитые артериальные канюли DLP 9
- ▶ Артериальные канюли DLP с прямым наконечником 10
- ▶ Гибкие канюли для дуги аорты DLP 11
- ▶ Артериальные канюли Select Series с прямым наконечником ... 12
- ▶ Артериальные канюли Select Series с угловым наконечником.... 13
- ▶ Артериальные канюли DLP с изогнутым наконечником и
цельнолитым армированным корпусом 14
- ▶ Артериальные канюли DLP с изогнутым наконечником и
армированным корпусом 15
- ▶ Артериальные канюли DLP с изогнутым наконечником 16
- ▶ Артериальные канюли DLP с изогнутым металлическим
наконечником 18

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2015/2446 от 02.03.2021

Артериальные канюли

Артериальные канюли EOPA 3D



Канюли обладают уникальным коническим наконечником для равномерного тока крови, а также устойчивым к перегибам корпусом с удлинёнными армированными стенками. Наконечник с тремя интегрированными желобками обеспечивает равномерный ток крови. Канюли имеют регулируемое рентгеноконтрастное шовное кольцо, обтуратор, гемостатический колпачок, а также отметки глубины.





Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

78220*	20 F (6,7 мм)
78222	22 F (7,3 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

78320	20 F (6,7 мм)
78322*	22 F (7,3 мм)

10 шт. в упак.

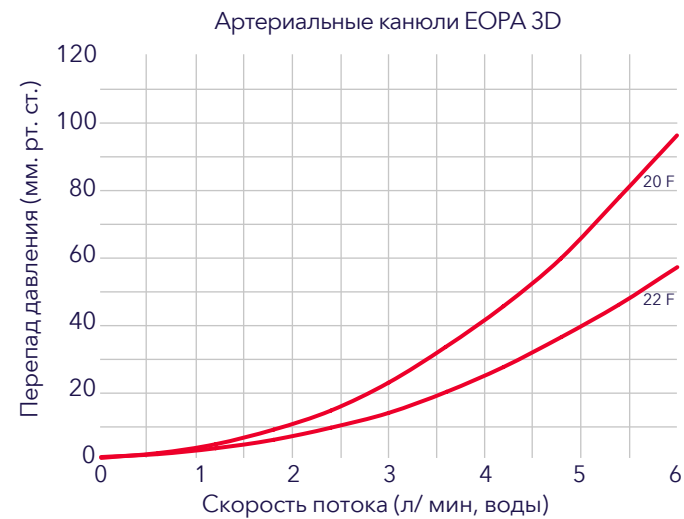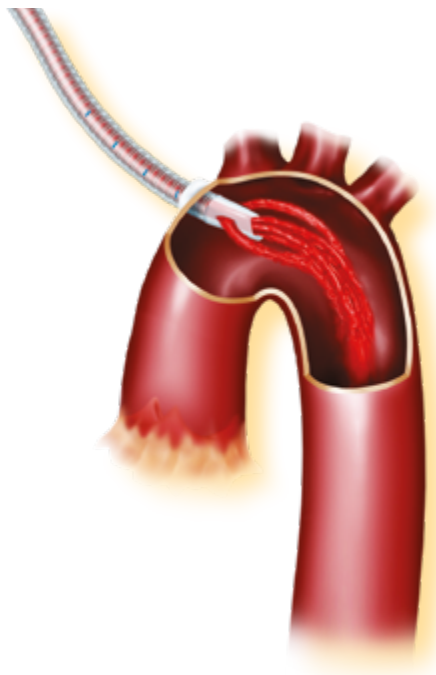

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Важная информация по безопасности


Модели EOPA 3D: канюлю вставляют до отметки минимальной глубины, так чтобы боковые порты не были видны, во избежание диссекции аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца.

Артериальные канюли

Артериальные канюли Select 3D II



Канюли имеют скошенный наконечник и конический цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус. На наконечнике есть три интегрированных желобка, которые обеспечивают равномерный ток крови.

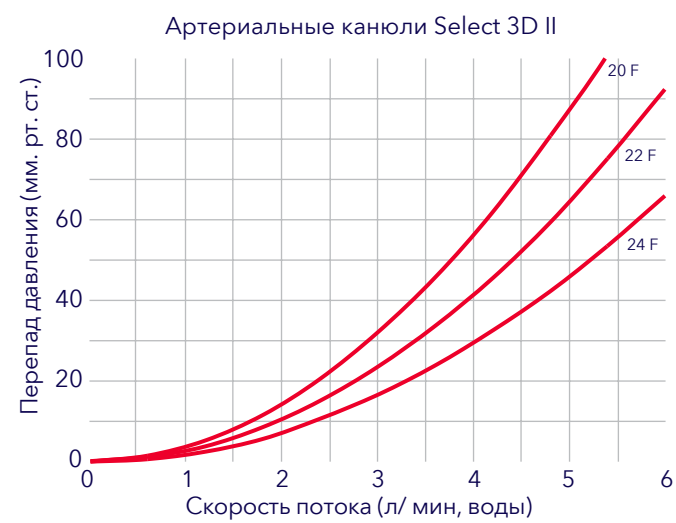

Общая длина 11,5 дюйма (29,2 см)
Наконечник 45°

Коннектор с люэр-портом
3/8 дюйма (0,95 см)

78420	20 F (6,7 мм)
78422	22 F (7,3 мм)
78424	24 F (8,0 мм)



Коннектор без люэр-порта
3/8 дюйма (0,95 см)

78522	22 F (7,3 мм)
78524	24 F (8,0 мм)



20 шт. в картонной упаковке

Артериальные канюли

Удлиненные цельнолитые артериальные канюли EOPA



Канюли имеют удлиненный цельнолитой, устойчивый к перегибам корпус с армированными стенками, с интродьюсером и гемостатическим колпачком. Имеются отметки глубины и регулируемое рентгеноконтрастное шовное кольцо.

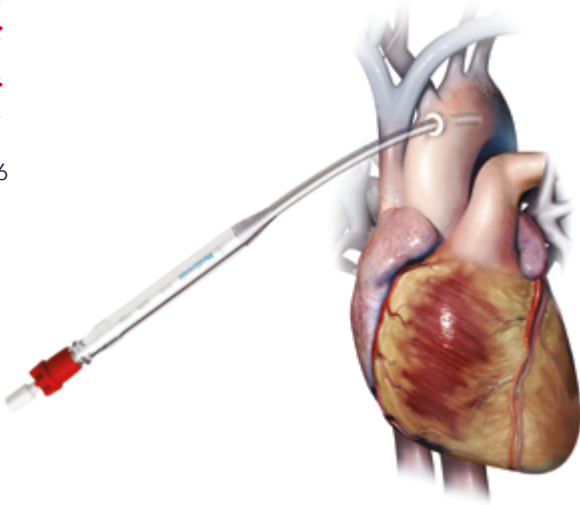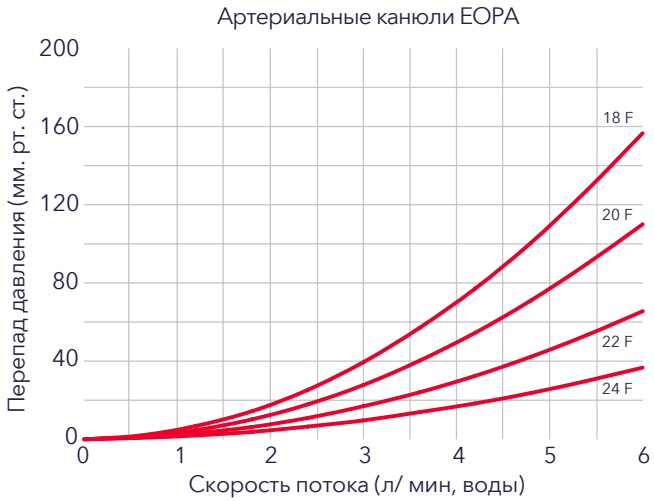

**Общая длина
12 дюймов (30,5 см)**

Интродьюсер с тупым
наконечником без проводника

**Коннектор с люэр-портом
3/8 дюйма (0,95 см)**

77418	18 F (6,0 мм)
77420*	20 F (6,7 мм)
77422*	22 F (7,3 мм)
77424	24 F (8,0 мм)

**Коннектор без люэр-порта
3/8 дюйма (0,95 см)**

77518	18 F (6,0 мм)
77520*	20 F (6,7 мм)
77522*	22 F (7,3 мм)
77524	24 F (8,0 мм)

10 шт. в упак.



**Общая длина
12 дюймов (30,5 см)**

Интродьюсер с наконечником-бужем
с проводником 0,038 дюйма (0,0965 мм)

**Коннектор с люэр-портом
3/8 дюйма (0,95 см)**

77618*	18 F (6,0 мм)
77620*	20 F (6,7 мм)
77622*	22 F (7,3 мм)
77624	24 F (8,0 мм)

**Коннектор без люэр-порта
3/8 дюйма (0,95 см)**

77718	18 F (6,0 мм)
77720*	20 F (6,7 мм)
77722*	22 F (7,3 мм)
77724	24 F (8,0 мм)

10 шт. в упак.


*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Артериальные канюли

Педиатрические цельнолитые артериальные канюли DLP



Канюли имеют скошенный наконечник и удлинённый цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус. На изделии имеется интродьюсер с регулируемой гемостатической системой и отметки глубины.

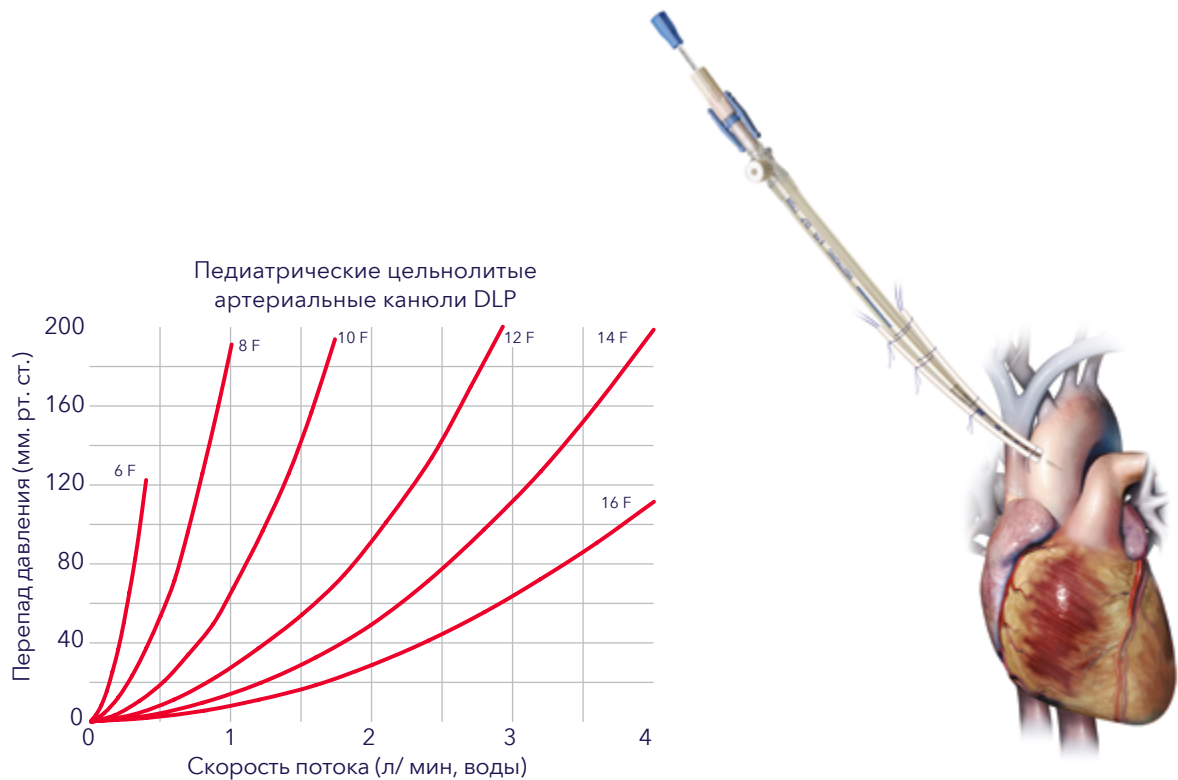

**Общая длина
9 дюймов (22,9 см)**

**Коннектор с люэр-портом
1/4 дюйма (0,64 см)
(синий порт)**

77006* 6 F (2,0 мм)

77008* 8 F (2,7 мм)

77010* 10 F (3,3 мм)

77012* 12 F (4,0 мм)

77014* 14 F (4,7 мм)

77016* 16 F (5,3 мм)

**Коннектор без люэр-порта
1/4 дюйма (0,64 см)
(синий порт)**

77106 6 F (2,0 мм)

77108 8 F (2,7 мм)

77110 10 F (3,3 мм)

77112 12 F (4,0 мм)

77114 14 F (4,7 мм)

77116 16 F (5,3 мм)

5 шт. в картонной упаковке



**Общая длина
9 дюймов (22,9 см)**

**Коннектор с люэр-портом
3/16 дюйма (0,48 см)
(серый порт)**

77206 6 F (2,0 мм)

77208 8 F (2,7 мм)

77210 10 F (3,3 мм)

77212 12 F (4,0 мм)

**Коннектор без люэр-порта
3/16 дюйма (0,48 см)
(серый порт)**

77306 6 F (2,0 мм)

77308 8 F (2,7 мм)

77310 10 F (3,3 мм)

77312 12 F (4,0 мм)

5 шт. в картонной упаковке






*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Артериальные канюли

Артериальные канюли DLP с прямым наконечником



Канюли для детей и взрослых имеют скошенный наконечник и конический корпус. Имеется широкий выбор размеров.

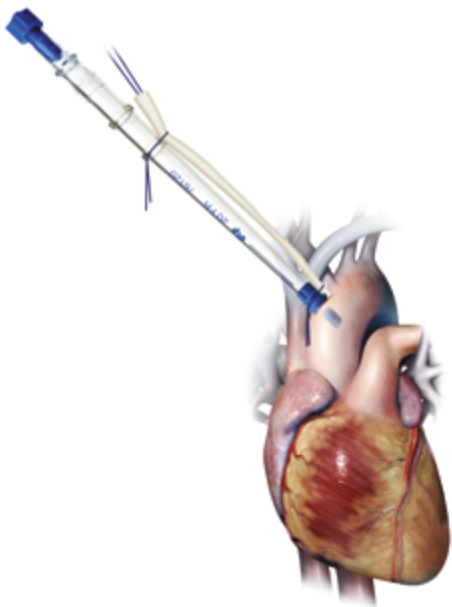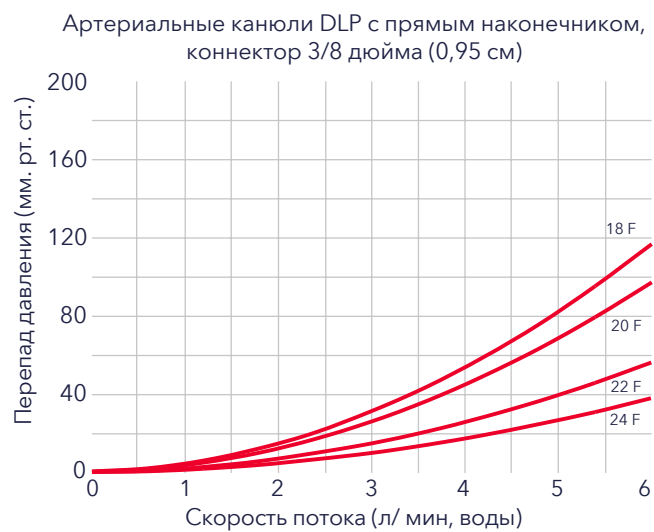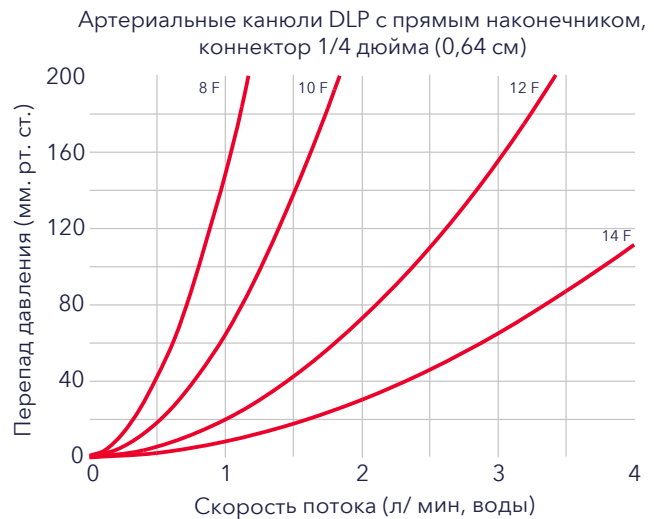

Общая длина 7 дюймов (17,8 см)

Коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)

75008	8 F (2,7 мм)
75010	10 F (3,3 мм)
75012	12 F (4,0 мм)
75014	14 F (4,7 мм)

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

75318*	18 F (6,0 мм)
75320*	20 F (6,7 мм)
75322	22 F (7,3 мм)
75324	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке

Общая длина 8 дюймов (20,3 см)

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

76020	20 F (6,7 мм)
76022	22 F (7,3 мм)
76024	24 F (8,0 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

76118	18 F (6,0 мм)
76120	20 F (6,7 мм)
76122	22 F (7,3 мм)
76124	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке


*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Артериальные канюли

Гибкие канюли для дуги аорты DLP



Канюли имеют скошенный наконечник и конический цельнолитой корпус. Они имеют регулируемое кольцо и отметки глубины.

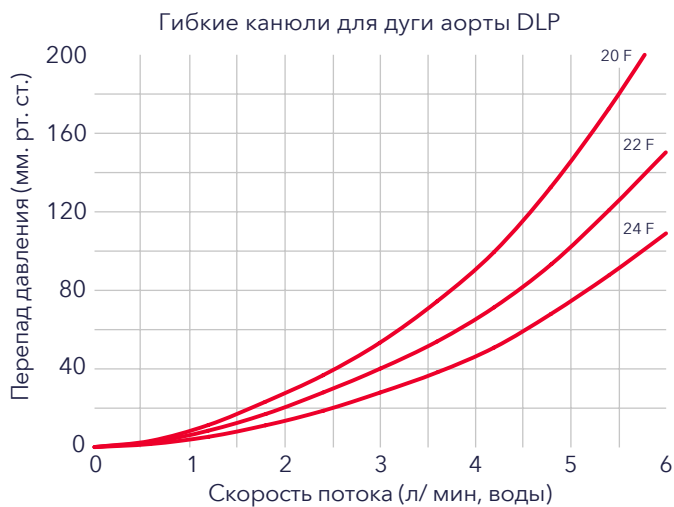

Общая длина
11 дюймов (27,9 см)

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

70420	20 F (6,7 мм)
70422	22 F (7,3 мм)
70424	24 F (8,0 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

71420	20 F (6,7 мм)
71422	22 F (7,3 мм)
71424*	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Артериальные канюли

Артериальные канюли Select Series с прямым наконечником



Канюли имеют скошенный наконечник, конический цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус и колпачок на коннекторе.



Общая длина
12 дюймов (30,5 см)

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

72120	20 F (6,7 мм)
72122	22 F (7,3 мм)
72124*	24 F (8,0 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

72220	20 F (6,7 мм)
72222	22 F (7,3 мм)
72224*	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке


*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Артериальные канюли

Артериальные канюли Select Series с угловым наконечником



Канюли имеют скошенный наконечник, конический цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус и колпачок на коннекторе.

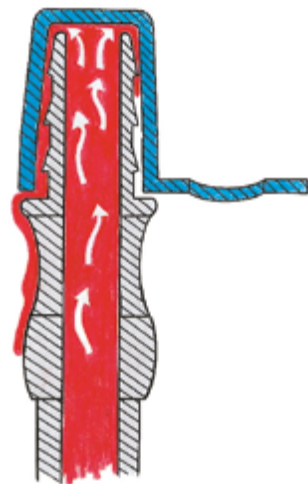

**Общая длина
12 дюймов (30,5 см)**

Наконечник 45° без боковых отверстий

**Коннектор с люэр-портом
3/8 дюйма (0,95 см)**

72420	20 F (6,7 мм)
72422	22 F (7,3 мм)
72424	24 F (8,0 мм)

**Коннектор без люэр-порта
3/8 дюйма (0,95 см)**

72520	20 F (6,7 мм)
72522	22 F (7,3 мм)
72524	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке



**Общая длина
12 дюймов (30,5 см)**

Наконечник 45° с боковыми отверстиями

**Коннектор с люэр-портом
3/8 дюйма (0,95 см)**


73420	20 F (6,7 мм)
73422	22 F (7,3 мм)
73424	24 F (8,0 мм)

Артериальные канюли

Артериальные канюли DLP с изогнутым наконечником и цельнолитым армированным корпусом



Канюли имеют скошенный изогнутый наконечник, конический цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус, линию ориентации наконечника и колпачок на коннекторе.

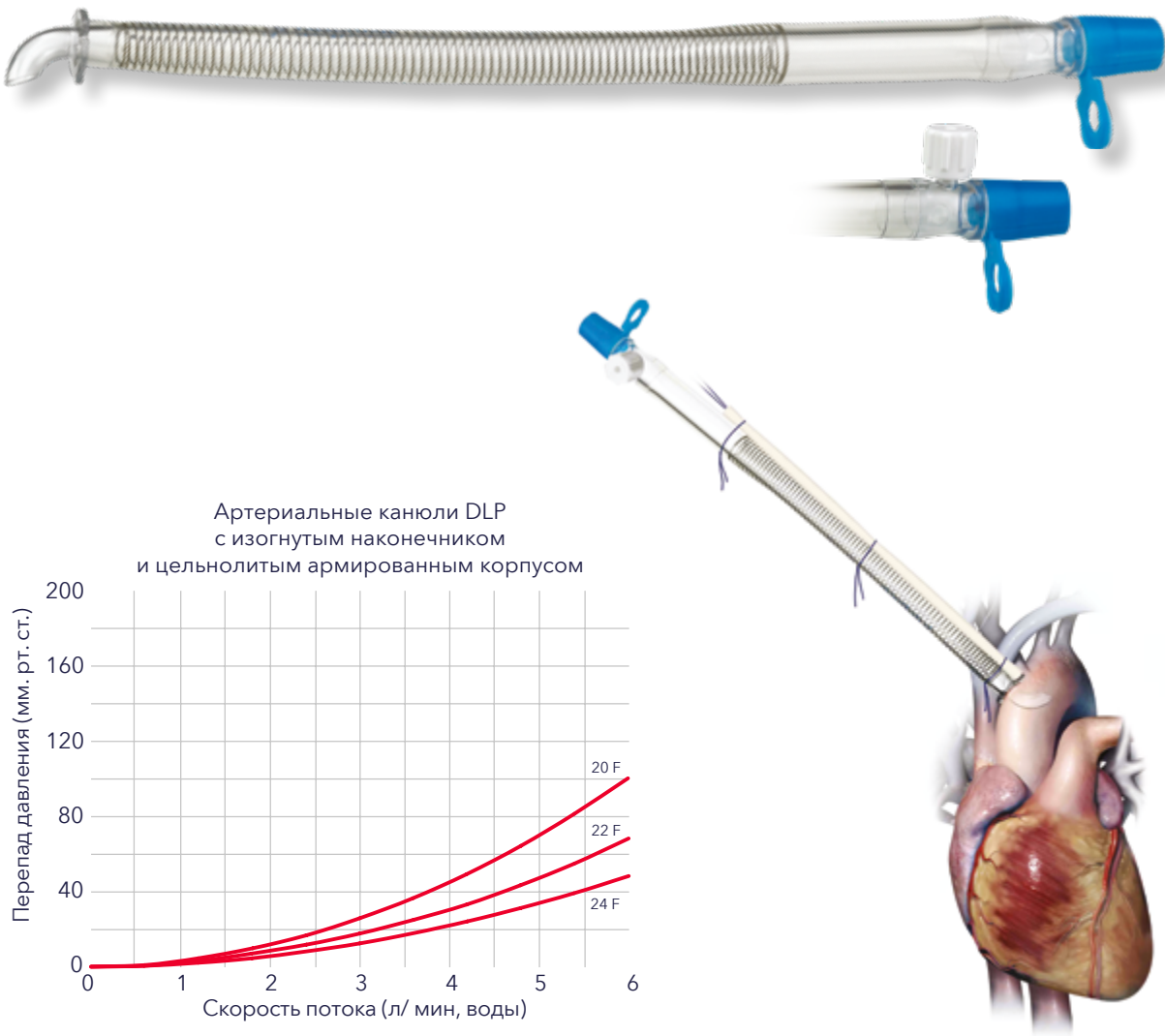

Общая длина 11 дюймов (27,9 см)

Круглый фланец

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

87220	20 F (6,7 мм)
87222*	22 F (7,3 мм)
87224	24 F (8,0 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

87120	20 F (6,7 мм)
87122	22 F (7,3 мм)
87124	24 F (8,0 мм)

10 шт. в упак.

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Артериальные канюли

Артериальные канюли DLP с изогнутым наконечником и армированным корпусом



Канюли отличаются большей длиной, скошенным изогнутым наконечником с линией ориентации и армированным корпусом.




**Общая длина
13 дюймов (33,0 см)**

Изогнутый наконечник с фланцем

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

87024	24 F (8,0 мм)
--------------	---------------

10 шт. в упак.

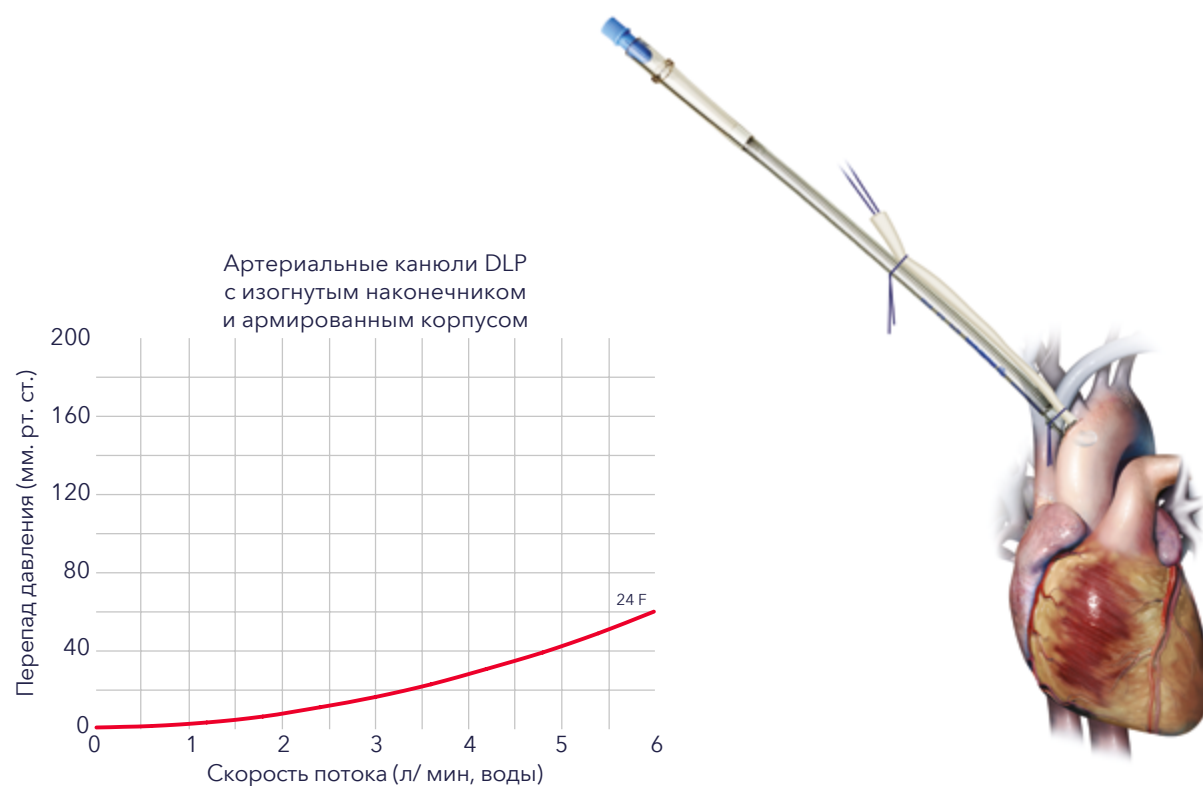

**Общая длина
13 дюймов (33,0 см)**

Изогнутый наконечник без фланца

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

87924	24 F (8,0 мм)
--------------	---------------

10 шт. в упак.





Артериальные канюли

Артериальные канюли DLP с изогнутым наконечником



Канюли имеют скошенный изогнутый наконечник с линией ориентации и конический корпус.

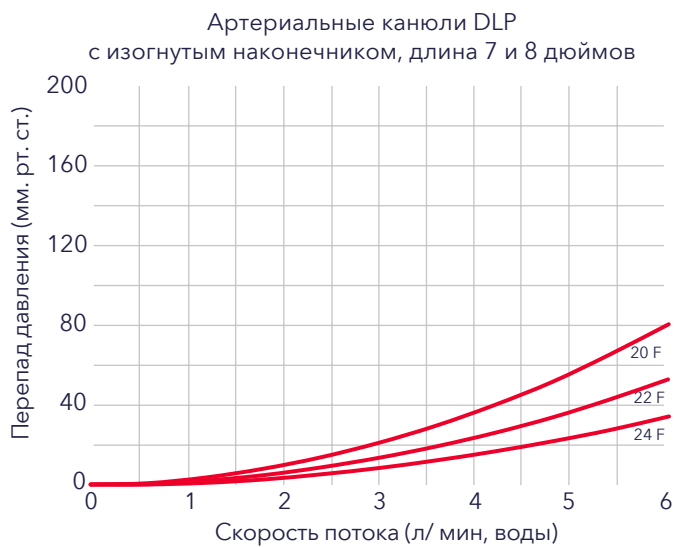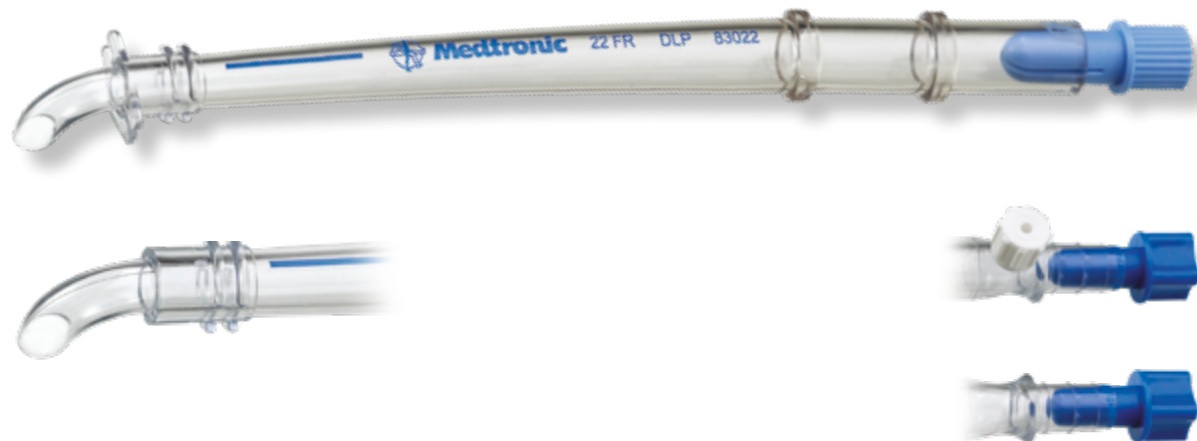

Общая длина 7 дюймов (17,8 см)

Изогнутый наконечник с фланцем

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

83020	20 F (6,7 мм)
83022	22 F (7,3 мм)
83024	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке

Общая длина 7 дюймов (17,8 см)

Изогнутый наконечник без фланца

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

84020	20 F (6,7 мм)
84022	22 F (7,3 мм)
84024	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке

Общая длина 8 дюймов (20,3 см)

Изогнутый наконечник с фланцем

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

88020	20 F (6,7 мм)
88022	22 F (7,3 мм)
88024	24 F (8,0 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

88120	20 F (6,7 мм)
88122	22 F (7,3 мм)
88124	24 F (8,0 мм)

20 шт. в картонной упаковке

Общая длина 8 дюймов (20,3 см)

Изогнутый наконечник без фланца

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

89020	20 F (6,7 мм)
89022	22 Fr (7.3 mm)
89024	24 Fr (8.0 mm)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

89120	20 F (6,7 мм)
89122	22 F (7,3 мм)
89124	24 F (8,0 мм)


20 шт. в картонной упаковке

Артериальные канюли

Артериальные канюли DLP с изогнутым наконечником



Канюли имеют скошенный изогнутый наконечник с линией ориентации и конический корпус.

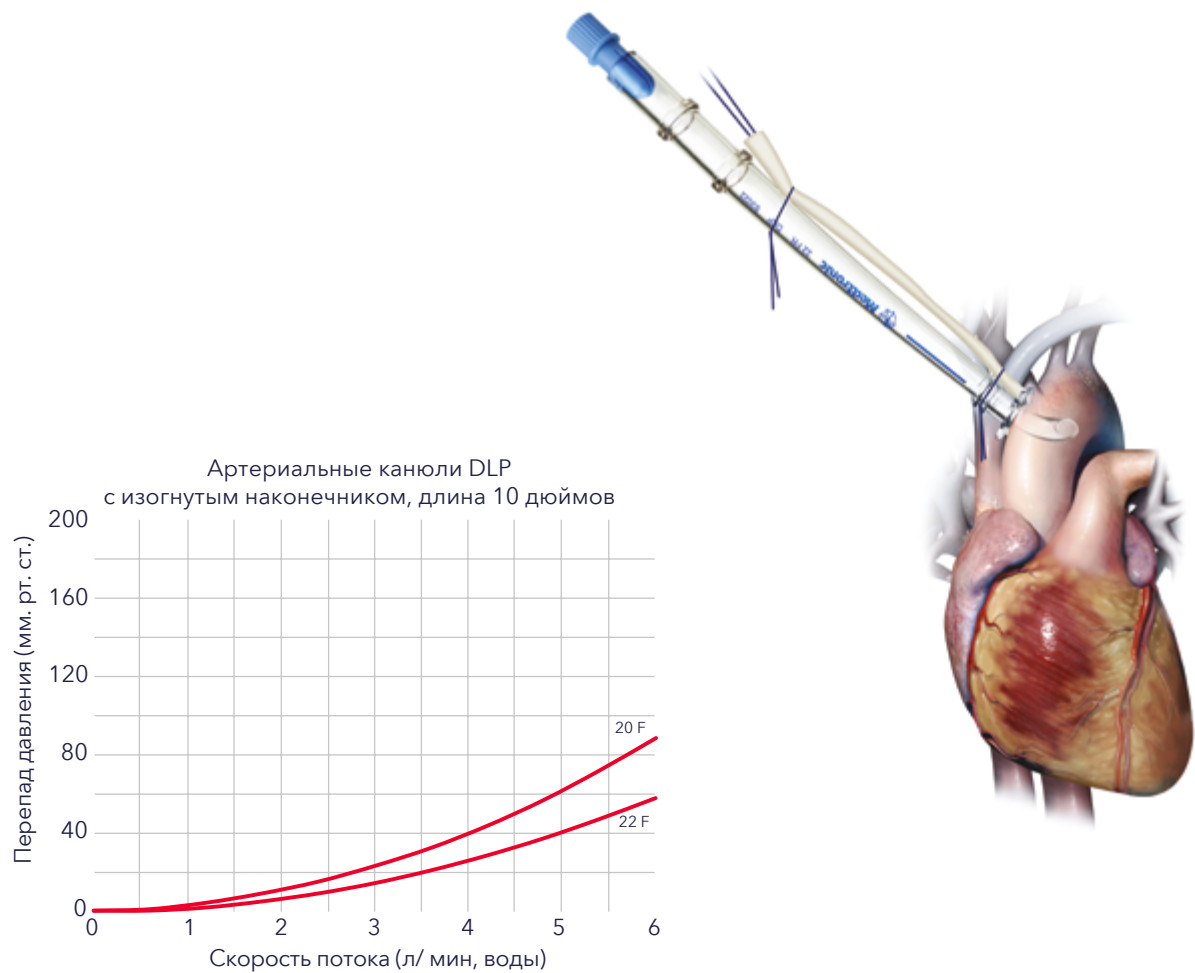

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Общая длина 10 дюймов (25,4 см)

Изогнутый наконечник с фланцем, мягкий корпус

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

81020	20 F (6,7 мм)
81022	22 F (7,3 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

81120*	20 F (6,7 мм)
81122*	22 F (7,3 мм)

20 per carton

Общая длина 10 дюймов (25,4 см)

Изогнутый наконечник без фланца, мягкий корпус

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

82020	20 F (6,7 мм)
82022	22 F (7,3 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

82120	20 F (6,7 мм)
82122	22 F (7,3 мм)



20 шт. в картонной упаковке

Артериальные канюли

Артериальные канюли DLP с изогнутым металлическим наконечником



Канюли имеют скошенный металлический наконечник с линией ориентации и конический корпус. Имеются конфигурации со стандартным или мягким фланцем.

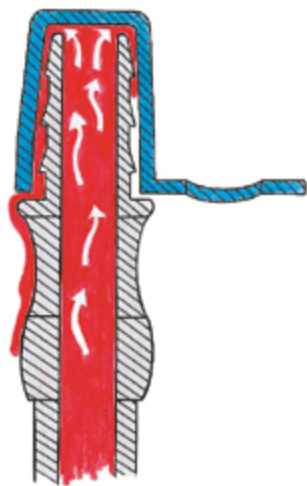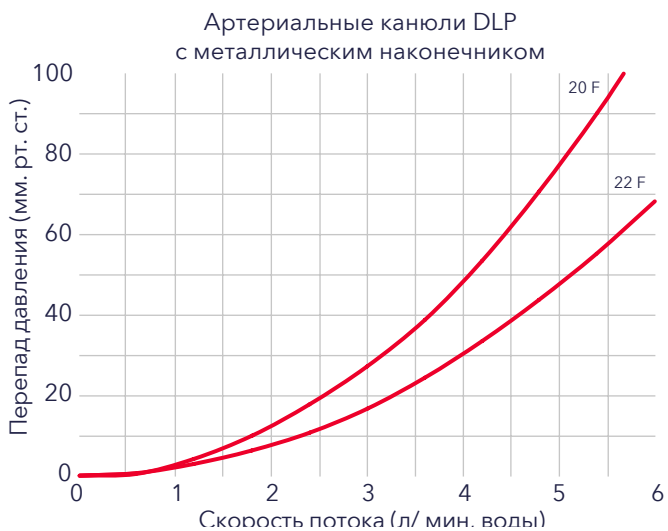

Общая длина 10,5 дюйма (26,7 см)

Мягкий фланец

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

80020	20 F (6,7 мм)
80022	22 F (7,3 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

80120*	20 F (6,7 мм)
80122	22 F (7,3 мм)

20 шт. в картонной упаковке

Общая длина 10,5 дюйма (26,7 см)

Стандартный фланец

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

80220	20 F (6,7 мм)
80222	22 F (7,3 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

80320	20 F (6,7 мм)
80322	22 F (7,3 мм)

20 шт. в картонной упаковке

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Экстракорпоральный контур

Бедренные канюли



Крупнейшее портфолио канюль.

Лучшие решения

– для вас.

Феморальные канюли обеспечивают большую универсальность канюлирования для удовлетворения потребностей самых разных пациентов, и способствуют уменьшению разрезов в грудной клетке. Бедренные канюли компании Medtronic можно вводить в бедренную вену и/или артерию как открытым, так и чрескожным способом. За счет уникальной конструкции с гладкими тонкими армированными стенками канюли Bio-Medicus отличаются прекрасной гибкостью и обеспечивают максимальную скорость потока. Благодаря широкому размерному ряду вы без труда сможете найти канюлю, которая соответствует вашим требованиям.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7870 от 30.09.2022
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7637 от 24.09.2018

Medtronic

Бедренные канюли



- ▶ Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические артериальные и венозные 21
- ▶ Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные артериальные / для яремной вены 22
- ▶ Bio-Medicus Multi-Stage Комплекты чрескожные бедренные венозные многоступенчатые 23
- ▶ Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные/бикавальные 24
- ▶ Bio-Medicus NextGen Комплекты для введения канюль 25
- ▶ Канюли бедренные венозные DLP 26
- ▶ Канюли бедренные артериальные DLP 27

Бедренные канюли Bio-Medicus NextGen

Канюли бедренные педиатрические артериальные и венозные




Педиатрические канюли имеют гибкую, устойчивую к перегибам конструкцию с тонкими стенками, которая обеспечивает максимальную скорость потока. За счет особой формы наконечник легко вводится, место перехода наконечника в корпус цельное, укрепленное, боковые отверстия сглажены. Модели, предназначенные как для артерий, так и вен, имеют твердый конический сердечник и интродьюсер из бесфталатного ПВХ для чрескожного введения и возможностью введения проводника (диаметром 0,025 мм). Канюли можно вводить как традиционным способом, так и по методу Сельдингера. У каждой канюли есть регулируемое рентгеноконтрастное шовное кольцо, усовершенствованный подогнанный колпачок и зажим для фиксации трубки. Все компоненты производятся без применения диэтилгексилфталата.

Артериальные

Коннектор без люэр-порта 1/4 дюйма (0,64 см)

		Общая длина	Длина наконечника
96820-108	8 F (2,7 мм)	17,5 см	10,0 см
96820-110	10 F (3,3 мм)	18,0 см	10,5 см
96820-112	12 F (4,0 мм)	18,5 см	10,0 см
96820-114	14 F (4,7 мм)	19,0 см	11,5 см

1 шт. в картонной упаковке

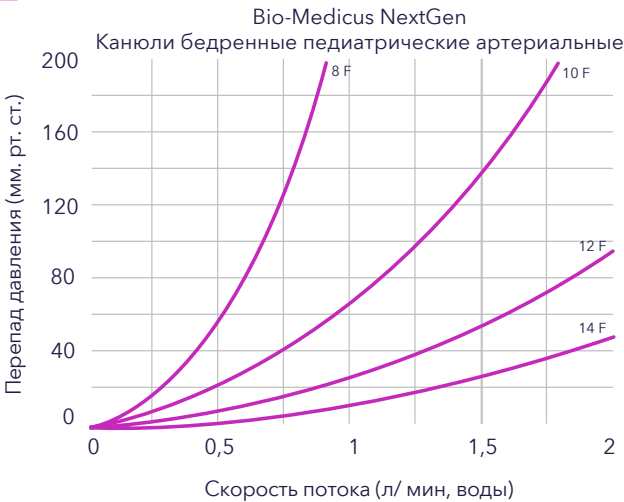


Венозные

Коннектор без люэр-порта 1/4 дюйма (0,64 см)

		Общая длина	Длина наконечника
96830-108	8 F (2,7 мм)	22,9 см	10,0 см
96830-110	10 F (3,3 мм)	22,9 см	10,5 см
96830-112	12 F (4,0 мм)	22,9 см	10,0 см
96830-114	14 F (4,7 мм)	22,9 см	11,5 см

1 шт. в картонной упаковке

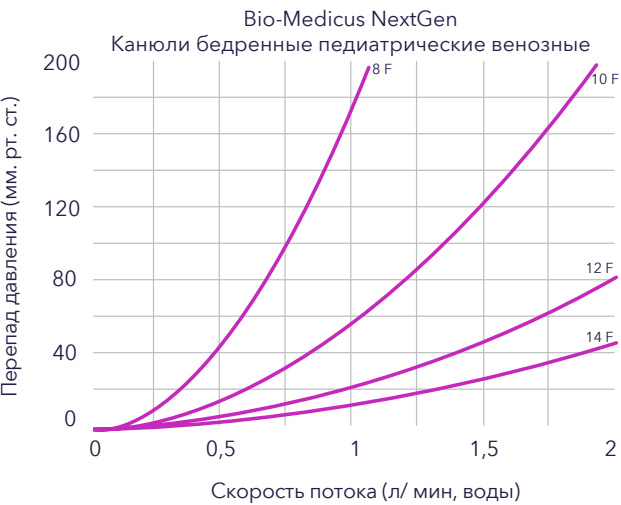

Bio-Medicus

Канюли педиатрические

0,38 мм
Толщина стенки

Зажим для фиксации канюли



Комплект для введения
96553 см. на стр. 25

Бедренные канюли Bio-Medicus NextGen

Канюли бедренные артериальные / для яремной вены




Канюли имеют гибкую, устойчивую к перегибам конструкцию с тонкими стенками, которая обеспечивает максимальную скорость потока. Конструкция наконечника облегчает введение благодаря особой форме, место перехода наконечника в корпус цельное, укрепленное, боковые отверстия сглажены. Силиконовый подогнанный колпачок и интродьюсер из бесфталатного ПВХ помогают добиться оптимальных результатов. Все модели имеют стандартный интродьюсер для чрескожного введения, регулируемое рентгеноконтрастное шовное кольцо и коннектор 3/8 дюйма.

Состав комплекта:



Расширитель белого цвета входит в комплект моделей с размерами 21 F, 23 F, и 25 F

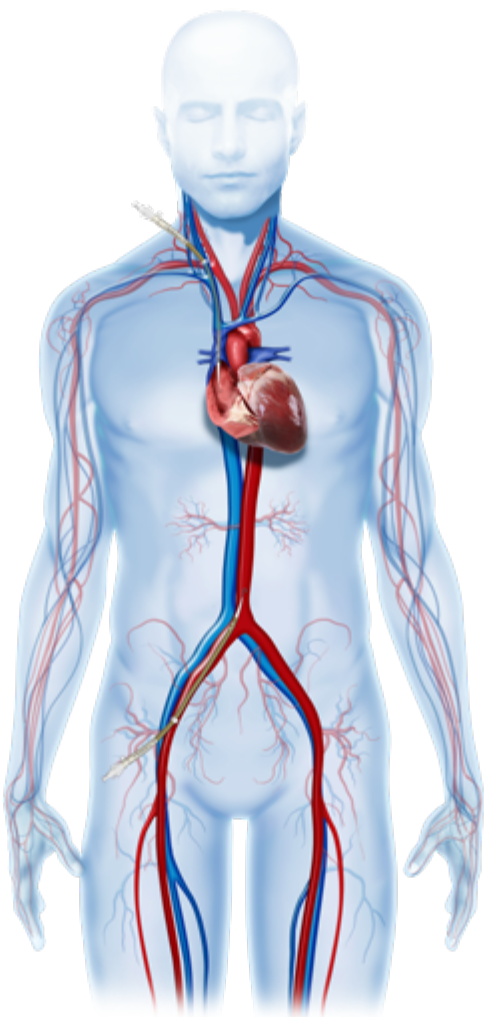


Общая длина 12,5 дюйма (31,8 см)

Длина наконечника 7,09 дюйма (18,0 см)

Коннектор с люэр-портом 3/8 дюйма (0,95 см)

Канюля	Комплект	Размер по французской шкале
96570-115	96530-115	15 F (5,0 мм)
96570-117	96530-117	17 F (5,7 мм)
96570-119	96530-119	19 F (6,3 мм)
96570-121	96530-121	21 F (7,0 мм)
96570-123	96530-123	23 F (7,7 мм)
96570-125	96530-125	25 F (8,3 мм)

1 шт. в картонной упаковке
Закажите канюли по отдельности или в составе комплекта. При заказе канюль по отдельности необходимо приобрести комплект для введения.

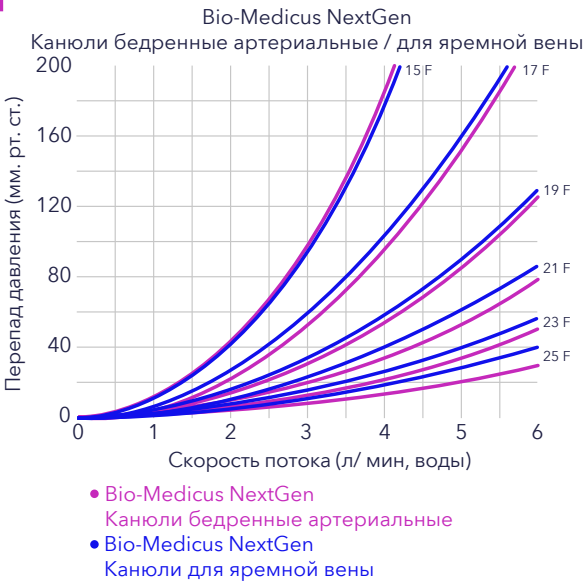

Комплект для введения 96552 см. на стр. 25


Бедренные канюли Bio-Medicus Multi-Stage

Комплекты чрескожные бедренные венозные многоступенчатые



Канюли для взрослых пациентов имеют цельнолитый, устойчивый к перегибам армированный корпус с несколькими боковыми портами, а также интродьюсер с метками глубины и индикатор расположения конического наконечника. Компоненты комплекта для введения приводятся ниже.

Состав комплекта:

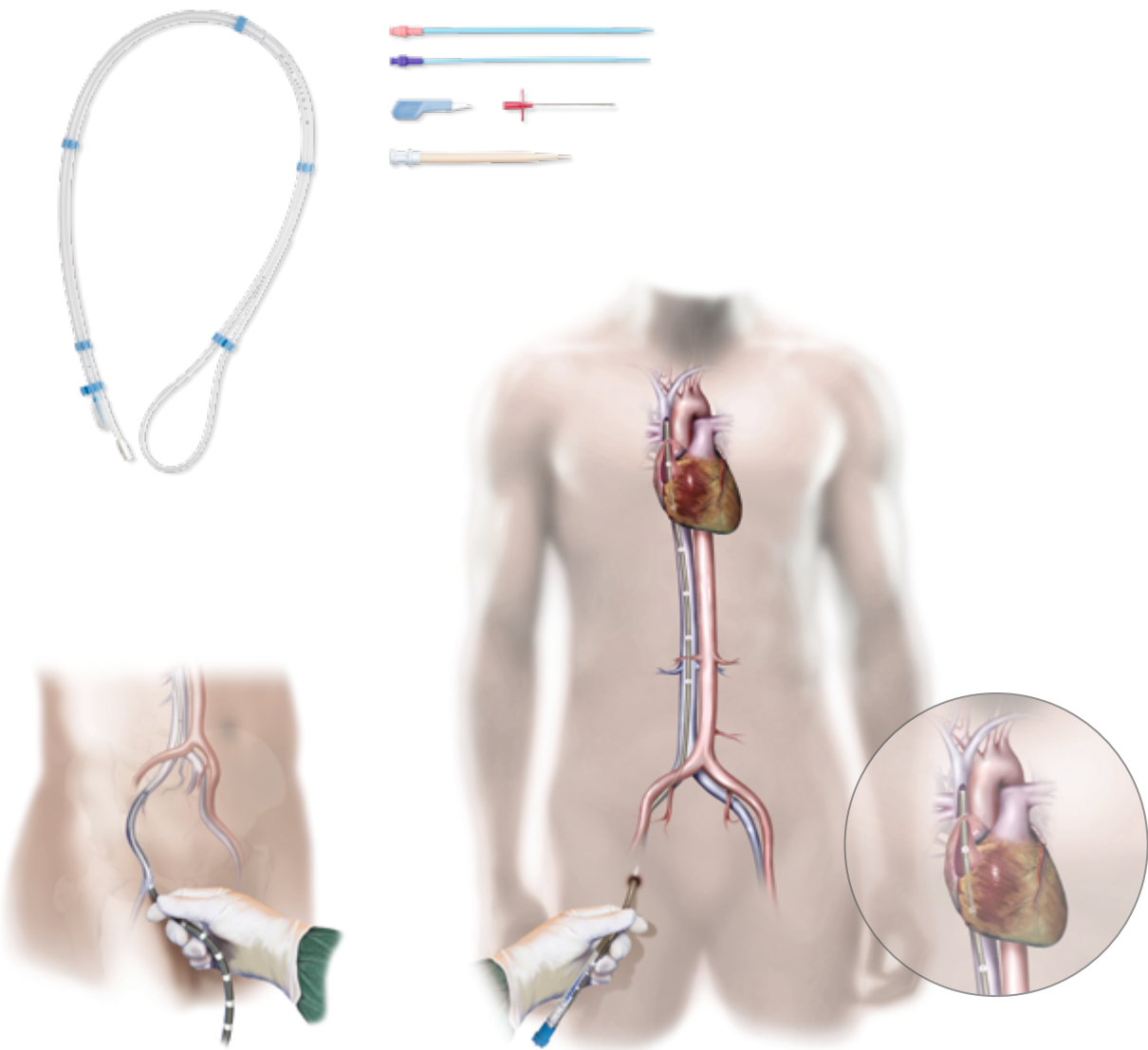

Общая длина 30 дюймов (76,2 см)

Длина наконечника 23,6 дюйма (60 см)


**Коннектор без люэр-порта
3/8 дюйма (0,95 см)**

96880-019 19 F (6,3 мм)

96880-021 21 F (7,0 мм)

96880-025 25 F (8,3 мм)

1 шт. в картонной упаковке

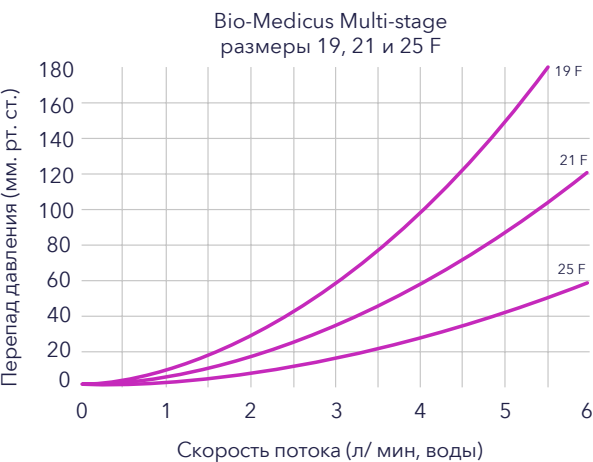


Бедренные канюли Bio-Medicus NextGen

Канюли бедренные венозные/бикавальные



Канюли отличаются гибкой, устойчивой к перегибам конструкцией с тонкими стенками, которая обеспечивает максимальную скорость потока. Интродьюсер имеет удлиненную коническую форму, место его перехода в корпус цельное, укрепленное, боковые порты сглажены. Все эти усовершенствования в сумме обеспечивают более легкую установку. При помещении изделия в ВПВ и НПВ рядом с печеночными венами боковые порты обеспечивают бикавальный дренаж и дополнительную изоляцию правого предсердия. Силиконовый подогнанный колпачок и интродьюсер из бесфталатного ПВХ помогают добиться оптимальных результатов. Все модели имеют стандартный интродьюсер для чрескожного введения, регулируемое рентгеноконтрастное шовное кольцо и коннектор 3/8 дюйма.

Состав комплекта:

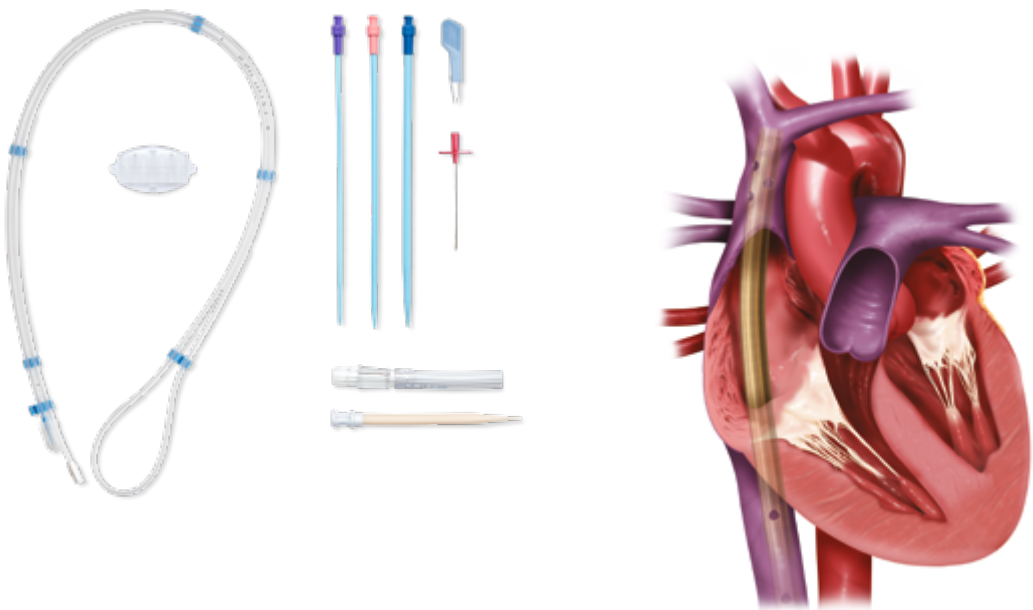

Возможность бикавальной канюляции путем оптимального размещения наконечника-«корзинки»

Усиливает венозный дренаж, идеально подходит как для методики мини-инвазивных кардиохирургических вмешательств, так и для традиционных методик.

Позволяет обеспечить окклюзию правого предсердия и доступ к нему.

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)


Отдельные канюли	Комплект	Размер по французской шкале	Общая длина	Длина наконечника
96670-115	96600-115	15 F (5,0 мм)	64,8 см	50,0 см
96670-117	96600-117	17 F (5,7 мм)	64,8 см	50,0 см
96670-119	96600-119	19 F (6,3 мм)	69,9 см	55,0 см
96670-121	96600-121	21 F (7,0 мм)	69,9 см	55,0 см
96670-123 [†]	96600-123 [†]	23 F (7,7 мм)	76,2 см	60,0 см
96670-125 [†]	96600-125 [†]	25 F (8,3 мм)	76,2 см	60,0 см
96670-127 [†]	96600-127 [†]	27 F (9,0 мм)	76,2 см	60,0 см
96670-129 [†]	96600-129 [†]	29 F (9,7 мм)	76,2 см	60,0 см

1 шт. в картонной упаковке

Закажите канюли по отдельности или в составе комплекта. При заказе канюль по отдельности необходимо приобрести комплект для введения.

[†] В комплект входит адаптер трубки диаметром от 1/2 дюйма (1,27 см) до 3/8 дюйма (0,95 см).

Венозные бедренные канюли Bio-Medicus NextGen

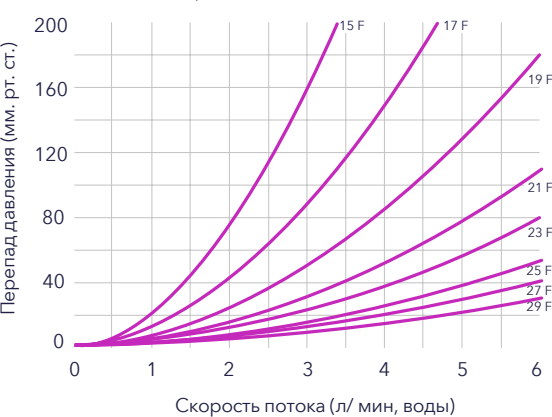


Комплект для введения 96551 см. на стр. 25

Бедренные канюли Bio-Medicus NextGen

Комплекты для введения канюль



В комплекты входят инструменты для периферической канюляции по методу Сельдингера у взрослых и детей. Комплект предназначен для чрескожного введения или для введения под контролем зрения. Компоненты в составе комплекта перечислены ниже.

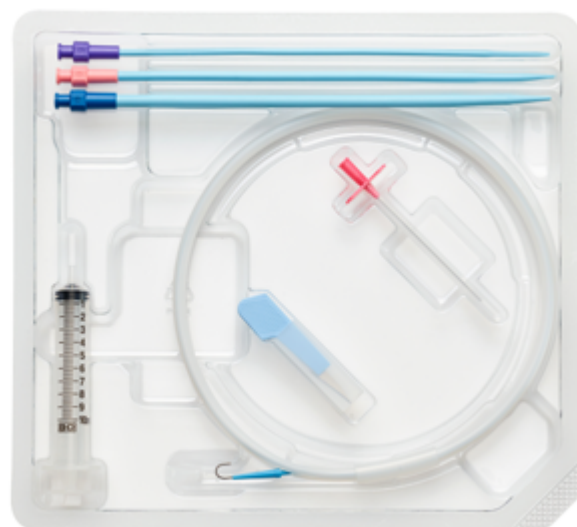


Венозные

96551

- Диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина проводника 180 см (70,87 дюйма)
- Скальпель, лезвие №11
- Шприц объемом 10 мл
- Расширитель сосудов ступенчатый, 8 F/10 F, 12 F/14 F и 16 F/18 F
- Игла Сельдингера, 18 G (1,02 мм)

5 комплектов в картонной упаковке

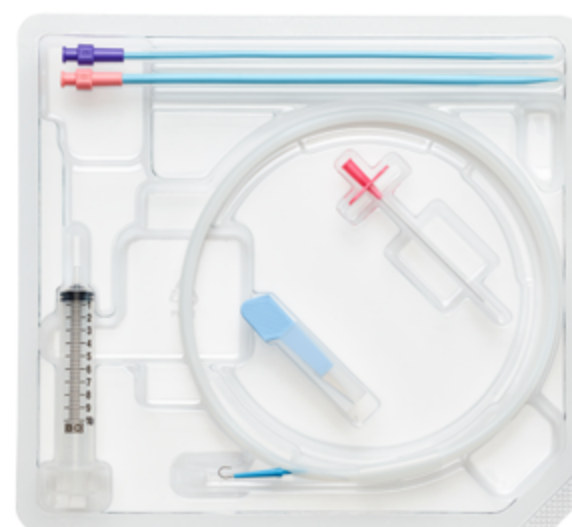


Педиатрические артериальные / венозные

96553

- Диаметр 0,025 дюйма (0,635 мм), длина проводника 60 см (23,62 дюйма)
- Скальпель, лезвие №11
- Шприц объемом 10 мл
- Расширитель сосудов ступенчатый, 8 F/10 F и 12 F/14 F
- Игла Сельдингера, 18 G (1,02 мм)

5 комплектов в картонной упаковке

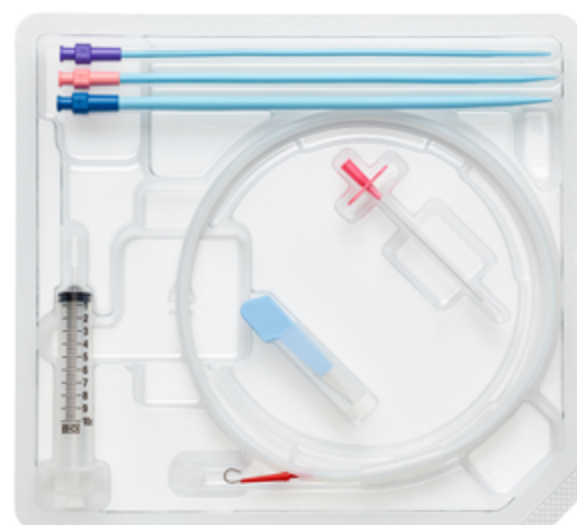

Артериальные / для яремной вены

96552

- Диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм), длина проводника 100 см (39,37 дюйма)
- Скальпель, лезвие №11
- Шприц объемом 10 мл
- Расширитель сосудов ступенчатый, 8 F/10 F, 12 F/14 F и 16 F/18 F
- Игла Сельдингера, 18 G (1,02 мм)


5 комплектов в картонной упаковке

Бедренные канюли

Канюли бедренные венозные DLP



Канюли характеризуются наличием нескольких боковых портов, отметок глубины и интродьюсера с коническим наконечником.

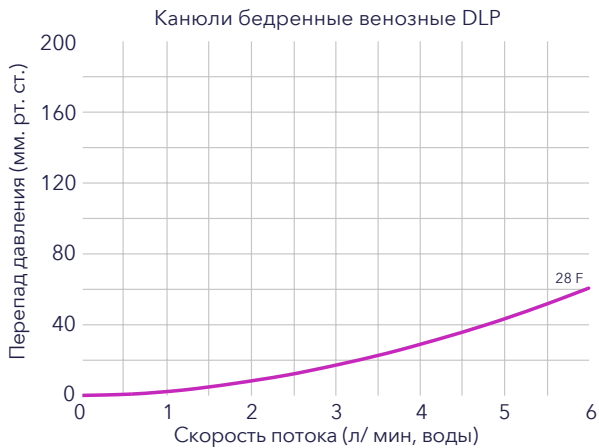

**Длина вводимой части
25,5 дюйма (65 см)**
Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см),
проводник 0,038 дюйма
(0,097 мм) x 180 см (70,87 дюйма)

96328	28 F (9,3 мм)
Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см), проводник 0,038 дюйма (0,097 мм) x 180 см (70,87 дюйма)	
96428	28 F (9,3 мм)

4 шт. в картонной упаковке





96328

Бедренные канюли

Канюли бедренные артериальные DLP



Канюли характеризуются наличием нескольких боковых портов, отметок глубины и интродьюсера с коническим наконечником, который размещают на проводнике 0,038 дюйма (0,097 см) **(в комплект не входит)**.

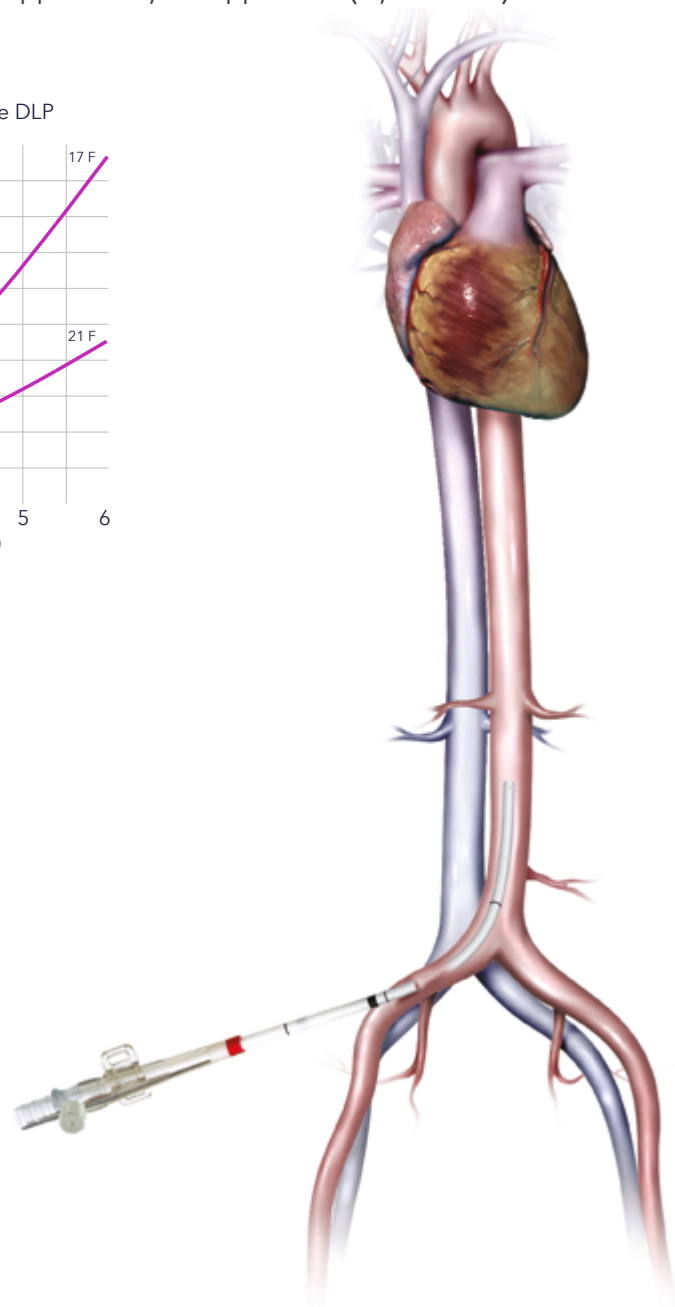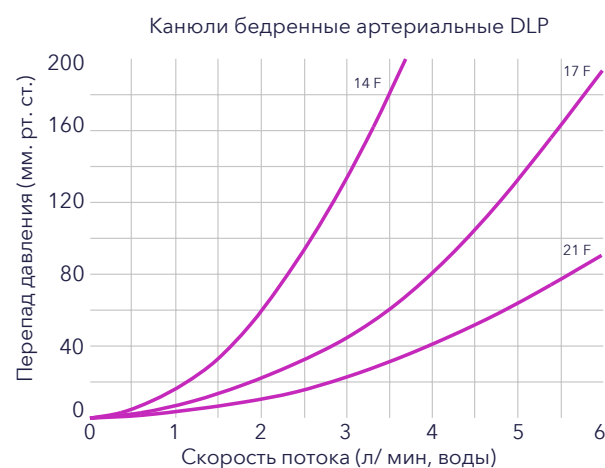

**Длина вводимой части
7 дюймов (18 см)**

**Коннектор с люэр-портом
3/8 дюйма (0,95 см)**

57414	14 F (4,7 мм)
--------------	---------------

57417	17 F (5,7 мм)
--------------	---------------

57421	21 F (7,0 мм)
--------------	---------------

4 шт. в картонной упаковке



Экстракорпоральный контур

Венозные канюли



Венозные канюли предназначены для обеспечения оптимального венозного дренажа, обеспечивая при этом гибкость и простоту использования. Мы предлагаем широкий выбор одноступенчатых венозных канюль с устойчивым к перегибам армированным корпусом размером от 12 F до 40 F. Доступны модели с прямым и прямоугольным наконечником с несколькими портами, а также варианты с тонкими стенками и металлическим наконечником. Благодаря широкому размерному ряду вы без труда сможете найти канюлю, которая соответствует вашим требованиям.

Венозные канюли



- ▶ Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным металлическим наконечником 30
- ▶ Канюли венозные одноступенчатые DLP 31
- ▶ Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником 32
- ▶ Канюли венозные одноступенчатые DLP с пластичным наконечником 33
- ▶ Венозные канюли VC2..... 34
- ▶ Канюли венозные двухступенчатые MC2 35
- ▶ Канюли венозные трехступенчатые MC2X..... 36



Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9408 от 01.08.2022

Венозные канюли

Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным металлическим наконечником



Канюли для детей и взрослых имеют скошенный металлический наконечник с несколькими портами, устойчивый к перегибам армированным корпусом и линией ориентации наконечника. Такая конструкция позволяет обеспечить высокую скорость потока при минимальном перепаде давления.

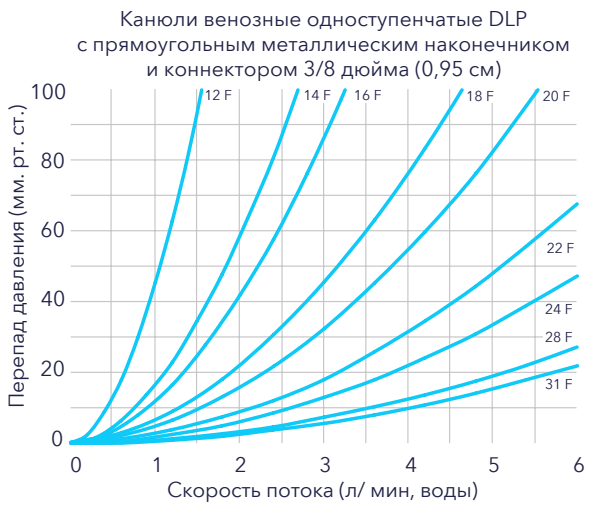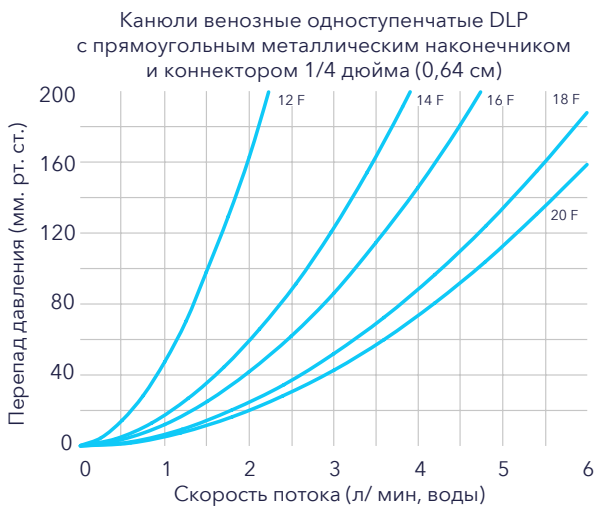

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.



Общая длина
14 дюймов (35,2-37 см)

Коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)

67312* 12 F (4,0 мм)

67314* 14 F (4,7 мм)

67316* 16 F (5,3 мм)

67318* 18 F (6,0 мм)

67320* 20 F (6,7 мм)

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

69312 12 F (4,0 мм)

69314 14 F (4,7 мм)

69316 16 F (5,3 мм)

69318 18 F (6,0 мм)

69320* 20 F (6,7 мм)

69322 22 F (7,3 мм)

69324* 24 F (8,0 мм)

69328* 28 F (9,3 мм)

69331 31 F (10,3 мм)

10 шт. в упак.



Общая длина
14 дюймов (36,2-36,5 см)

Удлинённый наконечник

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

69428 28 F (9,3 мм)

69431 31 F (10,3 мм)




10 шт. в упак.

Венозные канюли

Канюли венозные одноступенчатые DLP



Канюли для детей и взрослых имеют конический наконечник с несколькими портами, цельный, устойчивый к перегибам армированный корпус и отметки глубины.

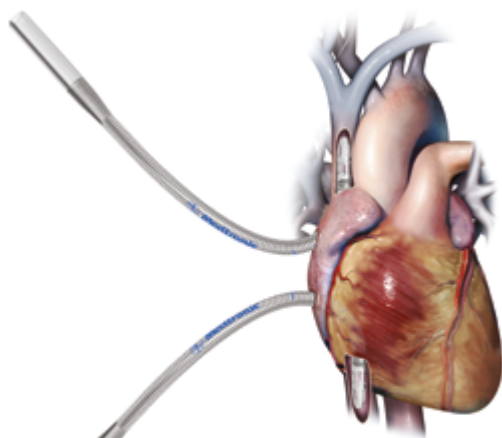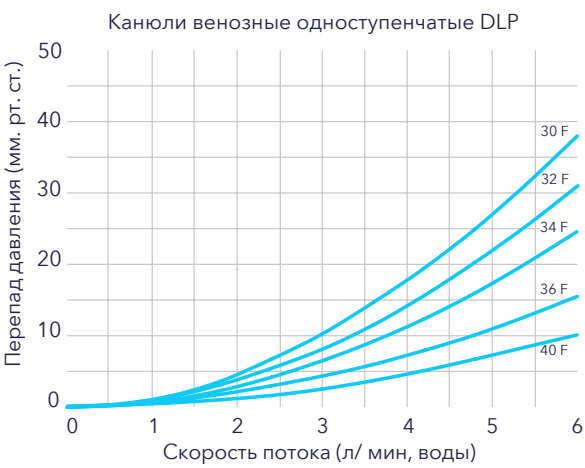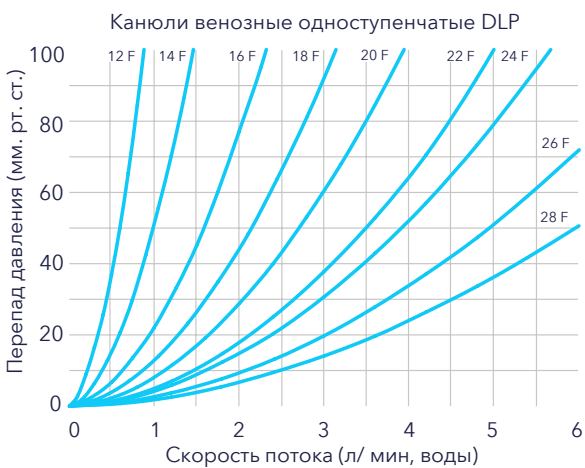

Общая длина
12-16 дюймов
(30,5-40,9 см)

Коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)

66112*	12 F (4,0 мм)
66114*	14 F (4,7 мм)
66116*	16 F (5,3 мм)

Коннектор 1/4-3/8 дюйма
(0,64-0,95 см)

66118*	18 F (6,0 мм)
66120*	20 F (6,7 мм)
66122	22 F (7,3 мм)
66124*	24 F (8,0 мм)

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

66126	26 F (8,7 мм)
66128*	28 F (9,3 мм)
66130	30 F (10,0 мм)
66132*	32 F (10,7 мм)
66134	34 F (11,3 мм)
66236*	36 F (12,0 мм)

Коннектор 1/2 дюйма (1,27 см)

66136	36 F (12,0 мм)
66140	40 F (13,3 мм)

10 шт. в упак.



*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Венозные канюли

Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником



Канюли для детей и взрослых имеют конический наконечник с несколькими портами, цельный, устойчивый к перегибам армированный корпус и отметки глубины.

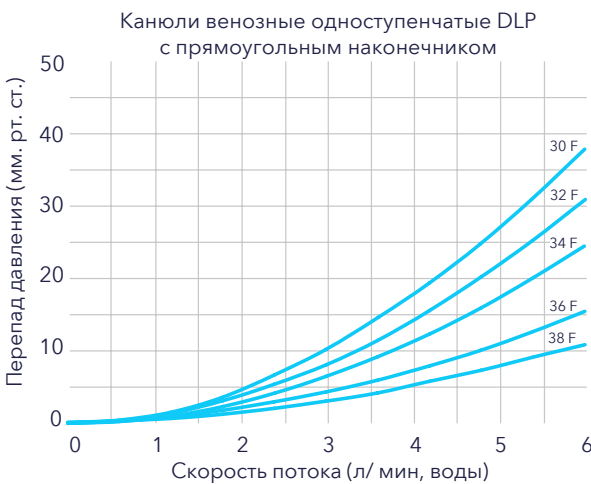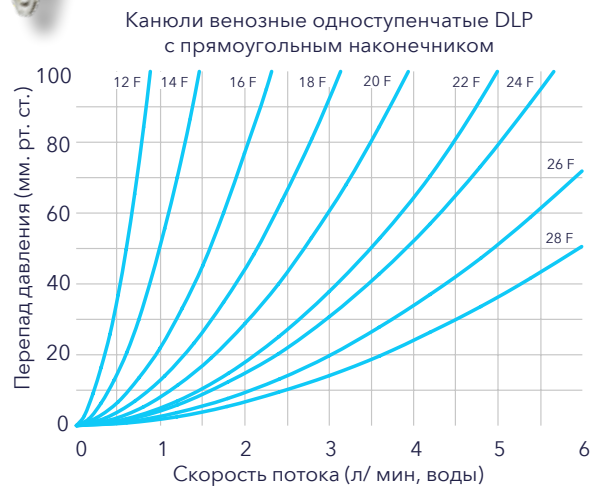

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Общая длина 12-15 дюймов
(27,2-35,6 см)

Коннектор 1/4 дюйма
(0,64 см)

67512	12 F (4,0 мм)
67514	14 F (4,7 мм)
67516	16 F (5,3 мм)

Коннектор 1/4-3/8 дюйма
(0,64-0,95 см)

67518	18 F (6,0 мм)
67520*	20 F (6,7 мм)
67522	22 F (7,3 мм)
67524*	24 F (8,0 мм)

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

67526	26 F (8,7 мм)
67528*	28 F (9,3 мм)
67530*	30 F (10,0 мм)
67532*	32 F (10,7 мм)
67534*	34 F (11,3 мм)
67636*	36 F (12,0 мм)
67638	38 F (12,7 мм)



10 шт. в упак.

Венозные канюли

Канюли венозные одноступенчатые DLP с пластичным наконечником




Канюли для детей и взрослых имеют наконечник с несколькими портами, гибкий цельный, устойчивый к перегибам армированный корпус и отметки глубины. Благодаря такой конструкции хирург может придать канюле нужную форму. За счет интегрированного гибкого проводника вне проволоочной обмотки внутренний диаметр оптимальный и обеспечивает хороший поток крови.

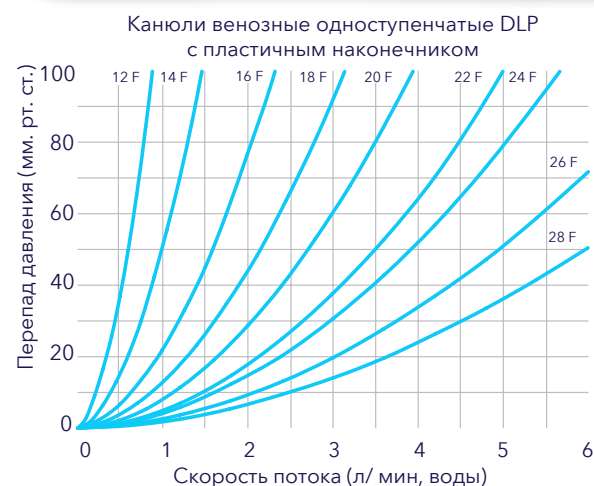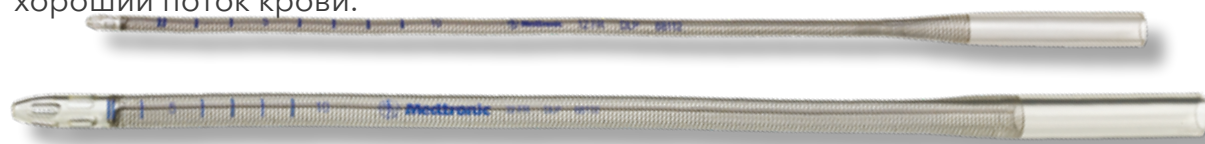

Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником из ПВХ



Канюли других производителей¹

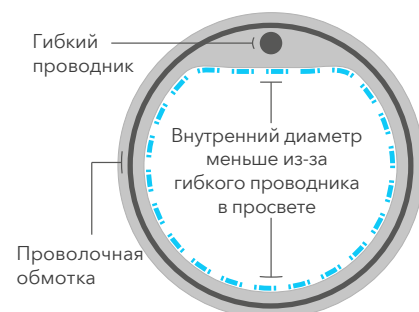

Гибкая одноступенчатая венозная канюля Edwards, модель TFM024L, 24 F

¹Внутренние данные компании Medtronic 2013 г.

Общая длина
12-15 дюймов (31,5-41 см)

Коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)

68112*	12 F (4,0 мм)
68114*	14 F (4,7 мм)
68116*	16 F (5,3 мм)

Коннектор 1/4-3/8 дюйма
(0,64-0,95 см)

68118*	18 F (6,0 мм)
68120*	20 F (6,7 мм)
68122	22 F (7,3 мм)
68124*	24 F (8,0 мм)


Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

68126	26 F (8,7 мм)
68128*	28 F (9,3 мм)
68130	30 F (10,0 мм)
68132*	32 F (10,7 мм)
68134	34 F (11,3 мм)

Коннектор 1/2 дюйма (1,27 см)

68136*	36 F (12,0 мм)
68138	38 F (12,7 мм)

10 шт. в упак.

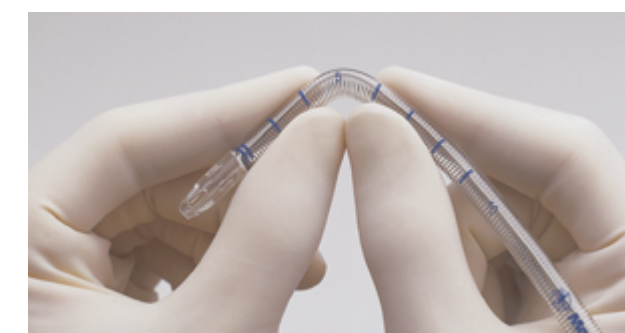

Хирург может придавать гибкой одноступенчатой венозной канюле практически любую форму.





*Доступны варианты с биоактивным покрытием Cortiva

Венозные канюли

Венозные канюли VC2



Канюли имеют спиральный наконечник с предсердной «корзинкой» и прорезями, а также устойчивый к перегибам корпус с армированными стенками с отметками глубины. Овальный корпус имеет более низкий профиль в операционном поле.

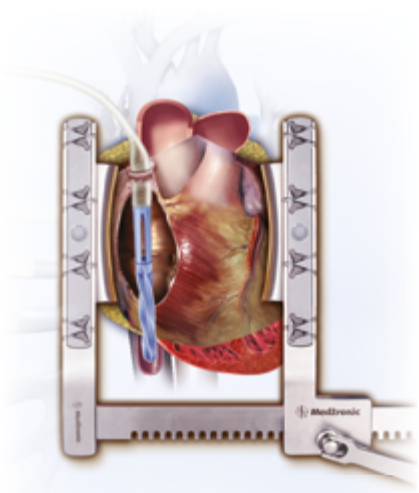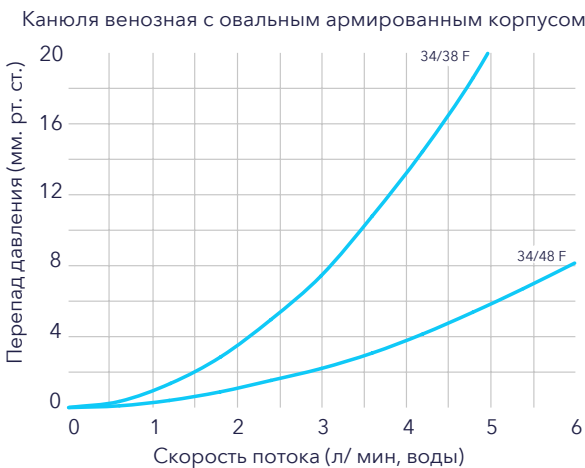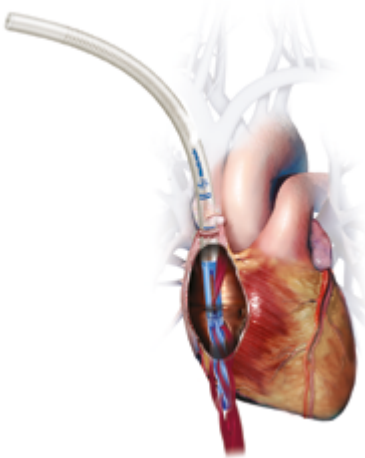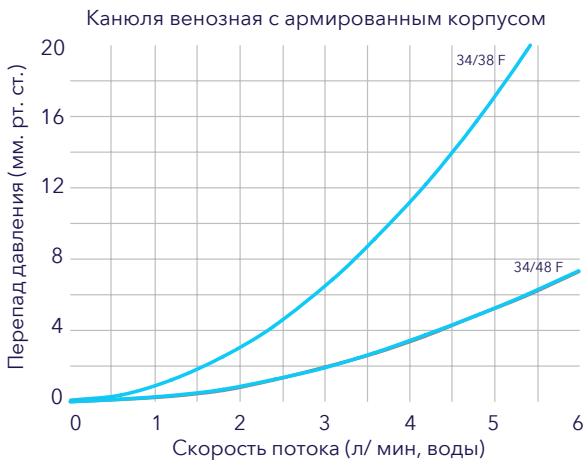

Общая длина 15 дюймов (31,8-42 см)

Корпус с армированными стенками
Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

93438	34/38 F (11,3/12,7 мм)
-------	------------------------

Корпус с армированными стенками
Коннектор 1/2 дюйма (1,27 см)

93448	34/48 F (11,3/16,0 мм)
-------	------------------------

Корпус с армированными стенками,
коннектор без люэр-порта
1/2 дюйма (1,27 см)

93438C*	34/38 F (11,3/12,7 мм)
---------	------------------------

93448C	34/48 F (11,3/16,0 мм)
--------	------------------------

Овальный корпус с армированными
стенками Коннектор
3/8 дюйма (0,95 см)

93463	34/38 F (11,3/12,7 мм)
-------	------------------------

Овальный корпус с
армированными стенками
Коннектор 1/2 дюйма (1,27 см)

93464	34/48 F (11,3/16,0 мм)
-------	------------------------

Овальный корпус с
армированными стенками,
коннектор без люэр-порта
1/2 дюйма (1,27 см)

93463C	34/38 F (11,3/12,7 мм)
--------	------------------------

93464C	34/48 F (11,3/16,0 мм)
--------	------------------------

10 шт. в упак.

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Венозные канюли


Канюли венозные двухступенчатые MC2




Канюли имеют наконечник с несколькими портами и с предсердной «корзинкой», а также устойчивый к перегибам корпус с армированными стенками с отметками глубины. Овальный корпус имеет более низкий профиль в операционном поле.



Канюли венозные двухступенчатые MC2

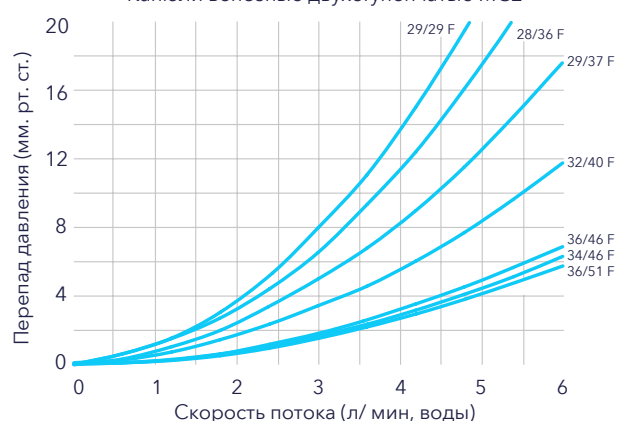

Канюли венозные двухступенчатые MC2 (овальный корпус)

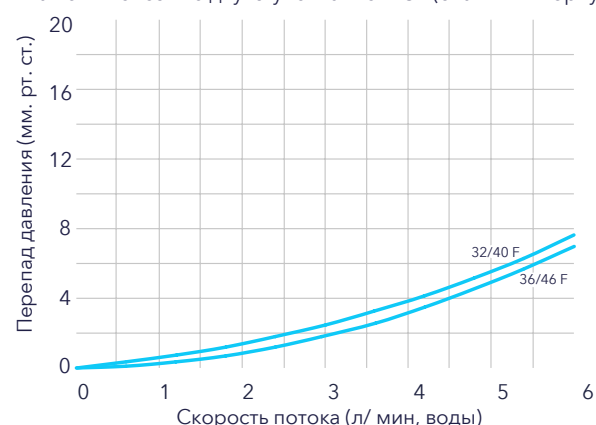

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Общая длина 15 дюймов (37-38,5 см)

Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

91228*	28/36 F (9,3/12,0 мм)
--------	-----------------------

Коннектор 1/2 дюйма (1,27 см)

91236	36/46 F (12,0/15,3 мм)
-------	------------------------

91240*	32/40 F (10,7/13,3 мм)
--------	------------------------

91246*	34/46 F (11,3/15,3 мм)
--------	------------------------

91251	36/51 F (12,0/17,0 мм)
-------	------------------------

Коннектор без люэр-порта 1/2 дюйма (1,27 см)

91228C*	28/36 F (9,3/12,0 мм)
---------	-----------------------

91236C*	36/46 F (12,0/15,3 мм)
---------	------------------------

91240C*	32/40 F (10,7/13,3 мм)
---------	------------------------

91246C*	34/46 F (11,3/15,3 мм)
---------	------------------------

91251C	36/51 F (12,0/17,0 мм)
--------	------------------------

10 шт. в упак.

Общая длина 15 дюймов (38,1-42,5 см)

Корпус с низким профилем Коннектор 1/2 дюйма (1,27 см)

91229	29/37 F (9,7/12,3 мм)
-------	-----------------------

Коннектор без люэр-порта 1/2 дюйма (1,27 см)

91229C	29/37 F (9,7/12,3 мм)
--------	-----------------------

Корпус с тонкими стенками Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

91329*	29/29 F (9,7/9,7 мм)
--------	----------------------

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

91329C*	29/29 F (9,7/9,7 мм)
---------	----------------------

Овальный корпус Коннектор 1/2 дюйма (1,27 см)

91263*	32/40 F (10,7/13,3 мм)
--------	------------------------

91265*	36/46 F (12,0/15,3 мм)
--------	------------------------

Овальный корпус Коннектор без люэр-порта 1/2 дюйма (1,27 см)

91263C*	32/40 F (10,7/13,3 мм)
---------	------------------------

91265C*	36/46 F (12,0/15,3 мм)
---------	------------------------


10 шт. в упак.

Венозные канюли

Канюли венозные трехступенчатые MC2X



Эти канюли имеют тонкостенную конструкцию, обеспечивающую минимальный перепад давления для использования при вакуумном или кинетическом венозном дренаже.

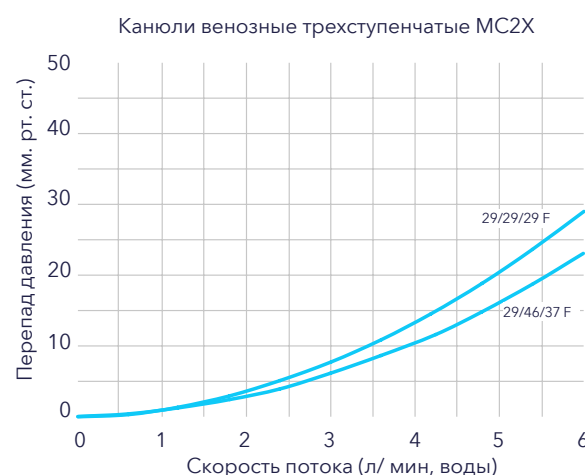

Стенки канюль MC2X на 31 % тоньше, что позволяет увеличить внутренний диаметр по сравнению с канюлями других производителей



Большое отверстие на конце канюли MC2X обеспечивает лучший поток
2013 внутренние данные Medtronic

Общая длина 15 дюймов (38,5-42 см)


Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

91429* 29/29/29 F (9,7/9,7/9,7 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

91429C* 29/29/29 F (9,7/9,7/9,7 мм)

10 шт. в упак.

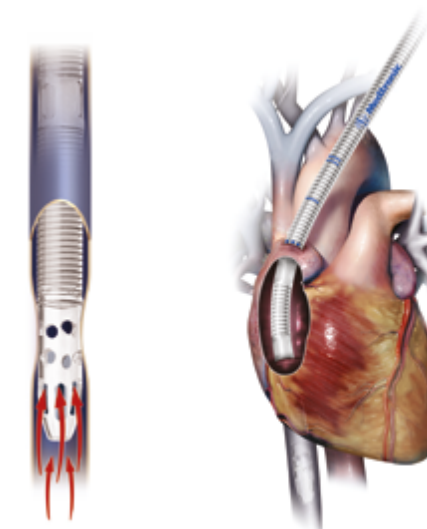

Общая длина 15,5 дюйма (39-42,5 см)


Коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

91437 29/46/37 F (9,7/15,3/12,3 мм)

Коннектор без люэр-порта 3/8 дюйма (0,95 см)

91437C 29/46/37 F (9,7/15,3/12,3 мм)

10 шт. в упак.

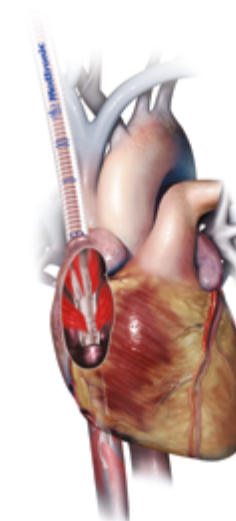

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Кардиоплегия

Антеградные канюли



С помощью антеградных канюль кардиоплегический раствор поступает к сердцу через артерии по физиологическому пути (антеградная перфузия). Канюли для корня аорты предназначены для аспирации воздуха из аорты или инфузии кардиоплегического раствора непосредственно в корень аорты вблизи аортального клапана. Мы предлагаем канюли для корня аорты для взрослых и детей различной длины, что позволяет использовать их при различных методиках и различных анатомических особенностях пациентов. Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать канюлю, которая будет соответствовать вашим требованиям.

Антеградные канюли



- ▶ Канюли для корня аорты MīAR с интродьюсером Flow-Guard..... **39**
- ▶ Канюля кардиоплегическая двухпросветная DLP..... **40**
- ▶ Кардиоплегические канюли для корня аорты DLP **41**
- ▶ Кардиоплегические канюли для корня аорты DLP
с дренажной линией **42**
- ▶ Иглы для кардиоплегии DLP..... **43**
- ▶ Канюли для перфузии устья коронарной артерии DLP **44**


Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15650 от 27.10.2021
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13346 от 02.02.2021

Антеградные канюли

Канюли для корня аорты MīAR с интродьюсером Flow-Guard



Модели канюль для корня аорты для мини-инвазивной антеградной кардиоплегии (MīAR™) имеют корпус длиной 12,25 дюйма (31 см), что позволяет получить доступ в грудную клетку через небольшой разрез. Благодаря длине канюли соединение люэр-порта с кардиоплегической линией находится вне рабочей зоны, за пределами разреза. Более того, интродьюсер Flow-Guard помогает избежать кровотечения при извлечении иглы из канюли.

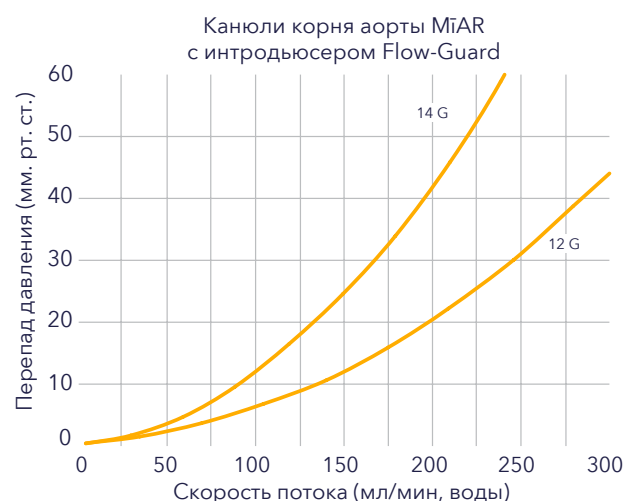


Общая длина 12,25 дюйма (30,7-31,2 см)

Стандартный наконечник с фланцем и интродьюсер Flow-Guard

11012L	12 G (9 F)
---------------	------------

11014L	14 G (7 F)
---------------	------------

10 шт. в упак.

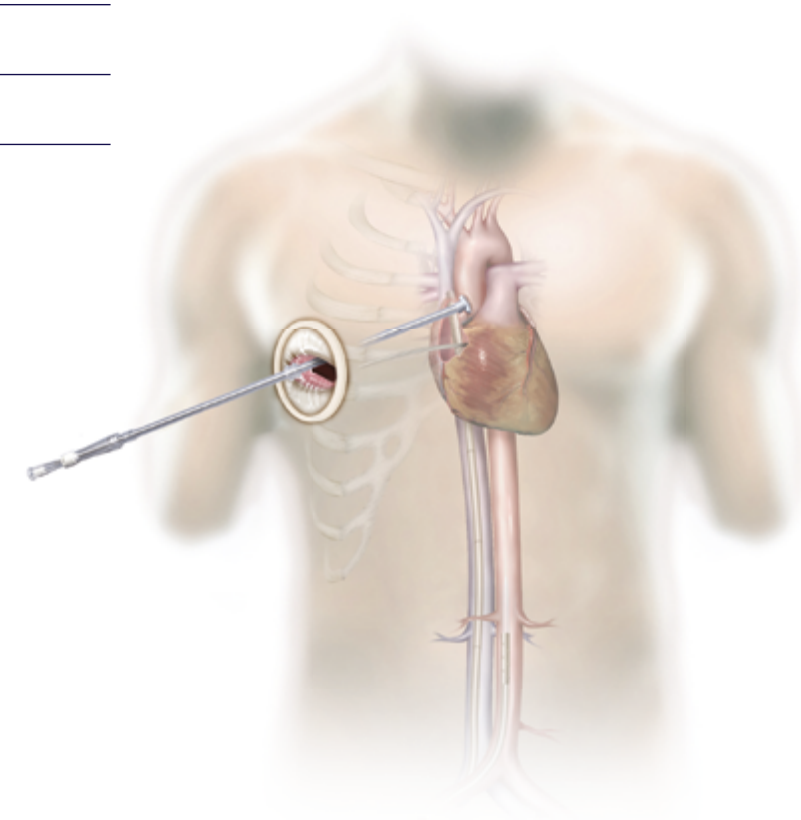

Важная информация по безопасности

Соблюдайте особую осторожность при введении иглы, чтобы избежать перфорации задней стенки аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца. В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Антеградные канюли

Канюля кардиоплегическая двухпросветная DLP





У двухпросветных канюль наконечник соединяется с прозрачным корпусом с отдельной дренажной линией. Дополнительные характеристики данной канюли включают возможность дренирования левого желудочка с одновременной доставкой кардиоплегического раствора и аспирацией. Все канюли снабжены иглой-интродьюсером из нержавеющей стали.

**Общая длина
3,25 дюйма (8,5 см)**

Стандартный наконечник

30401	12 G (9 F)
--------------	------------

10 шт. в упак.

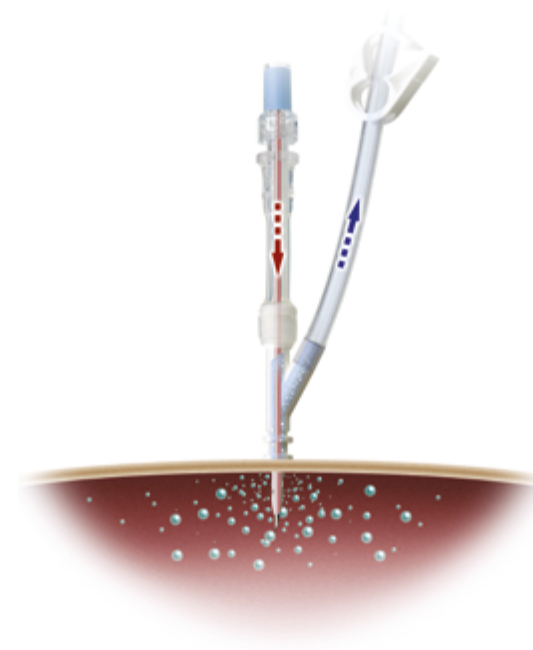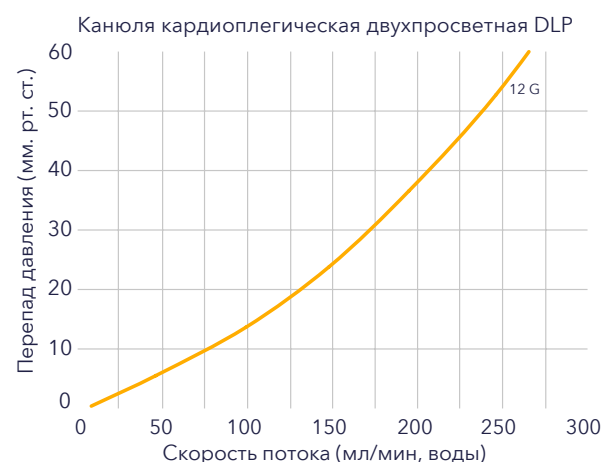

Установка
двухпросветной канюли
для корня аорты

Важная информация по безопасности


Соблюдайте особую осторожность при введении иглы, чтобы избежать перфорации задней стенки аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца. В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Антеградные канюли

Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты



Канюли для взрослых и детей оснащены рентгеноконтрастным наконечником, присоединяющимся к прозрачному корпусу из ПВХ. К дополнительным возможностям канюли относятся мониторинг давления в корне аорты и дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены иглой-интродьюсером из нержавеющей стали. Все канюли DLP для корня аорты могут использоваться как для аспирации воздушных эмболов, так и для введения кардиоплегического раствора.

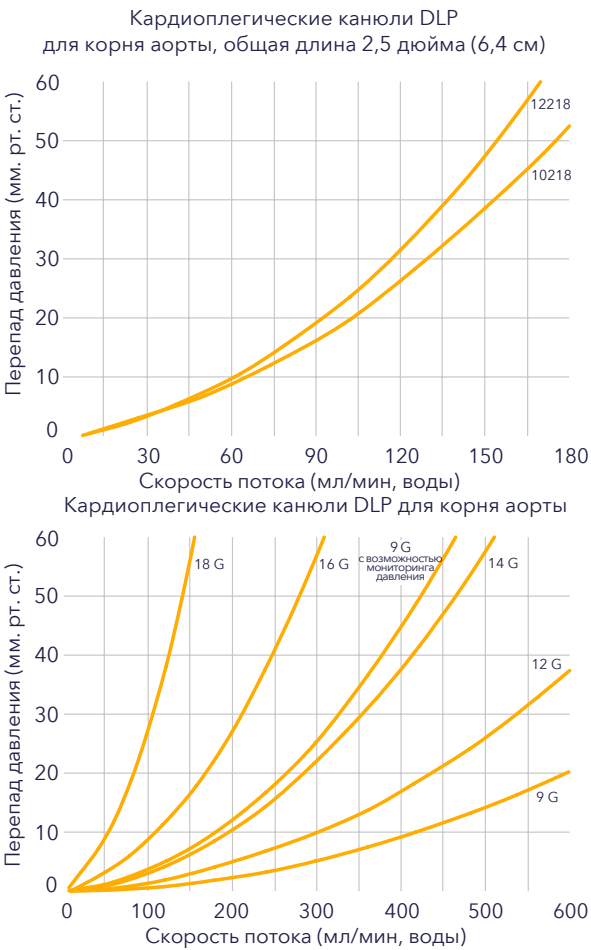

Интродьюсер Flow-Guard

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Общая длина 2,5 дюйма (6,2-6,5 см)

Стандартный наконечник с фланцем и стандартный интродьюсер

10218	18 G (4 F) белый наконечник и прозрачный фланец
12218	18 G (4 F) синий цельный наконечник и фланец

20 шт. в картонной упаковке



Общая длина 5,5 дюйма (13,7-14,2 см)

Стандартный наконечник с фланцем и стандартный интродьюсер

10009	9 G (11 F)
10012*	12 G (9 F)
10014	14 G (7 F)
10016	16 G (5 F)
10018	18 G (4 F)

Стандартный наконечник с фланцем и интродьюсер Flow-Guard

11012	12 G (9 F)
11014	14 G (7 F)

20 шт. в картонной упаковке



Общая длина 5,75 дюйма (13,5 см)

Длинный наконечник с прорезями и стандартный интродьюсер

10112	12 G (9 F)
10114	14 G (7 F)

20 шт. в картонной упаковке




Общая длина 5,25 дюйма (14,9 см)

Наконечник с фланцем с возможностью мониторинга давления и стандартный интродьюсер

23009	9 G (11 F)
-------	------------

20 шт. в картонной упаковке

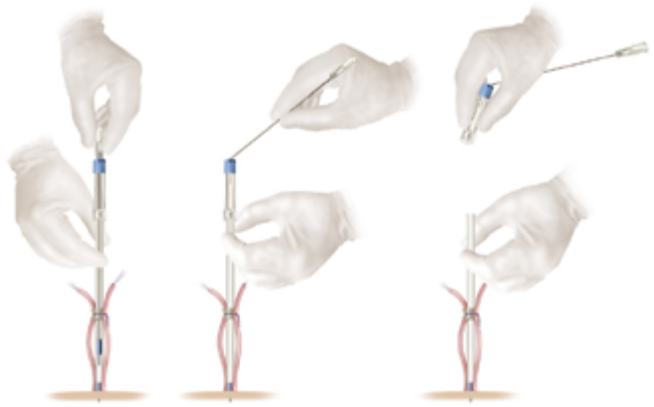

Flow-Guard Introducer Application Detail

Важная информация по безопасности


Соблюдайте особую осторожность при введении иглы, чтобы избежать перфорации задней стенки аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца. В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Антеградные канюли

Кардиоплегические канюли для корня аорты DLP с дренажной линией



Канюли оснащены рентгеноконтрастным наконечником, присоединяющимся к прозрачному корпусу с отдельной дренажной линией. Они также имеют дополнительные функции: мониторинг давления в корне аорты и дренирование левых отделов сердца. Все канюли снабжены иглой-интродьюсером из нержавеющей стали.

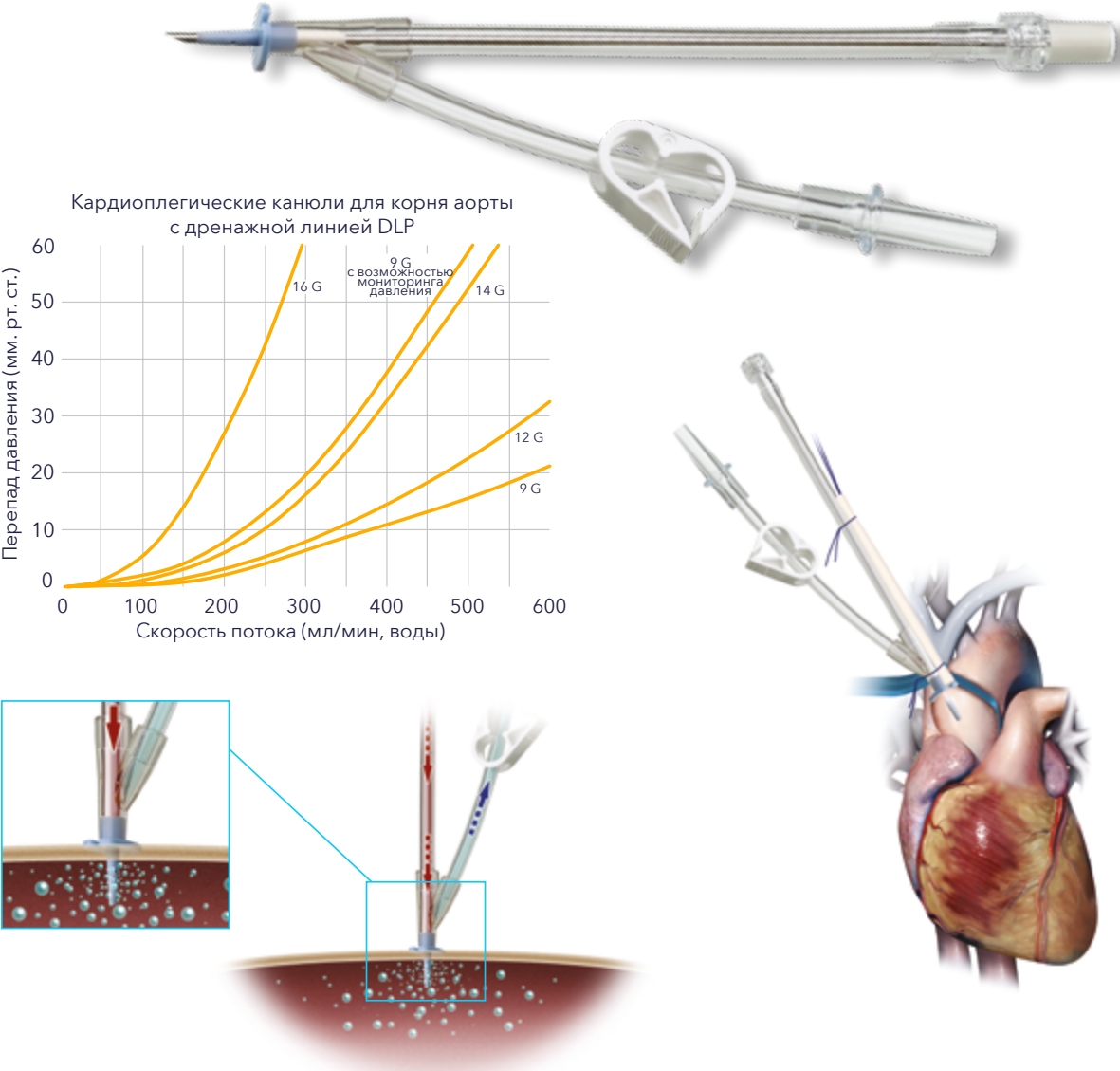

Общая длина 5,5 дюйма (13,7-14,2 см)

Стандартный наконечник с фланцем и стандартный интродьюсер

20009	9 G (11 F)
20012*	12 G (9 F)
20012S	12 G (9 F) с двумя зажимами
20014	14 G (7 F)
20014L	14 G (7 F), дренажная линия 8 дюймов (20,3 см)
20016	16 G (5 F)

Стандартный наконечник с фланцем и интродьюсер Flow-Guard

21012	12 G (9 F)
21014	14 G (7 F)

20 шт. в картонной упаковке

Общая длина 5,75 дюйма (13,5 см)

Длинный наконечник с прорезями и стандартный интродьюсер

20112	12 G (9 F)
20114	14 G (7 F)

20 шт. в картонной упаковке

5.75 in (14.6 cm) overall length

Наконечник с прорезями и фланцем и стандартный интродьюсер

20114WF	14 G (7 F)
20114HWF	14 G (7 F) с боковыми отверстиями

20 шт. в картонной упаковке

Общая длина 5,25 дюйма (14,9 см)

Наконечник с фланцем с возможностью мониторинга давления и стандартный интродьюсер

24009	9 G (11 F)
-------	------------

20 шт. в картонной упаковке

*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.

Важная информация по безопасности

Соблюдайте особую осторожность при введении иглы, чтобы избежать перфорации задней стенки аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца. В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Антеградные канюли

Иглы для кардиоплегии DLP



Иглы имеют наконечники из нержавеющей стали с пластиковыми ограничителями глубины. Они присоединяются к гибкой трубке с зажимом и люэр-портом типа «мама».



Неонатальная игла

Общая длина 6,5 дюйма (22,3 см)

Длина наконечника 1/4 дюйма (0,64 см) и стопором порта

11316	16 G (5 F)
-------	------------

20 шт. в картонной упаковке

Игла для взрослых пациентов

Общая длина 10 дюймов (32,4 см)

Длина наконечника 5/8 дюйма (1,59 см) с четырьмя боковыми отверстиями и стопором фланца

10313	13 G (8 F)
-------	------------

20 шт. в картонной упаковке

Важная информация по безопасности


Соблюдайте особую осторожность при введении иглы, чтобы избежать перфорации задней стенки аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца. В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Антеградные канюли

Канюли для перфузии устья коронарной артерии DLP



Канюли имеют силиконовый корпус и мягкий наконечник типа оливы.
Все канюли снабжены люэр-портом типа «мама».

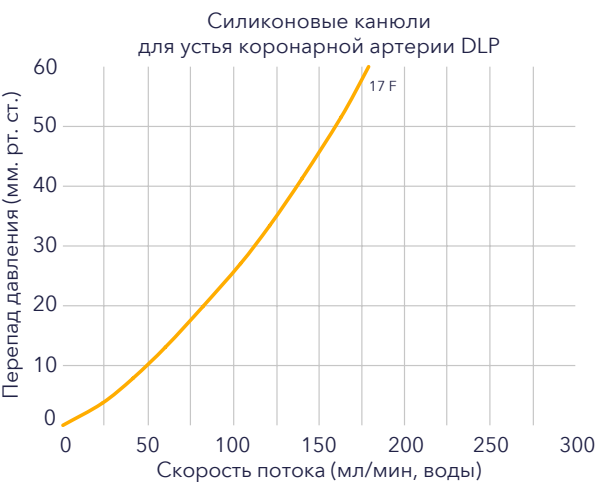


Общая длина 10 дюймов (25,2 см)

30315	15 F (5,0 мм) олива
30317	17 F (5,7 мм) олива
30320	20 F (6,7 мм) олива

10 шт. в упак.

Интракоронарная кардиоплегия


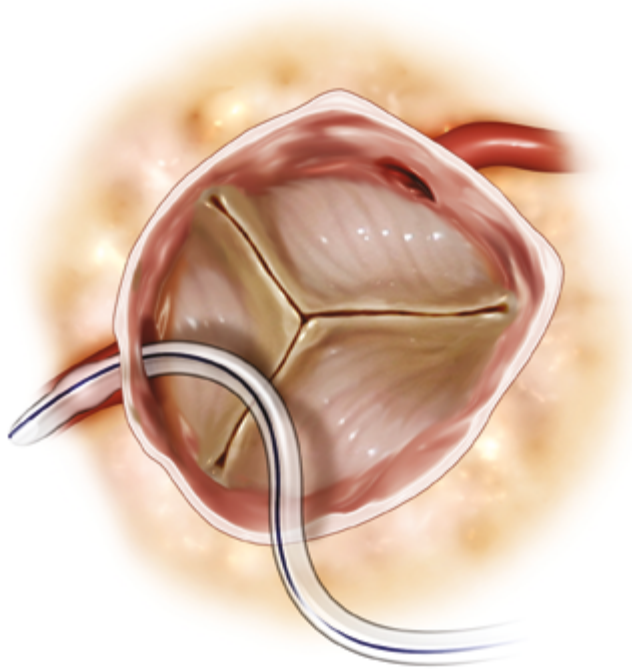


Антеградные канюли

Канюли для перфузии устья коронарной артерии DLP



Канюли имеют фланцевый рентгеноконтрастный мягкий наконечник или наконечник типа «корзинка», соединенный с гибкой ручкой из нержавеющей стали. Все канюли снабжены люэр-портом типа «мама».

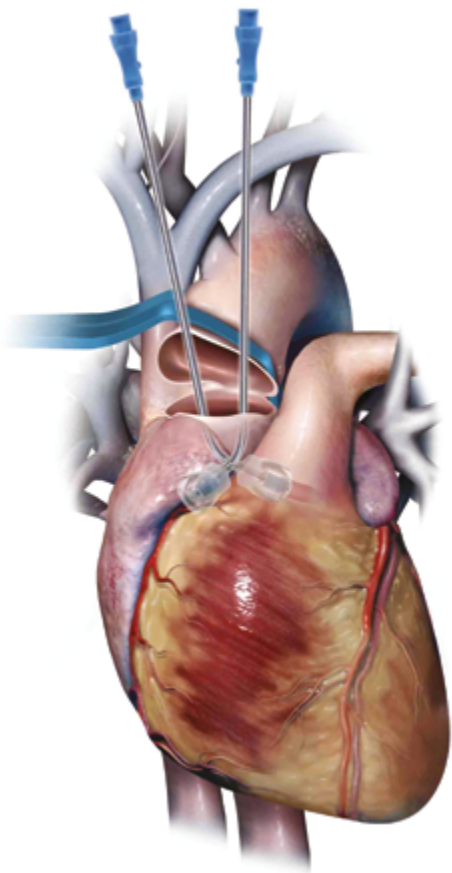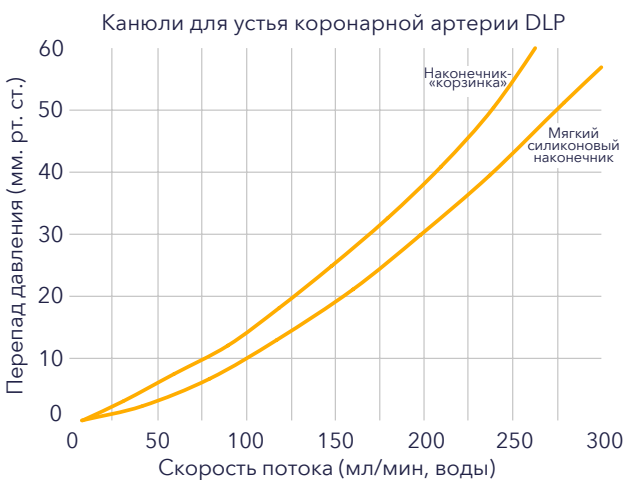

Общая длина
6 дюймов (15,3 см)

Наконечник-«корзинка»

30010	10 F (3,3 мм)
30012	12 F (4,0 мм)
30014	14 F (4,7 мм)

20 шт. в картонной упаковке



Общая длина
6 дюймов (15,3 см)

Мягкий вогнутый наконечник

30050

10 шт. в упак.



Общая длина
6 дюймов (15,3 см)

Мягкий выпуклый наконечник

30055

10 шт. в упак.

Важная информация по безопасности


Соблюдайте особую осторожность при введении иглы, чтобы избежать перфорации задней стенки аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца. В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Антеградные канюли


Канюли для перфузии устья коронарной артерии DLP



Высокопоточные канюли имеют фланцевый рентгеноконтрастный мягкий силиконовый наконечник или наконечник типа «корзинка», соединенный с гибкой ручкой из нержавеющей стали с большим просветом. Все канюли снабжены люэр-портом типа «мама».

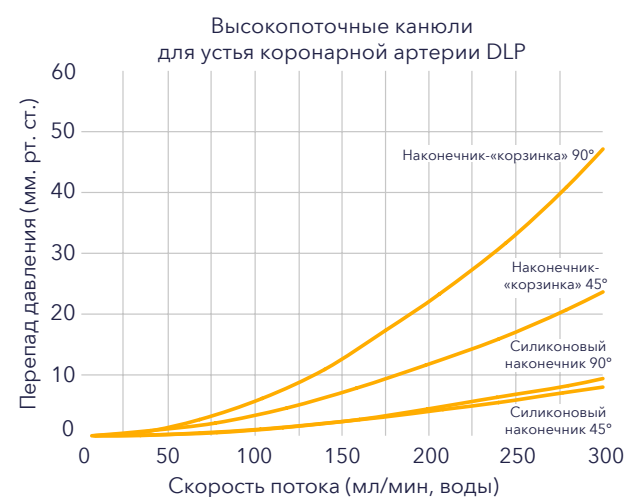

Антеградная кардиолегия устья коронарной артерии

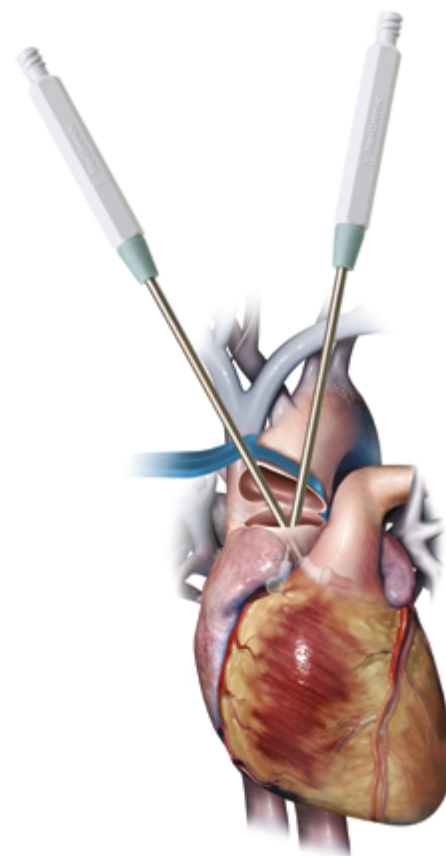

Общая длина
7,5 дюйма (19,7 см)

Наконечник-«корзинка» 90°

30110	10 F (3,3 мм)
30112	12 F (4,0 мм)
30114	14 F (4,7 мм)

10 шт. в упак.



Общая длина
7,5 дюйма (20,3 см)

Наконечник-«корзинка» 45°

30212	12 F (4,0 мм)
-------	---------------

10 шт. в упак.



Общая длина
7,5 дюйма (19,7 см)

Мягкий силиконовый наконечник 90°

30155	10 F (3,3 мм)
-------	---------------

10 шт. в упак.



Общая длина
7,5 дюйма (20,2 см)

Мягкий силиконовый наконечник 45°

30255	10 F (3,3 мм)
-------	---------------

10 шт. в упак.

Важная информация по безопасности

Соблюдайте особую осторожность при введении иглы, чтобы избежать перфорации задней стенки аорты. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца. В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Кардиоплегия

Ретроградные канюли



С помощью ретроградных канюль кардиоплегический раствор поступает к сердцу через коронарный синус в обратном направлении по сравнению с физиологически током крови (ретроградная перфузия). Мы предлагаем ретроградные канюли для взрослых и детей. Педиатрические канюли имеют силиконовый корпус и манжету с ручным наполнением, они выпускаются как со стилетом-проводником, так и без него. Модели канюль для взрослых пациентов имеют корпус из силикона или ПВХ, имеют манжету как с ручным, так и автоматическим наполнением, и выпускаются с цельным проводником или стилетом-проводником с различной формой рукоятки. Силиконовый корпус обеспечивает гибкость канюли при низких температурах кардиopleгии. Манжета позволяет провести окклюзию коронарного синуса, благодаря чему кардиоплегический раствор поступает в коронарные сосуды. Манжету с ручным наполнением необходимо раздувать перед введением кардиоплегического раствора. Широкий ассортимент нашей продукции обеспечивает наличие канюли, отвечающей вашим требованиям

Ретроградные канюли



- ▶ Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry 49
- ▶ Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP.... 50
- ▶ Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой DLP..... 52


Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13482 от 01.08.2022

Ретроградные канюли

Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном Gundry



Канюли для пациентов детского и взрослого возраста имеют силиконовый корпус, манжету с ручным наполнением и линию мониторинга давления. Все канюли поставляются со стилетом-проводником с ручкой с люэр-портом типа «папа» или рукояткой Tru-Touch. Все канюли имеют манжету и поставляются со шприцем для ее раздувания.

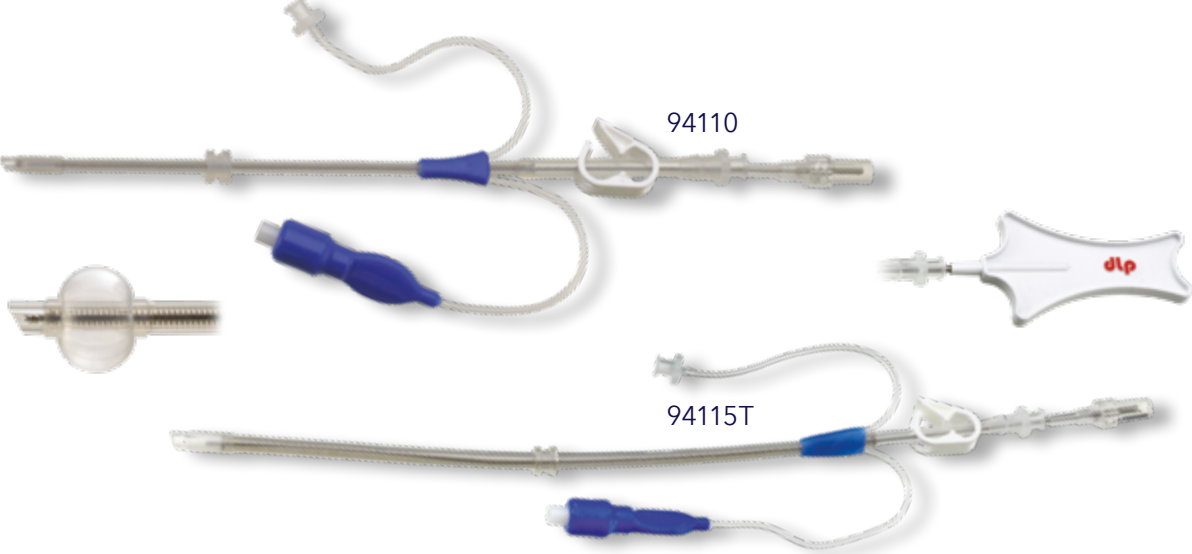

Общая длина
9 дюймов (23 см)

Гладкая манжета и армированный корпус	
94110	10 Fr (3.3 mm) guidewire styletw
4 per carton	

Общая длина
12,5 дюйма (32,15 см)

Гладкая манжета и армированный корпус	
94115T	15 F (5,0 мм) стилет-проводник
10 шт. в упак.	

Общая длина
12,5 дюйма (29,9-32,3 см)




Гладкая манжета, армированный корпус и встроенная заглушка	
94113T	13 F (4,3 мм) стилет-проводник
10 шт. в упак.	
94615	15 F (5,0 мм) стилет-проводник
4 шт. в картонной упаковке	
94715	15 F (5,0 мм) стилет-проводник с рукояткой Tru-Touch
10 шт. в упак.	

Ретроградные канюли

Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой и гладким баллоном DLP



Канюли для пациентов детского и взрослого возраста имеют силиконовый корпус, манжету с ручным наполнением и линию мониторинга давления. Все канюли имеют гладкую манжету и поставляются со шприцем для ее раздувания.

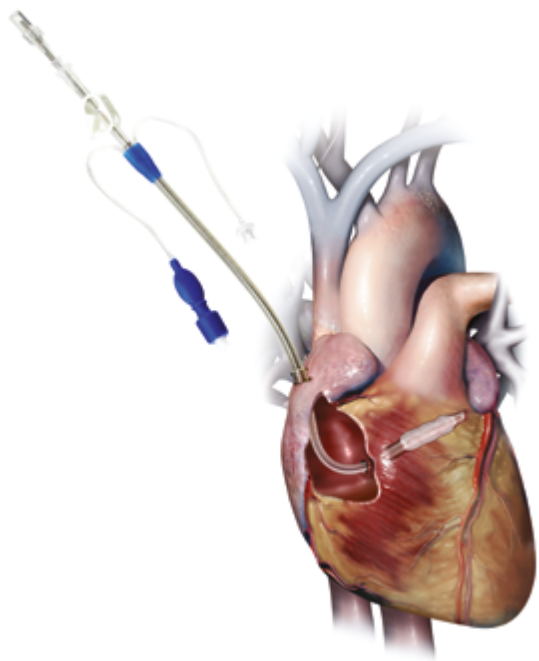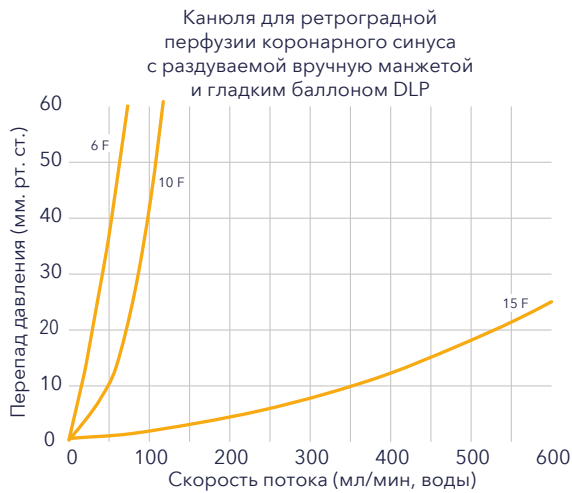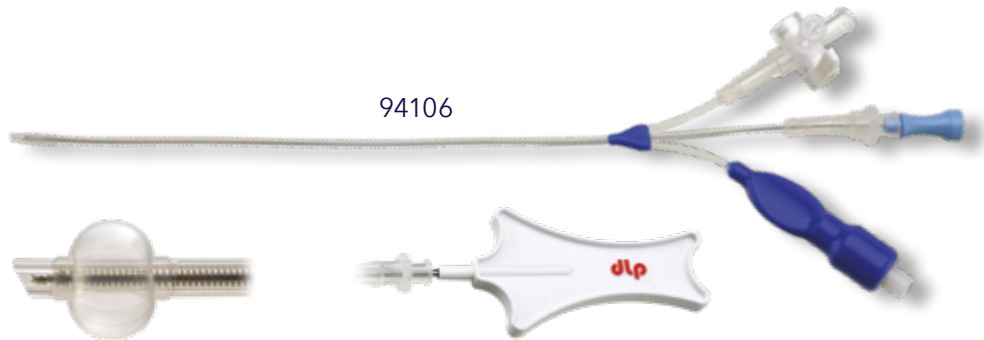

Общая длина
9,5 дюйма (23,97-24,29 см)

Гладкая манжета, корпус без армированных стенок и встроенная заглушка

94006	6 F (2,0 мм) без стилета
94106	6 F (2,0 мм) стилет-проводник

4 шт. в картонной упаковке

Общая длина
12,5 дюйма (31,8 см)

Гладкая манжета и армированный корпус

94215T	15 F (5,0 мм) жесткий стилет
--------	------------------------------

10 шт. в упаковке

Общая длина
12,5 дюйма (32,1 см)

Гладкая манжета, армированный корпус и встроенная заглушка

94725	15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch
-------	--


10 шт. в упаковке

Ретроградные канюли

Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с раздуваемой вручную манжетой DLP



Канюли для пациентов детского и взрослого возраста имеют силиконовый корпус, манжету с ручным наполнением и линию мониторинга давления. Имеется широкий выбор манжет и стилетов. Все канюли имеют манжету и поставляются со шприцем для ее раздувания.

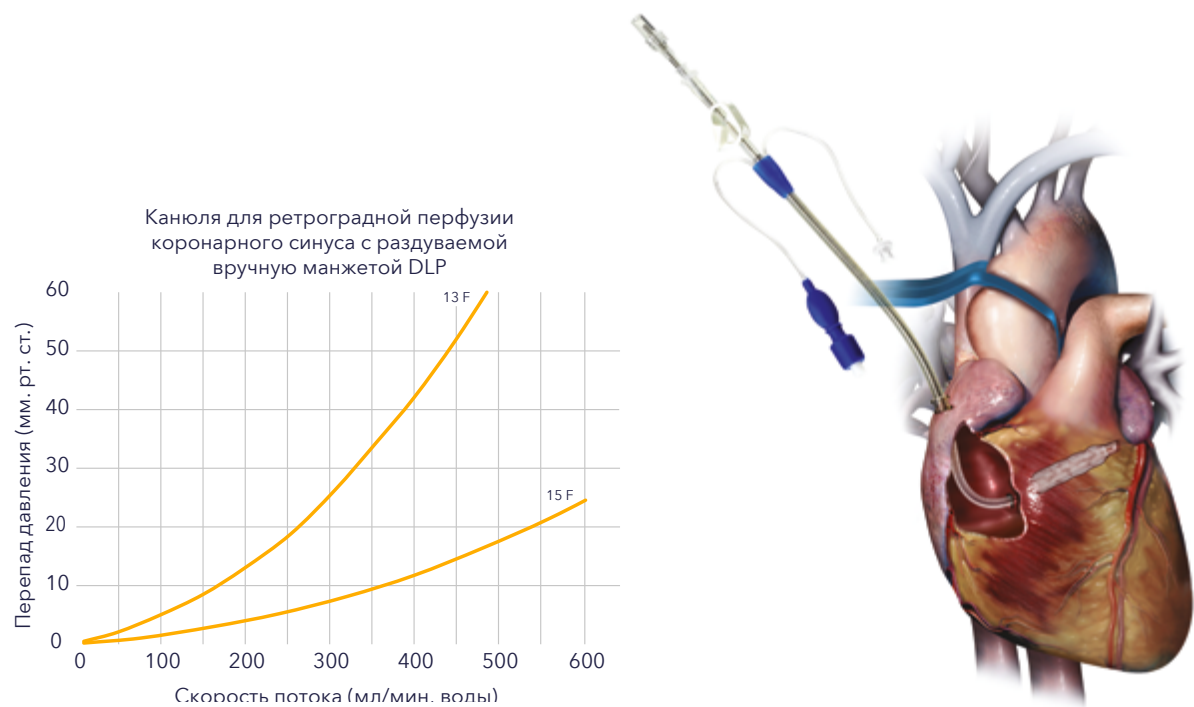

Общая длина
12,5 дюйма (32,1-32,7 см)

Удлиненная манжета,
армированный корпус и
встроенная заглушка

94625	15 F (5,0 мм) жесткий стилет
94665	15 F (5,0 мм) стиллет-проводник

10 шт. в упак.



Общая длина
12,5 дюйма (31,9-32,98 см)

Гофрированная манжета,
армированный корпус и
встроенная заглушка

94913	13 F (4,3 мм) стилет-проводник
94913L	13 F (4,3 мм) стилет-проводник -дюймовая линия (15,2 см) мониторинга давления и наполнения манжеты
94915	15 F (5,0 мм) стилет-проводник
94965	15 F (5,0 мм) стилет-проводник с рукояткой Tru-Touch
94975	15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch

10 шт. в упак.

Важная информация по безопасности

В связи с уникальными модификациями, необходимыми для техники мини-инвазивных вмешательств, следует проявлять особую осторожность и внимательность. Из-за ограничения прямого визуального контроля при мини-инвазивных техниках вмешательства рекомендуется проводить под контролем флюороскопии и эхокардиографии. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца.

Ретроградные канюли

Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP



Канюли имеют силиконовый корпус, манжету с автоматическим наполнением и линию мониторинга давления. Имеется широкий выбор манжет и стилетов.



Общая длина 12,5 дюйма (31,4-31,6 см)

Гладкая преформированная манжета и армированный корпус

94315T	15 F (5,0 мм) жесткий стилет
94415T	15 F (5,0 мм) стилет-проводник
94735	15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch
94745	15 F (5,0 мм) стилет-проводник с рукояткой Tru-Touch

10 шт. в упак.




Общая длина 12,5 дюйма (31,35 см)

Гофрированная преформированная манжета, армированный корпус и встроенная заглушка

94995	15 F (5,0 мм) стилет-проводник с рукояткой Tru-Touch
-------	--

10 шт. в упак.

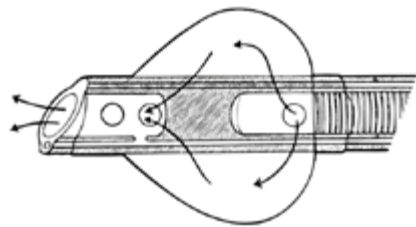

Поток через силиконовую канюлю с автоматическим наполнением манжеты


Силиконовые манжеты с автоматическим наполнением облегчают раздутие манжеты и не требуют использования шприца. Благодаря уникальному дизайну манжеты кардиоплегический раствор циркулирует по манжете, а затем вытекает через наконечник канюли. Манжеты имеют двойную систему мониторинга давления, которая позволяет проводить контроль давления внутри синуса через порт в наконечнике канюли. Примечательно, что при окклюзии наконечника давление внутри манжеты будет измеряться через второй порт. Эта особенность значительно снижает риск повреждения коронарного синуса из-за чрезмерного раздутия.

Ретроградные канюли

Канюли для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP



Канюли имеют корпус из ПВХ, гладкую манжету из полиуретана с автоматическим наполнением и линию мониторинга давления. Имеется широкий выбор стилетов.

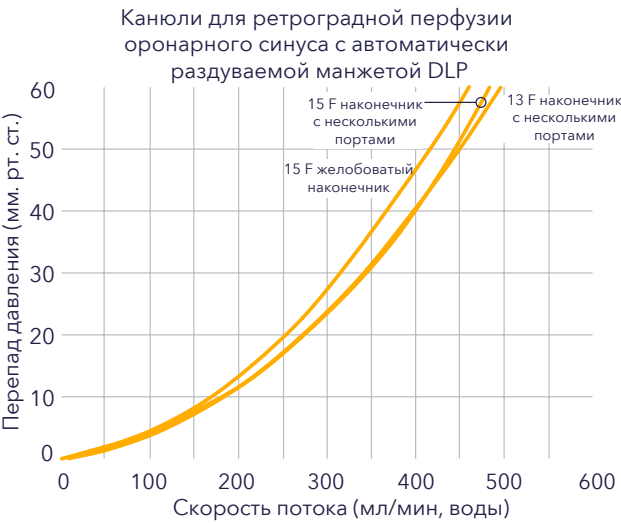

Общая длина 10 дюймов (25,4-26,2 см)

Гладкая преформированная манжета, короткий желобоватый конический наконечник и встроенная заглушка

94885K

15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch

10 шт. в упак.



Общая длина 11 дюймов (27,9-31,35 см)

Гладкая преформированная манжета, наконечник с несколькими портами и встроенная заглушка

94533

13 F (4,3 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch

94535

15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch

10 шт. в упак.

Ретроградные канюли

Канюля для ретроградной перфузии коронарного синуса с автоматически раздуваемой манжетой DLP



Канюли имеют корпус из ПВХ, манжету из полиуретана с автоматическим наполнением и линию мониторинга давления. Имеется широкий выбор манжет и стилетов.



Общая длина 12 дюймов (30,9 см)

Гладкая преформированная манжета, короткий желобоватый конический наконечник и встроенная заглушка	
94885	15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch
94895	15 F (5,0 мм) стилет-проводник с рукояткой Tru-Touch

10 шт. в упак.



Общая длина 12,5 дюйма (30,9 см)

Гладкая преформированная манжета, желобоватый конический наконечник и встроенная заглушка	
94835	15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch


10 шт. в упак.



Общая длина 12,5 дюйма (32,3 см)

Гофрированная преформированная силиконовая манжета, короткий желобоватый конический наконечник и встроенная заглушка	
94935	15 F (5,0 мм) жесткий стилет с рукояткой Tru-Touch

10 шт. в упак.

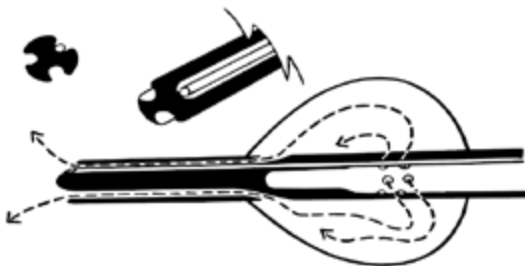

Поток через канюлю из ПВХ
автоматическим наполнением манжеты

Кардиоплегия

Адаптеры для кардиоплегии



Адаптеры для кардиоплегии позволяют изменять конфигурацию кардиоплегического контура. Адаптеры компании Medtronic используются для соединения нескольких кардиоплегических канюль и/или канюль для венозных шунтов с одной приносящей магистралью, для переключения между антеградной и ретроградной канюлями для кардиоплегии, а также для подключения дренажной линии к кардиоплегической канюле. Дополнительные адаптеры позволяют удлинить кардиоплегический контур, обеспечить рециркуляцию кардиоплегического раствора или увеличить длину линии мониторинга давления.

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2015/2446 от 02.03.2021

Medtronic

Адаптеры для кардиоплегии



- ▶ Адаптеры перфузионные DLP 57
- ▶ Адаптеры перфузионные/дренажные DLP 57
- ▶ Удлинительные линии-адаптеры DLP 58
- ▶ Удлинительные линии-адаптеры для мониторинга давления DLP 58
- ▶ Адаптеры прямые DLP 59
- ▶ Y-адаптеры DLP 59
- ▶ Y-адаптеры рециркуляционные DLP 60
- ▶ Y-адаптеры коронарные перфузионные DLP 60
- ▶ DLP Y-адаптеры 61
- ▶ Канюля для венозного шунта DLP 62
- ▶ Адаптер для кардиоплегии с портом для измерения давления DLP 63
- ▶ Переключатели перфузионные ARISS 63
- ▶ Распределительное устройство для кардиоплегии DLP 64
- ▶ Адаптеры антеградные/ретроградные DLP 64
- ▶ Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP ... 65

Адаптеры для кардиоплегии

Адаптеры перфузионные DLP



Адаптеры имеют ступенчатый коннектор на одном конце и люэр-порт типа «папа» или «мама» на другом. На некоторых моделях между коннектором и люэр-портом есть удлинительная трубка.

Общая длина 2 дюйма (5,1 см)

Люэр-порт типа «папа»

10007	Ступенчатый коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)
10008	Ступенчатый коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)

40 шт. в картонной упаковке



Общая длина 3,25 дюйма (8,3 см)

Трубка и люэр-порт типа «мама»

10022	Ступенчатый коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)
-------	---

40 шт. в картонной упаковке



Адаптеры перфузионные/дренажные DLP

Адаптер представляет собой комбинацию перфузионного адаптера 10007 и высокопоточного стопорного краника, что позволяет проводить дренирование линии. Этот трехходовой краник имеет большой внутренний просвет и люэр-порты типа «мама» и «папа».

Люэр-порт типа «папа»

13002

20 шт. в картонной упаковке



Важная информация по безопасности

Адаптеры для кардиоплегии представляют собой сочетание нескольких компонентов, для каждого из которых есть свои показания к применению, противопоказания, меры предосторожности, особые указания и потенциальные нежелательные явления. Рекомендуется ознакомиться с соответствующей информацией для каждого из таких компонентов. Адаптеры для кардиоплегии необходимо применять строго по утвержденным показаниям. При работе используйте минимальное давление, чтобы уменьшить риск гемолиза или повреждения сосудов. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца.

Адаптеры для кардиоплегии

Удлинительные линии-адаптеры DLP



Адаптеры имеют мягкую (типа силикона) трубку из ПВХ с зажимом или без него, а также с люэр-портами типа «мама» (с крылышками) и «папа» на концах.

**Общая длина
10 дюймов (25,4 см)**

Люэр-порты типа «мама» (с крылышками) и «папа»	
11001	без зажима

10 шт. в упак.



**Общая длина
20 дюймов (50,8 см)**

Люэр-порты типа «мама» (с крылышками) и «папа»	
11001G	с зажимом

20 шт. в картонной упаковке

Удлинительные линии-адаптеры для мониторинга давления DLP

На концах адаптеров комбинация из люэр-портов типа «мама» и «папа».

Общая длина 6 футов (1,8 м)

Люэр-порты типа «мама» и «папа»	
25009	люэр-порты типа «мама» и «папа»
25010	люэр-порты типа «мама» и «папа»

20 шт. в картонной упаковке



Адаптеры для кардиоплегии

Адаптеры прямые DLP



На одном конце адаптеров расположен люэр-порт типа «папа», а на другом – коннектор длиной 1/4 дюйма (0,64 см).



Общая длина 5 дюймов (12,7 см)

Люэр-порты типа «папа»	
10001	с коннектором с люэр-портом 1/4 дюйма
10001K	с коннектором 1/4 дюйма с люэр-портом и зажимом
20 шт. в картонной упаковке	

Y-адаптеры DLP

Адаптеры имеют люэр-порт типа «папа» на одиночной трубке. Люэр-порт типа «мама» расположен на кардиоплегической приточной трубке, а коннектор длиной 1/4 дюйма (0,64 см) – на дренажной линии.



Люэр-порт типа «папа» на одинарной трубке	
10005†	Общая длина 7,5 дюйма (19,1 см), приточная трубка 3 дюйма (7,6 см) и цветные зажимы
10534	Общая длина 8,5 дюйма (21,6 см), односторонний клапан в дренажной линии и цветные зажимы
20 шт. в картонной упаковке	

† В сочетании с дренажным Y-адаптером 10005 канюлю для корня аорты можно использовать для дренажа левых отделов сердца.

Адаптеры для кардиоплегии

Y-адаптеры рециркуляционные DLP




Адаптеры представлены в двух вариантах: мягкая вилка с двумя трубками, оснащенными коннекторами длиной 1/4 дюйма (0,64 см) и дренажными линиями, и мягкая вилка с тремя трубками, оканчивающимися люэр-портами типа «папа».

Общая длина 8 дюймов (20,3 см)

Люэр-порт типа «папа» на одинарной трубке

10003	цветные зажимы
20 шт. в картонной упаковке	

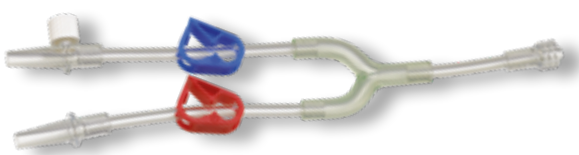

Y-адаптеры коронарные перфузионные DLP


Адаптеры имеют жесткую вилку с двумя трубками различной длины, на концах которых расположены люэр-порты типа «папа».



Люэр-порт типа «мама» на одинарной трубке

10004	Наконечник 3,5 дюйма (8,9 см), трубки 10 дюймов (25,4 см) и белые зажимы
10004D	Трубки 6 дюймов (15,2 см) и белые зажимы
10700	Наконечник 3,5 дюйма (8,9 см), трубки 10 дюймов (25,4 см) и цветные зажимы
10706	Мягкие (типа силикона) трубки из ПВХ длиной 6 дюймов (15,2 см) и белые зажимы
10710	Мягкие (типа силикона) трубки из ПВХ длиной 10 дюймов (25,4 см) и белые зажимы

20 шт. в картонной упаковке

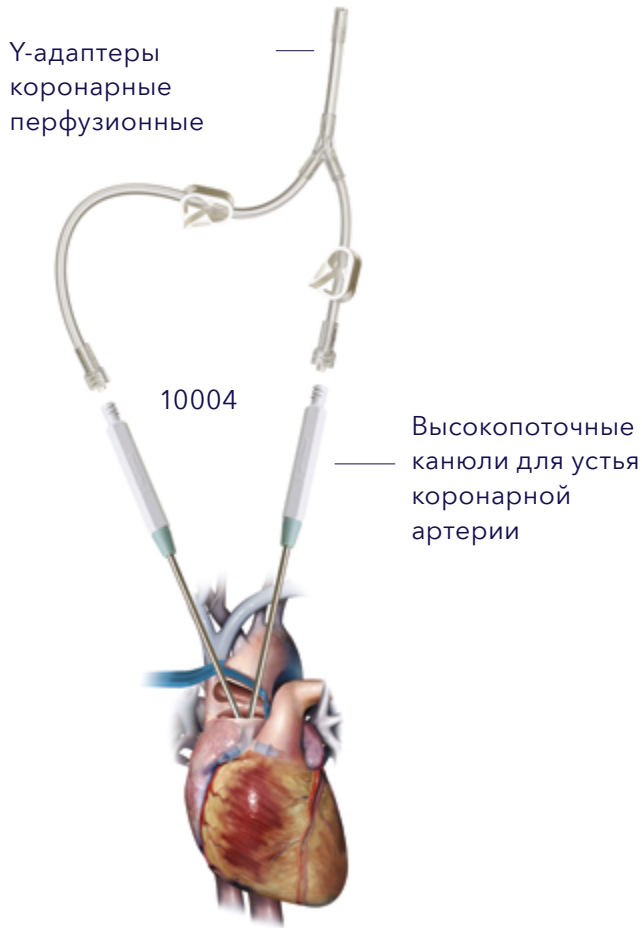

Важная информация по безопасности

Адаптеры для кардиоплегии представляют собой сочетание нескольких компонентов, для каждого из которых есть свои показания к применению, противопоказания, меры предосторожности, особые указания и потенциальные нежелательные явления. Рекомендуется ознакомиться с соответствующей информацией для каждого из таких компонентов. Адаптеры для кардиоплегии необходимо применять строго по утвержденным показаниям. При работе используйте минимальное давление, чтобы уменьшить риск гемолиза или повреждения сосудов. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца.

Адаптеры для кардиоплегии

DLP Y-адаптеры



Адаптер представляет собой комбинацию из моделей 10004 и 10005 и имеет четыре трубки. Две трубки оканчиваются люэр-портами типа «папа», одна – люэр-портом по типу «мама», а на конце еще одного имеется коннектор 1/4 дюйма (0,64 см).

Общая длина
20,5 дюйма (52,1 см)

Модель с четырьмя трубками

10005ВН	цветные зажимы
----------------	----------------

20 шт. в картонной упаковке



У адаптера люэр-порт типа «мама» расположен на кардиоплегической приточной трубке, а коннектор длиной 1/4 дюйма (0,64 см) – на дренажной линии.

Общая длина
7,5 дюйма (19,1 см)

Люэр-порт типа «папа» на
одинарной трубке

10005OS	белые зажимы с цветными стрелками
----------------	--------------------------------------

20 шт. в картонной упаковке



Важная информация по безопасности

Адаптеры для кардиоплегии представляют собой сочетание нескольких компонентов, для каждого из которых есть свои показания к применению, противопоказания, меры предосторожности, особые указания и потенциальные нежелательные явления. Рекомендуется ознакомиться с соответствующей информацией для каждого из таких компонентов. Адаптеры для кардиоплегии необходимо применять строго по утвержденным показаниям. При работе используйте минимальное давление, чтобы уменьшить риск гемолиза или повреждения сосудов. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца.

Адаптеры для кардиоплегии

Канюля для венозного шунта DLP




У изделия мягкий силиконовый наконечник с переменным диаметром, который подойдет для любого сосуда. Наконечник присоединяется к Y-адаптеру с помощью трубки с зажимами. На конце Y-адаптера находится люэр-порт типа «папа».



Общая длина 25,5 дюйма (63,5 см)

Люэр-порт типа «папа» на одинарной приточной трубке	
10010	Y-адаптер с люэр-портом типа «мама» и белым зажимом на трубке с люэр-портом типа «папа»
20 шт. в картонной упаковке	

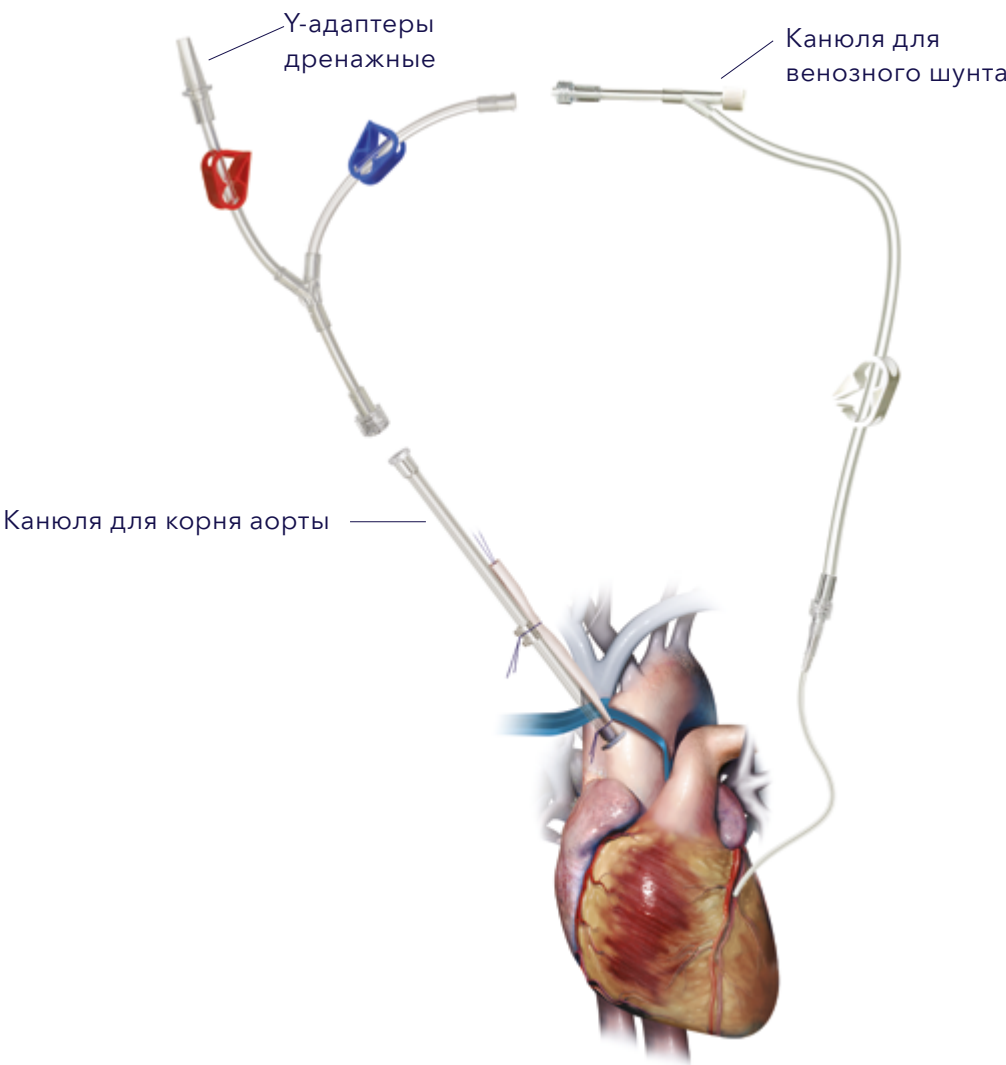

Сочетание канюли для венозного шунта и канюли для корня аорты позволяет проводить перфузию корня аорты и шунта. При этом шунт придерживают пальцами и не перевязывают.

Адаптеры для кардиоплегии

Адаптер для кардиоплегии с портом для измерения давления DLP



Этот адаптер оснащен резиновой перегородкой из безлатексной резины, которая расположена рядом с местом соединения с кардиоплегической канюлей для обеспечения введение иглы для мониторинга давления.




Люэр-порт типа «папа» с фиксатором	
15004	
10 шт. в упак.	

Переключатели перфузионные ARISS

Переключатель устанавливается на стол и позволяет хирургу переключаться между антеградной и ретроградной кардиоплегией. Модели имеют магистрали контроля давления, проходящие через входные и выходные порты. Выходные порты для удобства обозначены цветом.

Общая длина 13 дюймов (33,0 см)	
Модели для использования на столе	
13000	трубки разной длины
13004	трубки одинаковой длины
10 шт. в упак.	

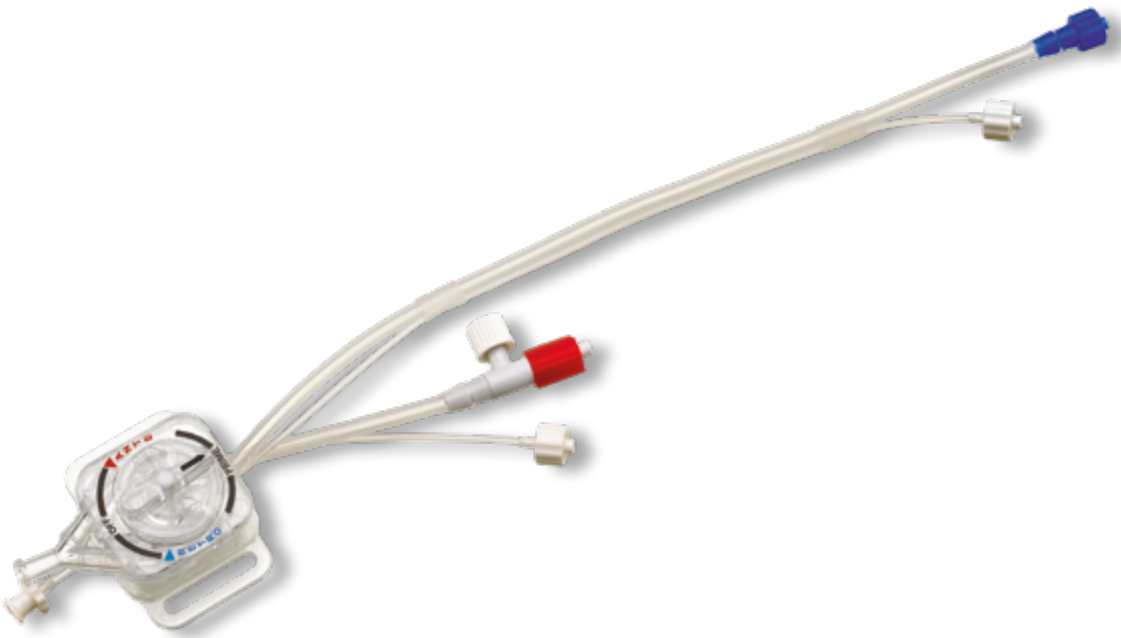

Адаптеры для кардиоплегии

Распределительное устройство для кардиоплегии DLP



Мягкая трубка с тремя магистралями, которые заканчиваются люэр-портами типа «папа». Длина трубок различная, они закреплены в держателе с липучками. Длина трубки с красным зажимом составляет 10 дюймов (25,4 см), с белым зажимом – 20 дюймов (50,8 см), с синим зажимом – 30 дюймов (76,2 см).



Люэр-порт типа «мама» на одинарной трубке

13003	цветные зажимы
--------------	----------------

5 шт. в картонной упаковке

Адаптеры антеградные/ретроградные DLP


У адаптера имеется трехходовый краник с большим просветом и люэр-порты типа «папа» на выходных портах.

**Общая длина
26,5 дюйма (67,3 см)**

Люэр-порт типа «мама» на одинарной трубке

13001

10 шт. в упак.

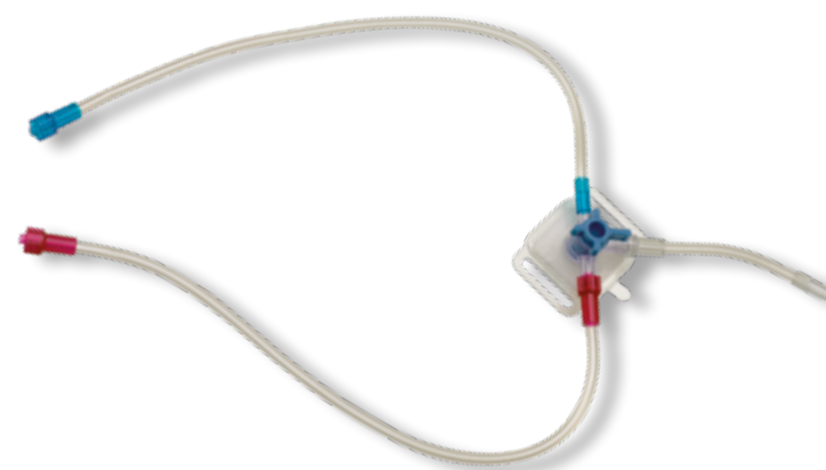

Важная информация по безопасности

Адаптеры для кардиоплегии представляют собой сочетание нескольких компонентов, для каждого из которых есть свои показания к применению, противопоказания, меры предосторожности, особые указания и потенциальные нежелательные явления. Рекомендуется ознакомиться с соответствующей информацией для каждого из таких компонентов. Адаптеры для кардиоплегии необходимо применять строго по утвержденным показаниям. При работе используйте минимальное давление, чтобы уменьшить риск гемолиза или повреждения сосудов. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца.

Адаптеры для кардиоплегии

Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP




Изделия позволяют одновременно проводить перфузию корня аорты и трех и более венозных шунтов. На приточной линии расположены люэр-порты типа «мама» или «папа» и зажимы на адаптере, который разделяет линию на четыре трубки и более. На трубках расположены цветные зажимы для удобства их различия, а на концах находятся люэр-порты типа «папа». Модели с дренажной линией заканчиваются коннектором длиной 1/4 дюйма (0,64 см).

Общая длина 12 дюймов (30,5 см)

Люэр-порт типа «мама» на одинарной приточной линии с четырьмя трубками	
14003	трубки длиной 4–8 дюймов (20,3 см) с тремя красными зажимами и одним синим зажимом

10 шт. в упак.

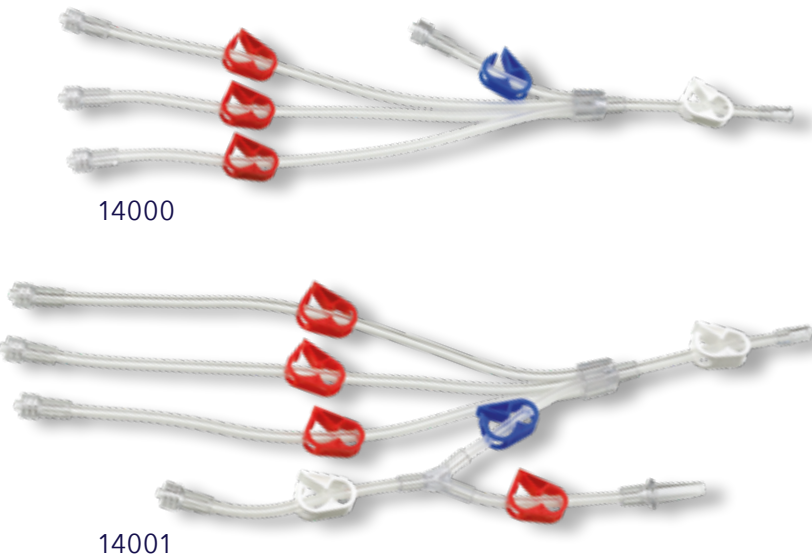

Общая длина 15 дюймов (38,1 см)


Люэр-порт типа «мама» на одинарной приточной линии с четырьмя трубками	
14000	трубка длиной 1–3 дюйма (7,6 см) с синим зажимом
	трубки длиной 3–10 дюймов (25,4 см) с красными зажимами

10 шт. в упак.

Люэр-порт типа «мама» на одинарной приточной линии с четырьмя трубками дренажной линией

14001	трубка длиной 1–8 дюймов (20,3 см) с люэр-портом и красным зажимом на дренажной линии
	трубки длиной 3–10 дюймов (25,4 см) с красными зажимами
14017	жесткая трубка длиной 1–8 дюймов (20,3 см) с люэр-портом и красным зажимом на дренажной линии
	жесткая трубка длиной 3–10 дюймов (25,4 см) с красными зажимами

10 шт. в упак.

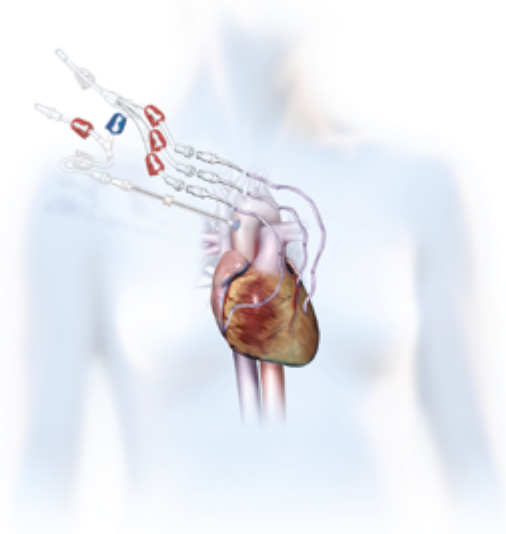

Важная информация по безопасности


Адаптеры для кардиоплегии представляют собой сочетание нескольких компонентов, для каждого из которых есть свои показания к применению, противопоказания, меры предосторожности, особые указания и потенциальные нежелательные явления. Рекомендуется ознакомиться с соответствующей информацией для каждого из таких компонентов. Адаптеры для кардиоплегии необходимо применять строго по утвержденным показаниям. При работе используйте минимальное давление, чтобы уменьшить риск гемолиза или повреждения сосудов. При канюляции и других вмешательствах на сердце следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждения сосудов и тканей сердца.

Адаптеры для кардиоплегии

Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP



Изделия позволяют одновременно проводить перфузию корня аорты и трех и более венозных шунтов. На приточной линии расположены люэр-порты типа «мама» или «папа» и зажимы на адаптере, который разделяет линию на четыре трубки и более. На трубках расположены цветные зажимы для удобства их различия, а на концах находятся люэр-порты типа «папа».

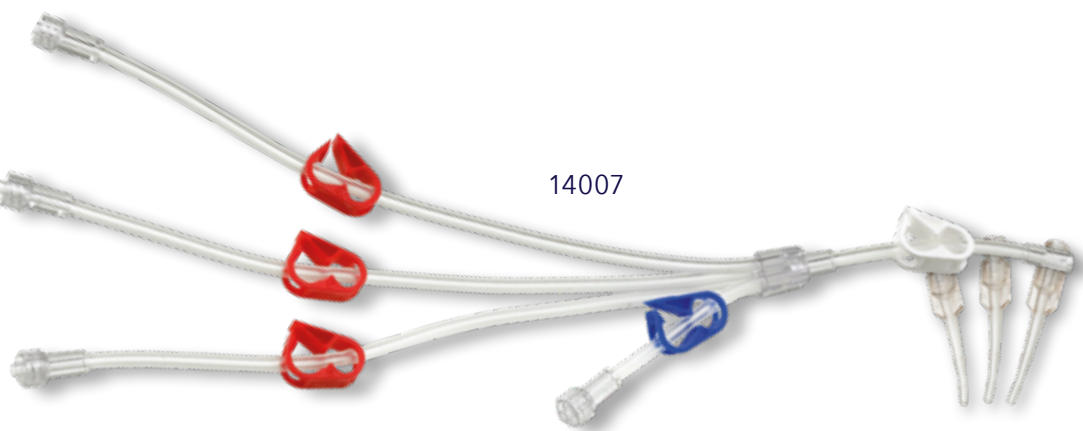

Общая длина 15 дюймов (38,1 см)

Люэр-порт типа «мама» на одинарной приточной линии с четырьмя магистралями и тремя сосудистыми канюлями со свободным потоком (модель 30003)

14007	трубка длиной 1-3 дюйма (7,6 см) с синим зажимом
	трубки длиной 3-10 дюймов (25,4 см) с красными зажимами

10 шт. в упак.

Люэр-порт типа «мама» на одинарной приточной линии с четырьмя трубками и тремя сосудистыми канюлями с односторонним клапаном (модель 30001)


14008	трубка длиной 1-3 дюйма (7,6 см) с синим зажимом
	трубки длиной 3-10 дюймов (25,4 см) с красными зажимами

10 шт. в упак.

Люэр-порт типа «мама» на одинарной приточной линии с шестью трубками

14006	трубка длиной 1-3 дюйма (7,6 см) с синим зажимом
	трубки длиной 5-10 дюймов (25,4 см) с красными зажимами

10 шт. в упак.

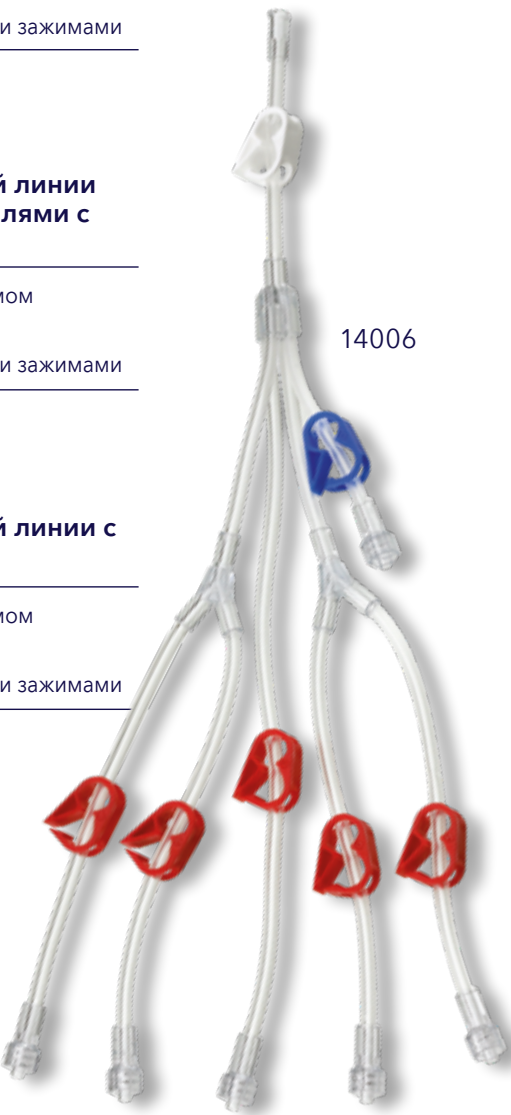

Изделия

Аспирационный контур



Мы предлагаем устройства для аспирации как с высокой, так и с малой мощностью для обеспечения чистого и сухого операционного поля. Ручные отсосы кардиотомной крови компании Medtronic предназначены для тонкой работы, а интракардиальные отсосы и гибкие отсосы используются для работы внутри и вокруг сердца. Катетеры для дренирования левого желудочка компании Medtronic предназначены для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированные наконечники. Имеется большой выбор катетеров по длине и типу интродьюсера, они и выпускаются как с силиконовым, так и ПВХ-корпусом. Широкий ассортимент нашей продукции позволяет подобрать канюлю, соответствующую вашим требованиям.

Аспирационный контур



- ▶ Трубка аспирационная DLP 69
- ▶ Сборник жидкости перикардальный DLP 72
- ▶ Сборник жидкости перикардальный/интракардиальный DLP.. 72
- ▶ Сборник жидкости интракардиальный DLP..... 73
- ▶ Катетер дренажный для левых отделов сердца DLP..... 74


Регистрационное удостоверение №РЗН 2022/16506 от 07.02.2022
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13337 от 02.02.2021

Аспирационный контур

Трубка аспирационная DLP



Отсосы имеют удобную рукоятку с портом контроля вакуума. Их наконечники выполнены из гибкой нержавеющей стали, которая может легко гнуться в соответствии с пожеланиями хирурга. Модели поставляются с мягким силиконовым наконечником или без него. Все отсосы снабжены удлинительными трубками с зажимом и заканчиваются коннекторами длиной 1/4 дюйма (0,64 см).

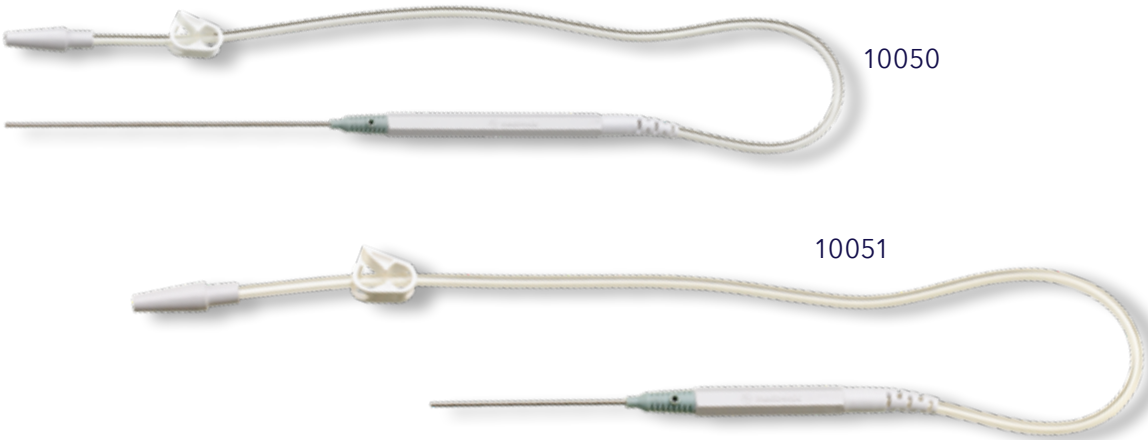

Наконечник Frazier



Мягкий наконечник



3 дюйма (7,6 см)

примерная длина корпуса и наконечника

Наконечник Frazier	
10051	корпус 6 F (2,0 мм)

Мягкий наконечник	
10053	корпус 6 F (2,0 мм) с наконечником 10 F (3,3 мм)
20 шт. в картонной упаковке	

6 дюймов (15,2 см)

примерная длина корпуса и наконечника

Наконечник Frazier	
10050	корпус 6 F (2,0 мм)

Мягкий наконечник	
10052	корпус 6 F (2,0 мм) с наконечником 10 F (3,3 мм)
20 шт. в картонной упаковке	

Аспирационный контур

Трубка аспирационная DLP



Отсосы имеют удобную рукоятку. Их наконечники выполнены из гибкой нержавеющей стали, которая может легко гнуться с в соответствии с пожеланиями хирурга. Отсос внутрисердечный DLP снабжен наконечником с множественными боковыми отверстиями, которые минимизируют возможность окклюзии тканями и способствует эффективному дренированию. Отсос снабжен удлинительной трубкой, которая заканчивается коннектором длиной 1/4 дюйма (0,64 см).



Общая длина 6 дюймов (15,2 см)

Наконечник с множественными боковыми отверстиями

10060	корпус 10 F (3,3 мм) с наконечником 20 F (6,7 мм) (28 отверстий)
--------------	--

20 шт. в картонной упаковке

Аспирационный контур

Трубка аспирационная DLP



Отсосы имеют удобную рукоятку. Наконечник сделан из жесткой нержавеющей стали. Большой отсос имеет желобоватый наконечник, который минимизирует риск окклюзии тканями и способствует эффективному дренированию. Малый отсос имеет мягкий наконечник и люэр-порт, которые позволяют аккуратно удалить кровь с хирургического поля.



7 дюймов (18,0 см)
примерная длина корпуса и наконечника

Отсос большой	
10061	наконечник 20 F (6,7 мм) и корпус 16 F (5,3 мм)
20 шт. в картонной упаковке	



4,75 дюйма (12,1 см)
примерная длина корпуса и наконечника

Отсос малый	
10062	наконечник 9 F (3,0 мм) и корпус 11 F (3,7 мм)
20 шт. в картонной упаковке	

Аспирационный контур

Сборник жидкости перикардальный DLP



Отсосы имеют желобоватый наконечник, заключенный в спираль из нержавеющей стали с утяжелителем на конце. Наконечник соединен с мягкой гибкой трубкой, заканчивающейся коннектором.



Общая длина
15 дюймов (38,1 см)

Утяжеленный наконечник

12010

20 F (6,7 см), коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)

20 шт. в картонной упаковке

Сборник жидкости перикардальный/интракардиальный DLP

Гибкие отсосы имеют утяжеленный наконечник со множественными отверстиями для усиления всасывания и уменьшения травмы окружающих тканей. Перфорированный наконечник присоединен к трубке, оканчивающейся коннектором длиной 1/4 дюйма (0,64 см).



Общая длина
15 дюймов (38,1 см)

Утяжеленный наконечник

12112

20 F (6,7 мм)


20 шт. в картонной упаковке

Аспирационный контур

Сборник жидкости интракардиальный DLP



У отсоса имеется наконечник со множественными отверстиями для усиления всасывания и уменьшения травмы окружающих тканей. Отсос выпускается в двух размерах: для взрослых и детей. Перфорированный наконечник присоединен к трубке, оканчивающейся коннектором длиной 1/4 дюйма (0,64 см).

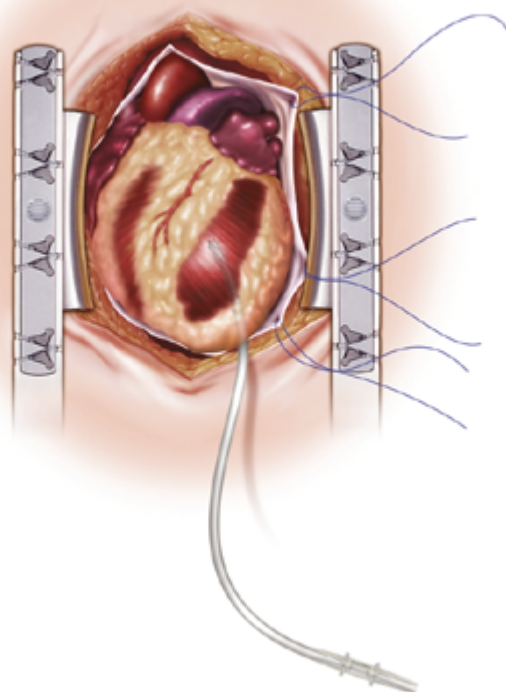

**Общая длина
12 дюймов (30,5 см)**

12013

12 F (4,0 мм) (10 отверстий
в наконечнике)

20 шт. в картонной упаковке

**Общая длина
15 дюймов (38,1 см)**

12012

20 F (6,7 мм) (28 отверстий
в наконечнике)


20 шт. в картонной упаковке

Аспирационный контур

Катетер дренажный для левых отделов сердца DLP



Катетеры разработаны для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированные наконечники. Корпус катетера прямой, преформированный или гибкий, выполнен из силикона или ПВХ и снабжен отметками глубины. Катетер выпускается в двух размерах: для взрослых и детей. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким проводниковый интродьюсером для облегчения постановки и проведения. На конце любого катетера для дренирования расположен коннектор длиной 1/4 дюйма (0,64 см) с люэр-портом и без него.

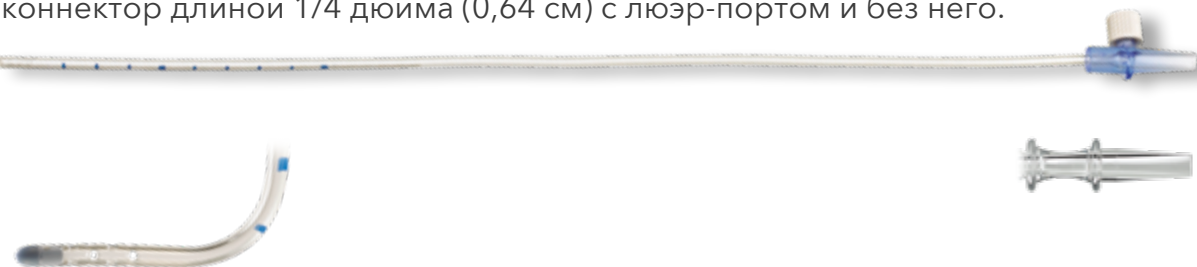

Общая длина 13 дюймов (31,5-33 см), ПВХ

Преформированный наконечник 1,5 дюйма (3,8 см) и коннектор с люэр-портом

12008*	10 F (3,3 мм) (8 отверстий в наконечнике)
--------	---

20 шт. в картонной упаковке

Преформированный наконечник 2 дюйма (5,1 см) и коннектор с люэр-портом

12001	13 F (4,3 мм) (14 отверстий в наконечнике)
-------	--

20 шт. в картонной упаковке

Наконечник 2 дюйма (5,1 см), коннектор с люэр-портом и гибкий интродьюсер

12101	13 F (4,3 мм) (14 отверстий в наконечнике)
-------	--

20 шт. в картонной упаковке



Общая длина 15 дюймов (38,1 см), ПВХ

Гибкий корпус и коннектор с люэр-портом

12110	10 F (3,3 мм) (9 отверстий в наконечнике)
12113	13 F (4,3 мм) (9 отверстий в наконечнике)
12115	15 F (5,0 мм) (20 отверстий в наконечнике)

20 шт. в картонной упаковке



Общая длина 15 дюймов (38,1 см), ПВХ

Гибкий корпус и коннектор без люэр-порт

12116	16 F (5,3 мм) (11 отверстий в наконечнике)
12118	18 F (6,0 мм) (11 отверстий в наконечнике)

20 шт. в картонной упаковке



Общая длина 16 дюймов (39,3-40,6 см), силикон

Коннектор без люэр-порта и гибкий интродьюсер

12016	16 F (5,3 мм) (20 отверстий в наконечнике)
12002	20 F (6,7 мм) (24 отверстия в наконечнике)

Коннектор без люэр-порта и преформированный интродьюсер

12220	20 F (6,7 мм) (24 отверстия в наконечнике)
-------	--

20 шт. в картонной упаковке



*Доступные варианты с биоактивным покрытием Cortiva.



Изделия

Вспомогательные хирургические инструменты



Крупнейшее портфолио канюль.

Лучшие решения

— для вас.

Вспомогательные хирургические изделия предназначены для обеспечения экономии времени и простоты использования, а также для облегчения оставшейся части хирургического вмешательства. Мы предлагаем широкий выбор вспомогательных инструментов для самых разных случаев.

Вспомогательные хирургические инструменты



- ▶ Одноразовые наборы для мониторинга давления DLP 77
- ▶ Наборы турникетов кровоостанавливающих DLP 78
- ▶ Набор турникетов кровоостанавливающих TourniKwik..... 79
- ▶ Набор турникетов кровоостанавливающих Sure-Snare..... 79
- ▶ Канюли для перфузии венозных шунтов и/или сосудов в условиях искусственного кровообращения 80
- ▶ Канюли артериотомические DLP..... 81
- ▶ Трубки для быстрого заполнения DLP 82
- ▶ Трубки для быстрого первичного заполнения контура DLP .. 82

Регистрационное удостоверение №РЗН 2021/16128 от 23.12.2021
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19909 от 29.03.2023
 Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/19287 от 30.12.2022
 Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2015/2446 от 02.03.2021

Вспомогательные хирургические инструменты

Одноразовые наборы для мониторинга давления DLP




Наборы предназначены для использования с блоком мониторинга давления. Они имеют силиконовую диафрагму, расположенную в пластиковой головке с краником, который присоединяется к разъему блока. Для удобства использования головка соединяется с удлинительной трубкой, на конце которой расположен люэр-порт типа «папа» или краник.

Общая длина 45 дюймов (1,14 м)

61000	краник
62000	люэр-порт типа «папа»

10 шт. в упак.

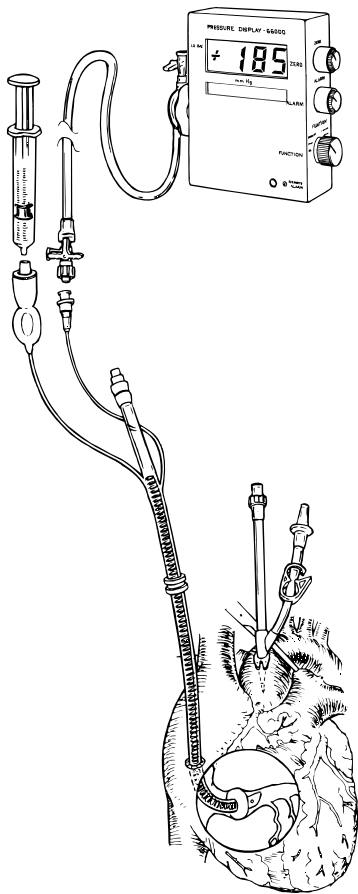

Вспомогательные хирургические инструменты

Наборы турникетов кровоостанавливающих DLP



Наборы турникетов включают трубки различной длины и цветов. Доступны наборы для взрослых и детей. В набор входит проволоочная петля.

Стандартные наборы

Длина трубки 4 дюйма (10,2 см) и 6 дюймов (15,2 см)

79016	12 F [бронзовый 3-4 дюйма (10,2 см), бронзовый 3-6 дюймов (15,2 см), 2 петли]
--------------	---

40 наборов в упаковке.



79016

Длина трубки 5,5 дюйма (14,0 см)

79003	12 F (1 красная, 2 синих, 3 прозрачных, 1 петля)
79015	12 F (1 красная, 2 синих, 5 прозрачных, 2 петли)

40 наборов в упаковке.



79003

Длина трубки 7 дюймов (17,8 см)

79004	12 F (1 красная, 1 синяя, 1 петля)
79006	12 F (1 красная, 1 синяя, 1 прозрачная, 1 петля)

40 наборов в упаковке.

79022	12 F (6 малых белых рентгеноконтрастных, 1 петля)
79023	19 F (3 больших рентгеноконтрастных, 1 петля)


20 наборов в упаковке.

79026	12 F (2 красных, 2 синих, 2 прозрачных) и 16 F (2 больших прозрачных, 1 петля)
79027	12 F (2 красных, 1 синяя, 1 петля)

40 наборов в упаковке.



79022

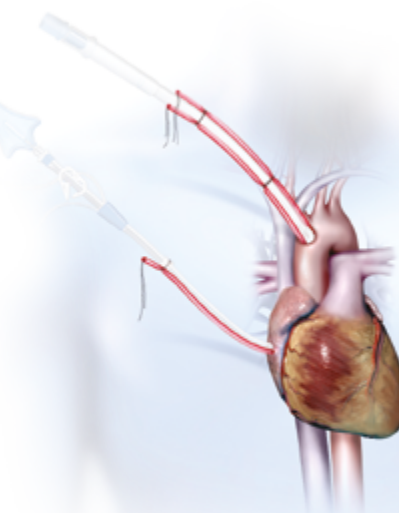

Наборы для полых вен

Длина трубки 7 дюймов (17,8 см)

79005	12 F (3 прозрачных, 1 петля)
79009	12 F (4 прозрачных, 1 петля)

40 наборов в упаковке.



79005

Вспомогательные хирургические инструменты

Набор турникетов кровоостанавливающих TourniKwik



В набор входят трубки красного цвета различной длины, на одном конце которых находится колпачок для быстрой фиксации нити. Шовная нить оборачивается вокруг колпачка, что позволяет обходиться без зажима. В каждый набор входит проволоочная петля.



79010

Длина трубки 6 дюймов (15,2 см)

79010	12 F (2 трубки, 1 петля)
79011	12 F (4 трубки, 1 петля)

40 наборов в упак.

Длина трубки 7,5 дюйма (19,1 см)

79012	12 F (2 трубки, 1 петля)
79013	12 F (4 трубки, 1 петля)

40 наборов в упак.

Набор турникетов кровоостанавливающих Sure-Snare

В набор входят трубки красного цвета различной длины, на одном конце которых находится пробка. Пробка фиксирует шовную нить в трубке с одного конца, что позволяет обходиться без зажима.



Длина трубки 5 дюймов (12,7 см)

79020	22 F (2 трубки, 2 тесьмы, 2 пластиковые петли)
-------	--

20 наборов в упак.



Длина трубки 7,5 дюйма (19,1 см)

79008	12 F (2 трубки, 1 петля)
-------	--------------------------

20 наборов в упак.

Вспомогательные хирургические инструменты

Канюли для перфузии венозных шунтов и/или сосудов в условиях искусственного кровообращения




Канюли с прозрачным корпусом из рентгеноконтрастного материала с или без одноходового клапана. На конце всех канюль расположен люэ-порт типа «мама». Имеется большой выбор наконечников различных размеров и форм.

Общая длина 2 дюйма (5,46-6,15 см)

Прозрачный корпус

30003	тупой наконечник 3 мм
30004	тупой наконечник 2 мм
30005	шишковидный наконечник 4 мм
30007	скошенный наконечник 3 мм

40 шт. в картонной упаковке

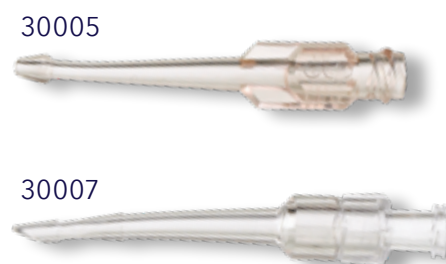


Общая длина 2 дюйма (5,46 см)

Прозрачный корпус с рентгеноконтрастной полоской

30022	тупой наконечник 3 мм
-------	-----------------------

20 шт. в картонной упаковке

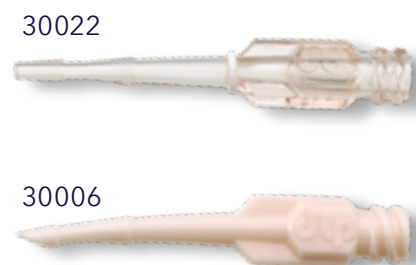

Общая длина 2 дюйма (5,46 см)

Рентгеноконтрастный корпус

30006	скошенный наконечник 3 мм
30023	тупой наконечник 3 мм

40 шт. в картонной упаковке

Общая длина 2,5 дюйма (6,15 см)

Прозрачный корпус с одноходовым клапаном

30000	скошенный наконечник 3 мм
30001	тупой наконечник 3 мм

40 шт. в картонной упаковке



Общая длина 2,5 дюйма (5,81 см)

Корпус из рентгеноконтрастного материала с одноходовым клапаном

30021	тупой наконечник 3 мм
-------	-----------------------

40 шт. в картонной упаковке



Вспомогательные хирургические инструменты

Канюли артериотомические DLP



Корпус канюли сделан из нержавеющей стали, на нем расположен наконечник типа оливы, на конце которого находится люэр-порт типа «мама».

Общая длина 1,8 дюйма (4,6 см)

31001	наконечник 1 мм
--------------	-----------------

20 шт. в картонной упаковке



Канюли с трубкой из полиуретана, рентгеноконтрастный наконечник типа оливы, на другом конце находится люэр-порт типа «мама» с крылышками.



Общая длина 1,3 дюйма (3,3 см)

31002	наконечник 2 мм
--------------	-----------------

31003	наконечник 3 мм
--------------	-----------------

20 шт. в картонной упаковке



Общая длина 2,3 дюйма (6,0-6,2 см)

31102	наконечник 2 мм
--------------	-----------------

31103	наконечник 3 мм
--------------	-----------------

31104	наконечник 4 мм
--------------	-----------------

31105	наконечник 5 мм
--------------	-----------------

31106	наконечник 6 мм
--------------	-----------------


20 шт. в картонной упаковке

Вспомогательные хирургические инструменты

Трубки для быстрого заполнения DLP



Трубки имеют несколько специальных приспособлений, способствующих асептическому заполнению контура растворами для внутреннего применения. Они имеют большую полую иглу, соединенную с гибкой трубкой. Зажим на трубке позволяет предотвратить случайное переливание жидкости и снизить риск контаминации.

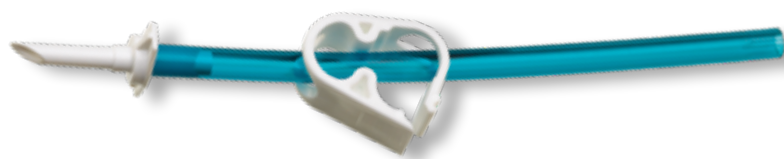

Общая длина 8,5 дюйма (21,6 см)

40040

Гибкая трубка и зажим

20 шт. в картонной упаковке

Трубки для быстрого первичного заполнения контура DLP

Этот набор облегчает введение жидкостей для быстрого первичного заполнения экстракорпорального контура. Они имеют большую полую иглу, соединенную с гибкой трубкой с зажимом и заканчивающуюся люэр-портом типа «папа».



Общая длина 14 дюймов (35,6 см)

С люэр-портом типа «папа»

10021

10 шт. в упак.

Приложение

Внутренние номера компании



Внутренние номера компании

Указатель



10001	Адаптеры прямые DLP, коннектор 1/4 дюйма с люэр-портом.....	59	12008	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 10 F (3,3 мм)	74
10001K	Адаптеры прямые DLP с коннектором 1/4 дюйма с люэр-портом и зажимом	59	12010	Перикардиальный гибкий отсос DLP, коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)	72
10003	Y-адаптеры рециркуляционные DLP	60	12012	Интракардиальный гибкий отсос DLP, 20 F (6,7 мм)	73
10004	Y-адаптеры коронарные перфузионные DLP, 3,5 дюйма (8,9 см)	60	12013	Интракардиальный гибкий отсос DLP, 12 F (4,0 мм)	73
10004D	Коронарные перфузионные Y-адаптеры DLP, 6 дюймов (15,2 см)	60	12016	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 16 F (5,3 мм)	74
10005	Y-адаптеры DLP, общая длина 7,5 дюйма (19,1 см)	59	12101	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 13 F (4,3 мм)	74
10005BH	Y-адаптеры DLP	61	12110	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 10 F (3,3 мм)	74
10005OS	Y-адаптеры DLP	61	12112	Перикардиальные/интракардиальные гибкие отсосы DLP, 20 F (6,7 мм)	72
10007	Адаптеры перфузионные DLP, ступенчатый коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)	57	12113	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 13 F (4,3 мм)	74
10008	Адаптеры перфузионные DLP, ступенчатый коннектор 3/8 дюйма (0,95 см)	57	12115	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 15 F (5,0 мм)	74
10009	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты 9 G (11 F)	41	12116	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 16 F (5,3 мм)	74
10010	Канюля для венозного шунта DLP	62	12118	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 18 F (6,0 мм)	74
10012	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты 12 G (9 F)	41	12218	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 18 G (4 F)	41
10014	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 14 G (7 F)	41	12220	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 20 F (6,7 мм)	74
10016	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 16 G (5 F)	41	13000	Переключатели перфузионные ARISS	63
10018	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 18 G (4 F)	41	13001	Адаптеры антеградные/ретроградные DLP.....	64
10021	Трубки для быстрого первичного заполнения контура DLP	85	13002	Адаптеры перфузионные/дренажные DLP	57
10022	Адаптеры перфузионные DLP, ступенчатый коннектор 1/4 дюйма (0,64 см)	57	13003	Распределительное устройство для кардиоплегии DLP	64
10050	Отсос кардиотомной крови DLP, 6 F (2,0 мм)	69	13004	Переключатели перфузионные ARISS	63
10051	Отсос кардиотомной крови DLP, 6 F (2,0 мм)	69	14000	Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP	65
10052	Отсос кардиотомной крови DLP, 6 F (2,0 мм)	69	14001	Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP	65
10053	Отсос кардиотомной крови DLP, 6 F (2,0 мм)	69	14003	Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP	65
10060	Отсос кардиотомной крови DLP, 10 F (3,3 мм)	70	14006	Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP	66
10061	Отсос кардиотомной крови, большой DLP, 20 F (6,7 мм)	71	14007	Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP	66
10062	Отсос кардиотомной крови, малый DLP, 9 F (3,0 мм)	71	14008	Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP	66
10112	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты 12 G (9 F)	41	14017	Наборы для множественной кардиоплегической перфузии DLP	65
10114	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 14 G (7 F)	41	15004	Адаптер для кардиоплегии с портом для измерения давления DLP	63
10218	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 18 G (4 F)	41	16130	Клипсы-ретракторы для коронарной артерии, зубцы длиной 3,0 мм	83
10313	Иглы для кардиоплегии DLP, 13 G (8 F)	43	16150	Клипсы-ретракторы для коронарной артерии, зубцы длиной 5,0 мм	83
10534	Y-адаптеры DLP, общая длина 8,5 дюйма (21,6 см)	59	20009	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 9 G (11 F)	42
10700	Y-адаптеры коронарные перфузионные DLP, 3,5 дюйма (8,9 см)	60	20012	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 12 G (9 F)	42
10706	Коронарные перфузионные Y-адаптеры DLP, 6 дюймов (15,2 см)	60	20012S	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 12 G (9 F)	42
10710	Y-адаптеры коронарные перфузионные DLP	60	20014	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 14 G (7 F)	42
11001	Удлинительные линии-адаптеры DLP, длина 10 дюймов (25,4 см)	58	20014L	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 14 G (7 F)	42
11001G	Удлинительные линии-адаптеры DLP, длина 20 дюймов (50,8 см)	58	20016	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 16 G (5 F)	42
11012	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты 12 G (9 F)	41	20112	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 12 G (9 F)	42
11012L	Канюля для корня аорты MiAR с интродьюсером Flow-Guard, 12 G (9 F)	39	20114	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 14 G (7 F)	42
11014	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 14 G (7 F)	41	20114HWF	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 14 G (7 F)	42
11014L	Канюли для корня аорты MiAR с интродьюсером Flow-Guard, 14 G (7 F)	39	20114WF	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 14 G (7 F)	42
11316	Иглы для кардиоплегии DLP, 16 G (5 F)	43	21012	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 12 G (9 F)	42
12001	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 13 F (4,3 мм)	74	21014	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 14 G (7 F)	42
12002	Катетеры для дренирования левого желудочка DLP, 20 F (6,7 мм)	74	23009	Кардиоплегические канюли DLP для корня аорты, 9 G (11 F)	41

Внутренние номера компании

Указатель



24009	Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией DLP, 9 G (11 F)	42	50011	Наборы для установки катетера левого предсердия DLP, 5 F (1,7 мм)	84
25009	Удлинительные линии-адаптеры для мониторинга давления DLP, люэр-порты типа «папа» и «мама»	58	57414	Канюли бедренные артериальные DLP, 14 F (4,7 мм)	27
25010	Удлинительные линии-адаптеры для мониторинга давления DLP, люэр-порты типа «папа»	58	57417	Канюли бедренные артериальные DLP, 17 F (5,7 мм)	27
30000	Сосудистые канюли DLP, скошенный наконечник 3 мм	80	57421	Канюли бедренные артериальные DLP, 21 F (7,0 мм)	27
30001	Сосудистые канюли DLP, тупой наконечник 3 мм	80	60001	Очиститель электрического хирургического ножа DLP	82
30003	Сосудистые канюли DLP, тупой наконечник 3 мм	80	61000	Одноразовые наборы для мониторинга давления DLP	77
30004	Сосудистые канюли DLP, тупой наконечник 2 мм	80	62000	Одноразовые наборы для мониторинга давления DLP	77
30005	Сосудистые канюли DLP, шишковидный наконечник 4 мм	80	66112	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 12 F (4,0 мм)	31
30006	Сосудистые канюли DLP, скошенный наконечник 3 мм	80	66114	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 14 F (4,7 мм)	31
30007	Сосудистые канюли DLP, скошенный наконечник 3 мм	80	66116	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 16 F (5,3 мм)	31
30010	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 10 F (3,3 мм)	45	66118	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 18 F (6,0 мм)	31
30012	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 12 F (4,0 мм)	45	66120	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 20 F (6,7 мм)	31
30014	Канюли для устья коронарной аорты DLP, 14 F (4,7 мм)	45	66122	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 22 F (7,3 мм)	31
30021	Сосудистые канюли DLP, тупой наконечник 3 мм	80	66124	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 24 F (8,0 мм)	31
30022	Сосудистые канюли DLP, тупой наконечник 3 мм	80	66126	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 26 F (8,7 мм)	31
30023	Сосудистые канюли DLP, тупой наконечник 3 мм	80	66128	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 28 F (9,3 мм)	31
30050	Канюли для устья коронарной артерии DLP	45	66130	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 30 F (10,0 мм)	31
30055	Канюли для устья коронарной артерии DLP	45	66132	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 32 F (10,7 мм)	31
30110	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 10 F (3,3 мм)	46	66134	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 34 F (11,3 мм)	31
30112	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 12 F (4,0 мм)	46	66136	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 36 F (12,0 мм)	31
30114	Канюли для устья коронарной аорты DLP, 14 F (4,7 мм)	46	66140	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 40 F (13,3 мм)	31
30155	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 10 F (3,3 мм)	46	66236	Канюли венозные одноступенчатые DLP, 36 F (12,0 мм)	31
30212	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 12 F (4,0 мм)	46	67312	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным металлическим наконечником, 12 F (4,0 мм)	30
30255	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 10 F (3,3 мм)	46	67314	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным металлическим наконечником, 14 F (4,7 мм)	30
30315	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 15 F (5,0 мм)	44	67316	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным металлическим наконечником, 16 F (5,3 мм)	30
30317	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 17 F (5,7 мм)	44	67318	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным металлическим наконечником, 18 F (6,0 мм)	30
30320	Канюли для устья коронарной артерии DLP, 20 F (6,7 мм)	44	67320	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным металлическим наконечником, 20 F (6,7 мм)	30
30401	Двухпросветные кардиоплегические канюли DLP, 12 G (9 F)	40	67512	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 12 F (4,0 мм) ..	32
31001	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 1 мм	81	67514	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 14 F (4,7 мм) ..	32
31002	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 2 мм	81	67516	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 16 F (5,3 мм) ..	32
31003	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 3 мм	81	67518	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 18 F (6,0 мм) ..	32
31102	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 2 мм	81	67520	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 20 F (6,7 мм) ..	32
31103	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 3 мм	81	67522	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 22 F (7,3 мм) ..	32
31104	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 4 мм	81	67524	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 24 F (8,0 мм) ..	32
31105	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 5 мм	81	67526	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 26 F (8,7 мм) ..	32
31106	Канюли для артериотомии DLP, наконечник 6 мм	81	67528	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 28 F (9,3 мм) ..	32
38002	Прокладки для защиты диафрагмального нерва DLP, средние	82	67530	Канюли венозные одноступенчатые DLP с прямоугольным наконечником, 30 F (10,0 мм) ..	32
38003	Прокладки для защиты диафрагмального нерва DLP, большие	82			
40040	Трубки для быстрого заполнения DLP	85			
50010	Наборы для установки катетера левого предсердия DLP, 3 F (1,0 мм)	84			

86

Внутренние номера компании

Указатель

[illegible]

93464	Канюли венозные VC2, 34/48 F (11,3/16,0 мм)	34
93464C	Канюли венозные VC2, 34/48 F (11,3/16,0 мм)	34
94006	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты = DLP, 6 F (2,0 мм)	50
94106	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 6 F (2,0 мм)	50
94110	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты Gundry, 10 F (3,3 мм)	49
94113T	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты Gundry, 13 F (4,3 мм)	49
94115T	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты Gundry, 15 F (5,0 мм)	49
94215T	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	50
94315T	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	52
94415T	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	52
94533	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 13 F (4,3 мм)	53
94535	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	53
94615	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты Gundry, 15 F (5,0 мм)	49
94625	Канюли DLP для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	51
94665	Канюли DLP для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	51
94715	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты Gundry, 15 F (5,0 мм)	49
94725	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	50
94735	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	52
94745	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	52
94835	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	54
94885	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	54
94885K	Канюли DLP для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	53
94895	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	54
94913	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 13 F (4,3 мм) ..	51

Внутренние номера компании

Указатель



94913L	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 13 F (4,3 мм) ..	51	96600-129	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 29 F (9,7 мм) .	24
94915	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм) ..	51	96670-115	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 15 F (5,0 мм)	24
94935	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	54	96670-117	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 17 F (5,7 мм)	24
94965	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм) ..	51	96670-119	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 19 F (6,3 мм)	24
94975	Канюли для ретроградной кардиоплегии с ручным наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм) ..	51	96670-121	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 21 F (7,0 мм)	24
94995	Канюли для ретроградной кардиоплегии с автоматическим наполнением манжеты DLP, 15 F (5,0 мм)	52	96670-123†	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 23 F (7,7 мм)	24
96328	Канюли бедренные венозные DLP, 28 F (9,3 мм)	26	96670-125†	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 25 F (8,3 мм)	24
96428	Канюли бедренные венозные DLP, 28 F (9,3 мм)	26	96670-127†	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 27 F (9,0 мм)	24
96530-115	Bio-Medicus NextGen Комплект чрескожный, бедренный артериальный, 15 F (5,0 мм)	22	96670-129†	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные венозные бикавальные, 29 F (9,7 мм)	24
96530-117	Bio-Medicus NextGen Комплект чрескожный, бедренный артериальный, 17 F (5,7 мм)	22	96820-108	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические артериальные, 8 F (2,7 мм)	21
96530-119	Bio-Medicus NextGen Комплект чрескожный, бедренный артериальный, 19 F (6,3 мм)	22	96820-110	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические артериальные, 10 F (3,3 мм) ..	21
96530-121	Bio-Medicus NextGen Комплект чрескожный, бедренный артериальный, 21 F (7,0 мм)	22	96820-112	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические артериальные, 12 F (4,0 мм) ..	21
96530-123	Bio-Medicus NextGen Комплект чрескожный, бедренный артериальный, 23 F (7,7 мм)	22	96820-114	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические артериальные, 14 F (4,7 мм) ...	21
96530-125	Bio-Medicus NextGen Комплект чрескожный, бедренный артериальный, 25 F (8,3 мм)	22	96830-108	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические венозные, 8 F (2,7 мм)	21
96551	Bio-Medicus NextGen Комплект для бедренного введения венозных	25	96830-110	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические венозные, 10 F (3,3 мм)	21
96552	Bio-Medicus NextGen Комплект для бедренного введения артериальный / для яремной вены	25	96830-112	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические венозные, 12 F (4,0 мм)	21
96553	Bio-Medicus NextGen Комплект для бедренного введения педиатрический артериальный / венозный	25	96830-114	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные педиатрические венозные, 14 F (4,7 мм)	21
96570-115	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные артериальные / для яремной вены, 15 F (5,0 мм) .	22	96880-019	Bio-Medicus Multi-Stage Комплекты чрескожные венозные многоступенчатые, 19 Fr (6,3 мм)	23
96570-117	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные артериальные / для яремной вены, 17 F (5,7 мм) .	22	96880-021	Bio-Medicus Multi-Stage Комплекты чрескожные венозные многоступенчатые, 21 F (7,0 мм)	23
96570-119	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные артериальные / для яремной вены, 19 F (6,3 мм) .	22	96880-025	Bio-Medicus Multi-Stage Комплекты чрескожные венозные многоступенчатые, 25 F (8,3 мм) .	23
96570-121	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные артериальные / для яремной вены, 21 F (7,0 мм) .	22			
96570-123	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные артериальные / для яремной вены, 23 F (7,7 мм) .	22			
96570-125	Bio-Medicus NextGen Канюли бедренные артериальные / для яремной вены, 25 F (8,3 мм) .	22			
96600-115	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 15 F (5,0 мм)	24			
96600-117	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 17 F (5,7 мм)	24			
96600-119	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 19 F (6,3 мм)	24			
96600-121	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 21 F (7,0 мм)	24			
96600-123	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 23 F (7,7 мм)	24			
96600-125	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 25 F (8,3 мм)	24			
96600-127	Bio-Medicus NextGen Комплекты с канюлей бедренной венозной бикавальной, 27 F (9,0 мм)	24			

Внутренние номера компании

Список изделий, доступных с биоактивным покрытием Cortiva



Экстракорпоральный контур – артериальные канюли

CB71424	Гибкие канюли для дуги аорты, 11 дюймов (28 см), 24 F (8,0 мм), коннектор 3/8 дюйма без люэр-порта с биоактивным покрытием Cortiva
CB72124	Артериальная канюля с армированным корпусом и прямым наконечником, 24 F, коннектор с люэр-портом и биоактивным покрытием Cortiva
CB72224	Артериальная канюля с армированным корпусом и прямым наконечником, 24 F, коннектор без люэр-порта и биоактивным покрытием Cortiva
CB75318	Артериальная канюля для взрослых, прямой наконечник, коннектор 3/8 дюйма, 18 F (6,0 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB75320	Артериальная канюля для взрослых, прямой наконечник, коннектор 3/8 дюйма, 20 F (6,7 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB77006	Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 9 дюймов (23 см), коннектор 1/4 дюйма с люэр-портом, 6 F (2,0 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB77008	Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 9 дюймов (23 см), коннектор 1/4 дюйма с люэр-портом, 8 F (2,7 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB77010	Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 9 дюймов (23 см), коннектор 1/4 дюйма с люэр-портом, 10 F (3,3 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB77012	Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 9 дюймов (23 см), коннектор 1/4 дюйма с люэр-портом, 12 F (4,0 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB77014	Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 9 дюймов (23 см), коннектор 1/4 дюйма с люэр-портом, 14 F (4,7 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB77016	Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 9 дюймов (23 см), коннектор 1/4 дюйма с люэр-портом, 16 F (5,3 мм), с биоактивным покрытием Cortiva
CB77420	Удлиненная цельнолитая артериальная канюля длиной 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с тупым наконечником без проводника, 20 F (6,7 мм), с люэр-портом и биоактивным покрытием Cortiva
CB77422	Артериальная канюля с удлиненным цельным корпусом длиной 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с тупым наконечником без проводника, 22 F (7,3 мм), с люэр-портом и биоактивным покрытием Cortiva
CB77520	Удлиненная цельнолитая артериальная канюля 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с тупым наконечником без проводника, 20 F (6,7 мм), без люэр-порта, с биоактивным покрытием Cortiva
CB77522	Артериальная канюля с удлиненным цельным корпусом длиной 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с тупым наконечником без проводника, 22 F (7,3 мм), без люэр-порта, с биоактивным покрытием Cortiva
CB77618	Удлиненная цельнолитая артериальная канюля 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с наконечником-бужем с проводником, 18 F (6,0 мм), с люэр-портом и биоактивным покрытием Cortiva
CB77620	Удлиненная цельнолитая артериальная канюля 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с наконечником-бужем с проводником, 20 F (6,7 мм), с люэр-портом и биоактивным покрытием Cortiva
CB77622	Удлиненная цельнолитая артериальная канюля 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с наконечником-бужем с проводником, 22 F (7,3 мм), с люэр-портом и биоактивным покрытием Cortiva

CB77720	Удлиненная цельнолитая артериальная канюля 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с наконечником-бужем с проводником, 20 F (6,7 мм), без люэр-порта, с биоактивным покрытием Cortiva
CB77722	Удлиненная цельнолитая артериальная канюля 12 дюймов (30,5 см), интродьюсер с наконечником-бужем с проводником, 22 F (7,3 мм), без люэр-порта, с биоактивным покрытием Cortiva
CB78222	Канюля EOPA 3D, 22 F, С ЛЮЭР-ПОРТОМ и биоактивным покрытием Cortiva
CB78322	Канюля EOPA 3D, 22 F, БЕЗ ЛЮЭР-ПОРТА и биоактивным покрытием Cortiva
CB80120	Канюля, металлический наконечник, 8,5 дюйма (21,6 см), мягкий фланец, 20 F (6,7 мм), коннектор 3/8 дюйма без люэр-порта с биоактивным покрытием Cortiva
CB81120	Артериальная канюля, ультрагибкий изогнутый наконечник, мягкий корпус 10 дюймов (25 см), коннектор 3/8 дюйма без люэр-порта, 20 F с биоактивным покрытием Cortiva
CB81122	Артериальная канюля, ультрагибкий изогнутый наконечник, мягкий корпус 10 дюймов (25 см), коннектор 3/8 дюйма без люэр-порта, 22 F с биоактивным покрытием Cortiva
CB87222	Артериальная канюля с армированным корпусом и изогнутым наконечником, 22 F, коннектор 3/8 дюйма с люэр-портом и биоактивным покрытием Cortiva

Экстракорпоральный контур – бедренные канюли

CB96345-023	Канюля для взрослых бедренная венозная с коннектором 1/2 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 23 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96345-025	Канюля для взрослых бедренная венозная с коннектором 1/2 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 25 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96345-027	Канюля для взрослых бедренная венозная с коннектором 1/2 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 27 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96345-029	Канюля для взрослых бедренная венозная с коннектором 1/2 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 29 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96570-015	Канюля бедренная артериальная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма с люэр-портом, 17 дюймов (43,2 см), 15 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96570-017	Канюля бедренная артериальная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма с люэр-портом, 17 дюймов (43,2 см), 17 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96570-019	Канюля бедренная артериальная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма с люэр-портом, 17 дюймов (43,2 см), 19 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96570-021	Канюля бедренная артериальная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма с люэр-портом, 17 дюймов (43,2 см), 21 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96670-015	Канюля бедренная венозная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 15 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96670-017	Канюля бедренная венозная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 17 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96670-019	Канюля бедренная венозная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 19 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB96670-021	Канюля бедренная венозная с интродьюсером, коннектором 3/8 дюйма без люэр-порта, 30 дюймов (76,2 см), 21 F, с биоактивным покрытием Cortiva

	металлический наконечник, 16 F, коннектор 1/4 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67318	Канюля венозная одноступенчатая педиатрическая, прямоугольный металлический наконечник, 18 F, коннектор 1/4 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67320	Канюля венозная одноступенчатая педиатрическая, прямоугольный металлический наконечник, 20 F, коннектор 1/4 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67520	Канюля венозная одноступенчатая, угловой наконечник, 20 F, (6,7 мм), коннектор 1/4-3/8 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67524	Канюля венозная одноступенчатая, угловой наконечник, 24 F, (8,0 мм), коннектор 1/4-3/8 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67528	Канюля венозная одноступенчатая, угловой наконечник, 28 F, (9,3 мм), коннектор 3/8 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67530	Канюля венозная одноступенчатая, угловой наконечник, 30 F, (10,0 мм), коннектор 3/8 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67532	Канюля венозная одноступенчатая, угловой наконечник, 32 F, (10,7 мм), коннектор 3/8 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67534	Канюля венозная одноступенчатая, угловой наконечник, 34 F, (11,3 мм), коннектор 3/8 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB67636	Канюля венозная одноступенчатая, угловой наконечник, 36 F, (12 мм), коннектор 3/8 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva
CB68112	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 12 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68114	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 14 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68116	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 16 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68118	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 18 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68120	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником,, 20 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68124	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 24 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68128	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 28 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68132	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 32 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB68136	Канюля венозная одноступенчатая с пластичным наконечником, 36 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB69320	Канюля венозная одноступенчатая высокопоточная, прямоугольный металлический наконечник, коннектором 3/8 дюйма, 20 F, с биоактивным покрытием Cortiva

Внутренние номера компании

Список изделий, доступных с биоактивным покрытием Cortiva



CB69324	Канюля венозная одноступенчатая высокопоточная, прямоугольный металлический наконечник, коннектор 3/8 дюйма, 24 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB69328	Канюля венозная одноступенчатая высокопоточная, прямоугольный металлический наконечник, коннектор 3/8 дюйма, 28 F, с биоактивным покрытием Cortiva
CB91228	Канюля венозная двухступенчатая MC2 28/36 F, с коннектором 3/8 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91228C	Канюля венозная двухступенчатая MC2 28/36 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91236C	Канюля венозная двухступенчатая MC2 36/46 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91240	Канюля венозная двухступенчатая MC2 32/40 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91240C	Канюля венозная двухступенчатая MC2 32/40 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91246	Канюля венозная двухступенчатая MC2 34/46 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91246C	Канюля венозная двухступенчатая MC2 34/46 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91263	Канюля венозная овальная MC2 32/40 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91263C	Канюля венозная овальная MC2 32/40 F, с коннектором 1/2 дюйма
CB91265	Канюля венозная овальная MC2 36/46 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91265C	Канюля венозная овальная MC2 36/46 F, с коннектором 1/2 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91329	Канюля венозная двухступенчатая, 29/29 F, с коннектором 3/8 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91329C	Канюля венозная двухступенчатая, 29/29 F, с коннектором 3/8 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91429	Канюля венозная трехступенчатая 29/ 29/ 29 F, с коннектором 3/8 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB91429C	Канюля венозная трехступенчатая 29/ 29/ 29 F, со ступенчатым коннектором 3/8 дюйма и биоактивным покрытием Cortiva
CB93438C	Атрио-кавальные канюли VC2 JR, 34 F / 38 F (11,3 мм/ 12 мм), армированный корпус, коннектор 1/2 дюйма с биоактивным покрытием Cortiva

Кардиоплегический контур – канюли для антеградной перфузии

CB10012	Стандартная канюля для корня аорты, 12 G (9 F), с биоактивным покрытием Cortiva
CB20012	Стандартная канюля для корня аорты с дренажной линией, 12 G (9 F), с биоактивным покрытием Cortiva

Аспирационный контур и хирургические вспомогательные инструменты – изделия для аспирации

CB12008	Катетер для дренирования левого желудочка педиатрический, ПВХ, 10 F (3,3 мм), преформированный наконечник 1/5 дюйма, коннектор в люэр-портом, 13 дюймов (33,0 см) с биоактивным покрытием Cortiva
---------	---



Medtronic

www.medtronic.ru
www.medtronic-cardiovascular.ru

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании Medtronic в вашей стране. Продукты в этом каталоге доступны клиентам в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и России.

Подробные инструкции по применению, показания, противопоказания, предупреждения, меры предосторожности и потенциальные нежелательные явления описаны в руководстве к медицинскому изделию. Для получения дополнительной информации обращайтесь к представителю компании Medtronic или на сайт компании <https://medtronic-cardiovascular.ru>.

Инструкции по применению соответствующих изделий представлены на сайте www.medtronic.com/manuals. Просмотр инструкций возможен при использовании актуальных версий большинства интернет-браузеров. Для удобства просмотра рекомендуется установить Adobe Acrobat Reader®.

ООО «Медтроник»
Россия, 123317, Москва.
Пресненская набережная, д. 10, стр. С
Тел: +7 495 580-73-77
Факс: +7 495 580-73-78

©2023 Medtronic. Все права защищены. "Medtronic", логотип "Medtronic" и "Engineering the extraordinary" являются товарными знаками компании Medtronic. Сторонние торговые марки являются товарными знаками их владельцев. Все прочие торговые марки принадлежат компании Medtronic.

«Для медицинских специалистов. Все данные и технические характеристики служат исключительно для ознакомительных целей».
«Для получения дополнительной информации обращайтесь к представителю компании Medtronic или на сайт компании www.medtronic.ru.»
Изделия хирургические DLP для проведения операций на открытом сердце

© Medtronic 2023

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7870 от 30.09.2022
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7637 от 24.09.2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9408 от 01.08.2022
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15650 от 27.10.2021
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13346 от 02.02.2021
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13482 от 01.08.2022
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2015/2446 от 02.03.2021

Регистрационное удостоверение №РЗН 2022/16506 от 07.02.2022
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13337 от 02.02.2021
Регистрационное удостоверение №РЗН 2021/16128 от 23.12.2021
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19909 от 29.03.2023
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/19287 от 30.12.2022
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2015/2446 от 02.03.2021
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2015/2446 от 02.03.2015